



Catalogue **HOSPITALIER**



Innovation



Performance



Développement



Spécialiste du dispositif médical à usage unique depuis 1985

Les dispositifs MÉDICAUX

Depuis leur **création en 1985**, les Laboratoires Euromédis, spécialisés dans la **fabrication, l'importation et la distribution de dispositifs médicaux à usage unique** sont devenus un des principaux fournisseurs des établissements de santé publics et privés. Fort de cette expérience : **3 Business Units** ; gant de chirurgie, set et habillage / drapage, ont été créés et développés.



Notre Objectif

Répondre aux besoins et aux contraintes des équipes chirurgicales, tant sur les matériaux que sur la conception des produits. La recherche des matières, le choix des composants, ainsi que l'élaboration des produits sont les fruits d'une écoute permanente de nos clients et sont liés à l'évolution de l'environnement des nouvelles techniques chirurgicales.

Service après-vente



Le **service après-vente** est une étape très importante. Toute l'entreprise est mobilisée et disponible pour votre **satisfaction** grâce à la gestion solide de son **SAV**.

Nous sommes **présents à vos côtés** pour répondre à toutes vos demandes.

Qualité et Service sont nos mots d'ordre afin de répondre au mieux à vos questions et vos besoins

PRODUITS DE MAINTIEN À DOMICILE



Afin de traiter votre demande, il vous suffit de flasher ce QR CODE et de nous retourner le document complété à l'adresse suivante : sav.mad@euromedis.fr

AUTRES PRODUITS



Afin de traiter votre demande, il vous suffit de flasher ce QR CODE et de nous retourner le document complété à l'adresse suivante : service.qualite@euromedis.fr

Sommaire



SPÉCIALITÉ BLOC OPÉRATOIRE

Gant de chirurgie.....	6
Habillage et drapage.....	11
Trousse.....	16
Set.....	24



AUTRE GAMME

Gant d'examen.....	30
Gant d'intervention et obstétriques.....	37
Soin.....	39
Abord parentéral.....	57
Sonde et drainage.....	64
Protection.....	68
Oxygénothérapie.....	74
Hygiène et Incontinence.....	76
Diagnostic.....	83
Plastique et cellulose.....	86
Maintien à domicile.....	87

Spécialité bloc opératoire

Des
produits
adaptés
à vos besoins
et à la réalité
de votre métier



GAMME COMPLÈTE

Une gamme complète
d'articles dédiés au bloc
opératoire répondant aux
besoins et aux contraintes
des équipes.



Gants chirurgicaux,
de microchirurgie
et sous-gants



Habillage et drapage
chirurgicaux



Trousses
chirurgicales



Sets de préparation
cutanée, cupules
et plateaux

Gant de chirurgie

LA GAMME GANT DE CHIRURGIE

Nous disposons d'une gamme de gant de chirurgie complète avec des produits alliant haute technicité, confort et protection des utilisateurs. Cet éventail de produits est composé à la fois de gants de chirurgie en latex mais également de gants synthétiques permettant d'éviter le risque d'allergie.

	PRÉCONISATION D'UTILISATION	MATIÈRE	ÉPAISSEUR DOIGTS	COULEUR	POUDRÉ	AQL
LATEX						
GANT DE CHIRURGIE SENSITIVE	Chirurgie générale	Latex naturel	0,18 MM	Blanc	NON	0,65
GANT DE CHIRURGIE POUDRÉ			0,23 MM	Crème	OUI	
GANT DE CHIRURGIE NON POUDRÉ			0,24 MM		NON	
MAXITEX® NEURO	Microchirurgie	Latex naturel	0,19 MM	Marron	NON	
GANT DE CHIRURGIE SYNTHÉTIQUE						
NUZONE®	Chirurgie générale	Neoprène	0,20 MM	Marron	NON	0,65
FINESSIS® ZERO			0,22 MM	Blanc		
FINESSIS® CORIUM	Microchirurgie ou sous gant	Flexylon®	0,19 MM	Vert	NON	0,1
FINESSIS® AEGIS (EX G VIR)	Chirurgie à risque et aseptique		0,29 MM	Vert et blanc		
POLYISOPRENE	Chirurgie générale	Polyisoprène	0,23 MM	Blanc		0,65

GANT DE CHIRURGIE EN POLYISOPRENE

Gant stérile en polyisoprène sans poudre. Idéal pour les interventions chirurgicales en bloc opératoire. Il dispose d'une forme anatomique et d'une surface micro-texturée permettant une meilleure préhension des instruments. Ses points forts résident dans son extensibilité proche du latex, son confort et sa sensibilité. Ce gant est optimal pour éviter d'éventuelles allergies au latex. AQL de 0.65

GAMME FINESSIS® EUROMEDIS

Le Flexylon®, matériau révolutionnaire, permet d'obtenir des gants aux niveaux d'étanchéité et de protection inégalés.

La mise en œuvre de ce matériau permet d'obtenir des films d'une très grande qualité offrant :

- une meilleure étanchéité avec absence de porosité permettant de garantir des niveaux d'assurance qualité (AQL) de 0.1 au lieu de 1.5.
- un effet barrière incomparable
- l'absence d'accélérateurs de vulcanisation et de réticulation apportent une réponse aux allergies « type I » (latex) et « type IV » (accélérateurs).
- un grand confort d'utilisation et une faible pression sur la peau car le matériau épouse parfaitement la main

AEGIS

En cas de chirurgie à haut risque ou aseptique. La technologie G VIR acquise par notre partenaire Adventa Health puis améliorée par l'utilisation du Flexylon® permet de limiter l'épaisseur du gant.

Grâce à la combinaison de l'effet barrière et d'agents désinfectants présents entre les deux couches d'élastomère, le gant AEGIS assure une protection et une sécurité supplémentaire aux utilisateurs confrontés à un AES* en présence d'agents bactériens ou viraux connus.

*AES : Accident d'exposition au sang.

TRAITEMENT POLYMER COATED

Le traitement polymer coated des gants permet d'éviter les réactions secondaires dues à une trop importante chlorination, il améliore la glisse et l'enfilage.

Finessis
Aegis®


Système de désinfection à réponse active

Finessis
Zero®

Barrière renforcée AQL = 0,1 propriétés uniques zéro accélérateurs de vulcanisation

Finessis
Corium®

Très haute sensibilité

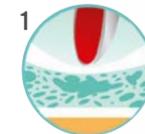

1
Fusion des gouttelettes lors de la pression à la surface du gant



2
Expulsion mécanique, action virucide et bactéricide immédiate

LIQUIDE
DÉSINFECTANT

Sensitive

Gant latex fin pour un confort et une sensibilité accrue

Polyisoprene

Extensibilité proche du latex, confort et sensibilité

Gant de chirurgie



GANT DE CHIRURGIE SYNTHÉTIQUE FINESSIS® ZERO

Gant de chirurgie synthétique sans latex et sans accélérateur. Fabriqué dans un matériau synthétique : le Flexylon®. Elastomère de synthèse à haute performance offrant un niveau d'étanchéité et une barrière de protection inégalée. Technologie de fabrication permettant de réaliser des films d'une très grande qualité. Pas de porosité intrinsèque du matériau. AQL = 0,1. Pas d'accélérateur de vulcanisation ni autres résidus chimiques. Grand confort d'utilisation grâce à la forme anatomique et la faible pression sur la peau. Manchette bord roulé anti enroulement. Coloris : blanc.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
114907G	Taille 5 ½	Palette de 27 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114900G	Taille 6	Palette de 27 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114901G	Taille 6 ½	Palette de 27 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114902G	Taille 7	Palette de 27 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114903G	Taille 7 ½	Palette de 27 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114904G	Taille 8	Palette de 27 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114905G	Taille 8 ½	Palette de 27 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114906G	Taille 9	Palette de 27 cartons de 4 boîtes de 50 paires.



GANT DE CHIRURGIE SYNTHÉTIQUE FINESSIS® CORIUM

Gant de chirurgie synthétique sans latex et sans accélérateur. Fabriqué dans un matériau synthétique : le Flexylon®. Corium est principalement destiné à être utilisé en sous-gant. Le sur-gantage est très aisé, avec tout type de gant externe. Elastomère de synthèse offrant un niveau d'étanchéité et une barrière de protection inégalée. Pas de porosité intrinsèque du matériau. AQL = 0,1. Sans accélérateur de vulcanisation ni autres résidus chimiques. Grand confort d'utilisation grâce à la forme anatomique. Manchette bord roulé anti enroulement. Coloris : vert.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
114910	Taille 6	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114911	Taille 6 ½	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114912	Taille 7	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114913	Taille 7 ½	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114914	Taille 8	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114915	Taille 8 ½	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114916	Taille 9	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.



GANT DE CHIRURGIE SYNTHÉTIQUE FINESSIS® AEGIS

Gant de chirurgie synthétique en Flexylon®, sans latex et sans accélérateur incluant un liquide désinfectant séquestré à l'intérieur du gant dans sa couche centrale. Aucun contact entre le désinfectant et la peau ou/et le patient dans les conditions normales d'utilisation. La solution antiseptique n'est libérée qu'en cas de rupture du gant, seulement à l'endroit de la rupture et uniquement de la quantité présente à cet endroit. Diminution de la charge virale (virus enveloppés) transmise en cas d'accident percutané. Coloris : vert et blanc.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
114920	Taille 6	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 40 paires.
114921	Taille 6 ½	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 40 paires.
114922	Taille 7	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 40 paires.
114923	Taille 7 ½	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 40 paires.
114924	Taille 8	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 40 paires.
114925	Taille 8 ½	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 40 paires.



GANT DE CHIRURGIE SYNTHÉTIQUE POLYISOPRENE MEDISPO

Gant stérile en polyisoprène sans poudre. Idéal pour les interventions chirurgicales en bloc opératoire. Il dispose d'une forme anatomique et d'une surface micro-texturée permettant une meilleure préhension des instruments. Ses points forts résident dans son extensibilité proche du latex, son confort et sa sensibilité. Ce gant est optimal pour éviter d'éventuelles allergies au latex. AQL de 0.65 Manchette bord roulé anti enroulement. Coloris : Blanc

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
MPIG55	Taille 5 ½	Palette de 52 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
MPIG60	Taille 6	Palette de 52 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
MPIG65	Taille 6 ½	Palette de 52 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
MPIG70	Taille 7	Palette de 52 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
MPIG75	Taille 7 ½	Palette de 52 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
MPIG80	Taille 8	Palette de 52 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
MPIG85	Taille 8 ½	Palette de 52 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
MPIG90	Taille 9	Palette de 52 cartons de 4 boîtes de 50 paires.



GANT DE CHIRURGIE SYNTHÉTIQUE NUZONE® - SANS POUVRE

Gant de chirurgie synthétique en néoprène. Recommandé pour la chirurgie orthopédique, cardiothoracique et générale. Couleur ambrée pour minimiser les reflets de l'éclairage opératoire. Emballage film PE/film PE. Manchette bord roulé anti-enroulement.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
114140	Taille 5 ½	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114141	Taille 6	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114142	Taille 6 ½	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114143	Taille 7	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114144	Taille 7 ½	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114145	Taille 8	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114146	Taille 8 ½	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114147	Taille 9	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.



Gant de chirurgie

GANT DE CHIRURGIE LATEX BORD ROULÉ - SANS POUVRE

Conception anatomique qui suit la forme naturelle des doigts. Surface rugueuse. Traitement polymer coated pour améliorer la glisse et l'enfilage. Recommandé pour tout type de chirurgie.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
114157	Taille 5 ½	Palette de 36 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114150	Taille 6	Palette de 36 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114151	Taille 6 ½	Palette de 36 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114152	Taille 7	Palette de 36 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114153	Taille 7 ½	Palette de 36 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114154	Taille 8	Palette de 36 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114155	Taille 8 ½	Palette de 36 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114156	Taille 9	Palette de 36 cartons de 4 boîtes de 50 paires.



GANT DE CHIRURGIE LATEX SENSITIVE MEDISPO - SANS POUVRE

Gant stérile en latex sans poudre. Idéal pour les interventions chirurgicales en bloc opératoire. Il dispose d'une forme anatomique et d'une surface micro-texturée permettant une meilleure préhension des instruments. Il est ultra fin, souple et extensible. AQL de 0.65

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
MLSG55	Taille 5 ½	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
MLSG60	Taille 6	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
MLSG65	Taille 6 ½	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
MLSG70	Taille 7	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
MLSG75	Taille 7 ½	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
MLSG80	Taille 8	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
MLSG85	Taille 8 ½	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
MLSG90	Taille 9	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.



GANT DE MICROCHIRURGIE LATEX MAXITEX® NEURO PF - SANS POUVRE

Surface rugueuse. Traitement polymer coated pour un enfilage facilité. Couleur ambrée permettant de minimiser les reflets de l'éclairage opératoire. Recommandé pour les procédures de microchirurgies comme l'ophtalmologie, la chirurgie de la main, la chirurgie plastique ou encore la chirurgie reconstructrice.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
114130	Taille 5 ½	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114131	Taille 6	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114132	Taille 6 ½	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114133	Taille 7	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114134	Taille 7 ½	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114135	Taille 8	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114136	Taille 8 ½	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114137	Taille 9	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50 paires.



Habillage et drapage

LA GAMME HYPÉRIA

La gamme d'habillage et de drapage chirurgicaux HYPERIA a pour objectif de répondre aux besoins et aux différentes contraintes des équipes opératoires. La recherche des matériaux, le choix des composants, ainsi que l'élaboration des produits sont le fruit d'une écoute permanente de nos clients et sont liés à l'évolution de l'environnement des nouvelles techniques chirurgicales.

Les matières utilisées répondent aux exigences réglementaires des normes européennes EN 13795-1 & 2. Celles-ci définissent différentes caractéristiques dont les valeurs permettent d'identifier :

- La résistance à la pénétration des liquides,
- La résistance à la pénétration microbienne,
- La propreté microbienne,
- La propreté particulaire (relargage particulaire),
- La résistance à la traction, état sec et humide,
- La résistance à l'éclatement, état sec et humide.

Notre choix s'est organisé autour du S.M.S (Spunbonded / Melblown / Spunbonded), tant pour les casques que pour le drapage avec des grammages différents répondant aux spécificités de chaque utilisation. Cette matière dispose des propriétés suivantes :

- Bonne résistance mécanique,
- Relargue très peu de particules,
- Bonne résistance à la pénétration des liquides.

Cette dernière propriété donnera entièrement satisfaction, notre S.M.S étant complété par des renforts sur les champs opératoires, en utilisant du Spunlace, laminé avec du polyéthylène alliant absorption et étanchéité.

CASAQUE CHIRURGICALE

Deux axes de qualité

1 Degré de protection

La casaque chirurgicale joue un rôle important dans la prévention des infections en empêchant le transfert de micro-organismes dans le bloc opératoire.

Elle sert un double objectif :

- Protéger le patient par la prévention du transfert des germes de l'opérateur au patient.
- Protéger l'opérateur contre la pénétration de liquides (sang, fluides corporels, substances chimiques) et de micro-organismes.

2 Confort de l'opérateur (praticien)

Le confort de l'opérateur a un impact significatif sur la performance de celui-ci, il dépend principalement des propriétés thermiques et de la conception de la casaque.

DRAPAGE CHIRURGICAL

La gamme de trouses chirurgicales Euromedis a pour objectif de répondre aux différentes contraintes de drapage pour chacun de vos besoins.

- Architecture de drapage adaptée au type de procédure.
- Matériau imperméable ou étanche en fonction de la procédure.
- Gamme permettant de répondre aux différentes spécialités chirurgicales.

ij NIVEAUX DE PERFORMANCES

Conformes aux exigences des normes EN 13795-1 & 2, ils vous assurent une :

- Barrière physique entre le patient et l'opérateur
- Barrière efficace contre les bactéries
- Résistance à la pénétration des liquides
- Propreté microbologique et un très faible relargage de particules

Habillage et drapage



CASAQUE STANDARD

Casaque chirurgicale standard stérile avec dos croisé, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure. Fournie avec deux essuie-mains.

+ Matière
S.M.S : Spunbond / Meltblown / Spunbond

+ Grammage
35 grammes / m²

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
161720	Taille M - 110 x 154 cm	Palette de 16 cartons de 40.
161721	Taille L - 120 x 154 cm	Palette de 16 cartons de 40.
161722	Taille XL - 130 x 158 cm	Palette de 20 cartons de 40.
161725	Taille XL - 140 x 160 cm	Palette de 16 cartons de 40.
161723	Taille XXL - 140 x 169 cm	Palette de 16 cartons de 40.
161724	Taille XLL - 150 x 158 cm	Palette de 16 cartons de 40.



CASAQUE STANDARD AVEC PASSE-POUCES

Casaque chirurgicale standard stérile avec passe-pouces, dos croisé, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure. Fournie avec deux essuie-mains.

+ Matière
S.M.S : Spunbond / Meltblown / Spunbond

+ Grammage
35 grammes / m²

Vente au carton. Palette de 16 cartons de 40.

Référence	Description
161752	Taille XL - 130 x 160 cm
161753	Taille XLL - 150 x 160 cm



CASAQUE STANDARD PLUS

Casaque chirurgicale standard stérile avec dos croisé, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure. Son traitement spécifique lui configure une excellente barrière. Fournie avec deux essuie-mains.

+ Matière
S.M.S : Spunbond / Meltblown / Spunbond

+ Grammage
35 grammes / m²

Vente au carton. Palette de 16 cartons de 40.

Référence	Description
161760	Taille L - 130 x 160 cm
161761	Taille XL - 140 x 160 cm
161762	Taille XLL - 150 x 160 cm
161763	Taille M - 110 x 154 cm
161764	Taille L - 120 x 154 cm
161765	Taille XXL - 140 x 169 cm
161766	Taille XL avec passe-pouces - 130 x 160 cm
161767	Taille XLL avec passe-pouces - 150 x 160 cm



CASAQUE RENFORCÉE

Casaque chirurgicale renforcée offrant une meilleure protection que la casaque standard, stérile avec dos croisé, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure. Renforcée au niveau des manches et du plastron avec la nouvelle technologie du film Micro-respirable, garantissant une excellente imperméabilité aux liquides. Fournie avec deux essuie-mains.

+ Matière
S.M.M.S. Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond

+ Grammage Renfort PE
38 grammes / m²

+ Grammage SMMS
43 grammes / m²

Vente au carton. Palette de 16 cartons de 40.

Référence	Description
161710	Taille L - 130 x 160 cm
161711	Taille XL - 140 x 160 cm
161712	Taille XXL - 140 x 169 cm
161713	Taille XLL - 150 x 160 cm

Habillage et drapage

CASAQUE RENFORCÉE AVEC PASSE-POUCES

Casaque chirurgicale renforcée offrant une meilleure protection que la casaque standard, stérile avec passe-pouce dos croisé, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure. Renforcée au niveau des manches et du plastron avec la nouvelle technologie du film Micro-respirable, garantissant une excellente imperméabilité aux liquides. Fournie avec deux essuie-mains.

Matière
S.M.M.S. Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond

Grammage Renfort PE
38 grammes / m²

Grammage SMMS
43 grammes / m²

Vente au carton. Palette de 16 cartons de 40.

Référence	Description
161750	Taille XL - 130 x 160 cm
161751	Taille XLL - 150 x 160 cm



CASAQUE RENFORCÉE AVEC PASSE-POUCES ET BAVETTE

Casaque chirurgicale renforcée offrant une meilleure protection que la casaque standard, stérile avec passe-pouce et bavette, dos croisé, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure. Renforcée au niveau des manches et du plastron avec la nouvelle technologie du film Micro-respirable, garantissant une excellente imperméabilité aux liquides. Fournie avec deux essuie-mains.

Matière
S.M.M.S. Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond

Grammage Renfort PE
38 grammes / m²

Grammage SMMS
43 grammes / m²

Vente au carton. Palette de 16 cartons de 40.

Référence	Description
161730	Taille XL - 130 x 160 cm
161731	Taille XLL - 150 x 160 cm



CASAQUE DE SOIN

Casaque de soin standard stérile avec dos croisé ou dos droit, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure. Fournie avec un essuie-mains.

Matière
S.M.S Spunbond / Meltblown / Spunbond

Grammage
35 grammes / m²

Vente au carton. Palette de 20 cartons de 40.

Référence	Description
161740	Dos croisé. Taille L - 125 x 140 cm
161741	Dos croisé. Taille XL - 135 x 140 cm
161742	Dos droit. Taille L - 125 x 140 cm
161743	Dos droit. Taille XL - 135 x 140 cm



CHAMP DE TABLE

Orifice central de Ø6 cm entouré d'une bande adhésive de 12 x 12 cm garantissant la fixité du champ durant une intervention.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
161610	140 x 120 cm	Palette de 24 cartons de 50.
161611A	140 x 160 cm	Palette de 24 cartons de 40.
161612	150 x 200 cm	Palette de 24 cartons de 40.
161613	140 x 190 cm	Palette de 24 cartons de 40.




HOUSSE POUR CAMERA

Housse de caméra endoscopique stérile en polyéthylène. Pliage télescopique. Longueur de 2500 mm pour 150 mm de largeur. Fournie avec 4 étiquettes de traçabilité.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
199731	Palette de 36 cartons de 50.

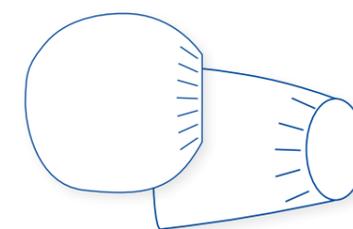

HOUSSE POUR AMPLIS DE BRILLANCE

Housse en polyéthylène emballé dans un champ bleu. Protection efficace s'adaptant parfaitement au produit.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
199732	Type rectangulaire - 90 x 150 cm	Palette de 36 cartons de 50.
199733	Type rectangulaire - 120 x 150 cm	Palette de 36 cartons de 50.
199701	Type charlotte - Ø 90 cm	Palette de 36 cartons de 50.
199702	Type charlotte - Ø 140 cm	Palette de 24 cartons de 50.
199703	Type charlotte - Ø 120 cm	Palette de 36 cartons de 50.



Trousse



LA GAMME

est composée d'un ensemble de trousse opératoires destinées aux différentes procédures chirurgicales.

Le **S.M.S**, les renforts **Spunlace** laminés avec du polyéthylène, ainsi que les **adhésifs hypoallergéniques** utilisés sont les éléments déterminants de ces produits. L'ensemble de ces matières répondent aux exigences réglementaires de la norme Européennes (EN 13795), et sont soumis à des contrôles de qualité stricts.

Tous nos emballages possèdent des **étiquettes de traçabilité** ainsi que le code barre EAN 128 simplifiant la gestion et le suivi des produits.

Le choix de ces différents matériaux, composants les trousse a été réalisé en fonction des contraintes et des besoins des équipes chirurgicales :

- Gamme permettant de répondre aux **différentes spécialités**,
- Architecture de drapage **adapté au type de procédure**,
- Matériau **imperméable** ou **étanche** en fonction de la procédure et ou de la zone opératoire.



TROUSSE UNIVERSELLE

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm,
 - 1 bande adhésive 8 x 50 cm,
 - 2 champs latéraux 75 x 100 cm,
 - 1 champ de pied 190 x 180 cm,
 - 1 champ de tête 250 x 150 cm.



Matière

S.M.S : Spunbond / Meltblown / Spunbond
Biplex : Polypropylène / polyéthylène



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
164000	Palette de 20 cartons de 12 sachets. Étiquette de traçabilité.

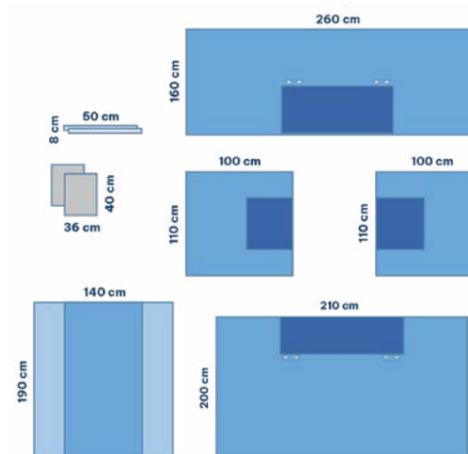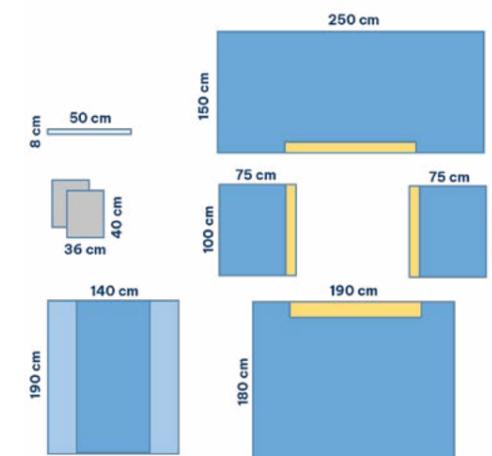

TROUSSE UNIVERSELLE RENFORCÉE

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm,
 - 2 bandes adhésives 8 x 50 cm,
 - 2 champs latéraux 110 x 100 cm, renfort absorbant,
 - 1 champ de pied 210 x 200 cm, renfort absorbant 40 x 68 cm adhésif sur 100 cm,
 - 1 champ de tête 260 x 160 cm, renfort absorbant adhésif sur 100 cm,
 - 4 languettes de maintien du cordon 10 x 10 cm.


Matière

S.M.S : Spunbond / Meltblown / Spunbond
Biplex : Polypropylène / polyéthylène



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
164002	Palette de 18 cartons de 8. Étiquette de traçabilité.

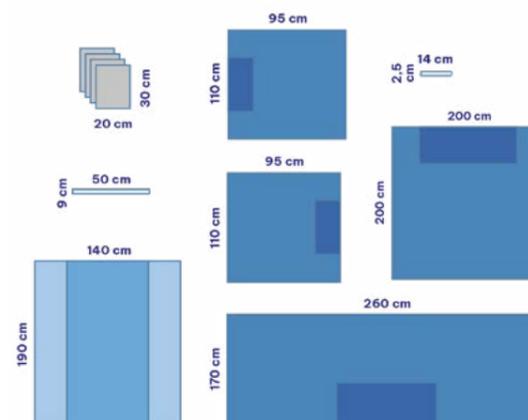

TROUSSE UNIVERSELLE RENFORCÉE

- 1 champ de table 140 x 190 cm :
- 4 essuie-mains 30 x 20 cm,
 - 1 bande auto-agrippante 14 x 2,5 cm,
 - 1 bande adhésive 9 x 50 cm,
 - 2 champs latéraux 110 x 95 cm, renfort de 67 x 30 cm, 5 x 104 cm d'adhésif,
 - 1 champ de pied 200 x 200 cm, renfort de 67 x 30 cm, 5 x 100 cm long adhésif,
 - 1 champ de tête 260 x 170 cm, renfort de 67 x 25 cm, 5 x 100 cm long adhésif,
 - 1 enveloppe bleu foncé SMS 90 x 90 cm.

Matière

Bilaminé : Polypropylène / polyéthylène
Renfort : Spunbond de polypropylène



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
164003	Carton de 8. Étiquette de traçabilité.

Trousse


TROUSSE DE PAROI

1 couvre table 120 x 140 cm :
- 4 champs 75 x 90 cm adhésif sur 90 cm.

Matière
+ S.M.S : Spunbond / Meltblown / Spunbond
Biplex : Polypropylène / polyéthylène

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
164005	Palette de 18 cartons de 25. Étiquette de traçabilité.

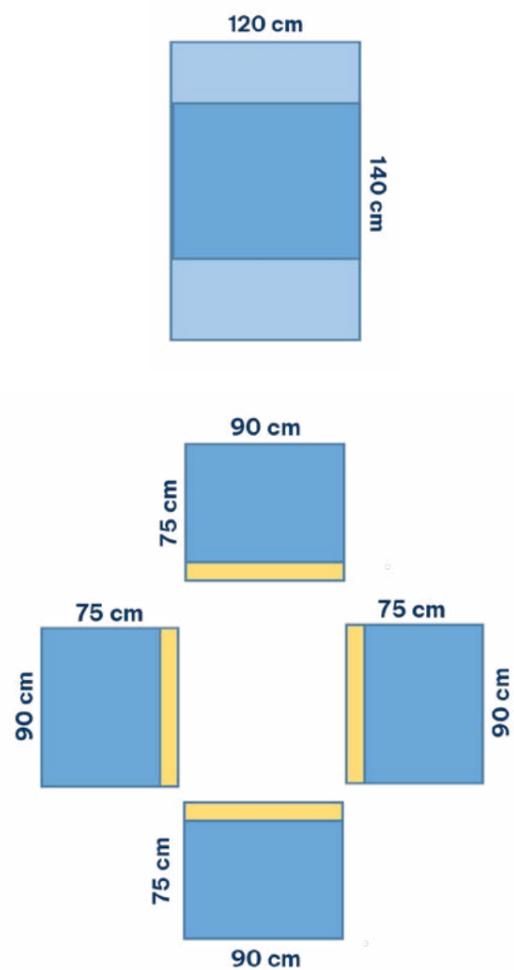


TROUSSE DE PAROI

1 couvre table 140 x 160 cm :
- 4 champs 75 x 90 cm adhésif sur 90 cm.
- 2 essuies mains 36 x 40 cm

Matière
+ S.M.S : Spunbond / Meltblown / Spunbond
Biplex : Polypropylène / polyéthylène

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
164008	Palette de 16 cartons de 25. Étiquette de traçabilité.

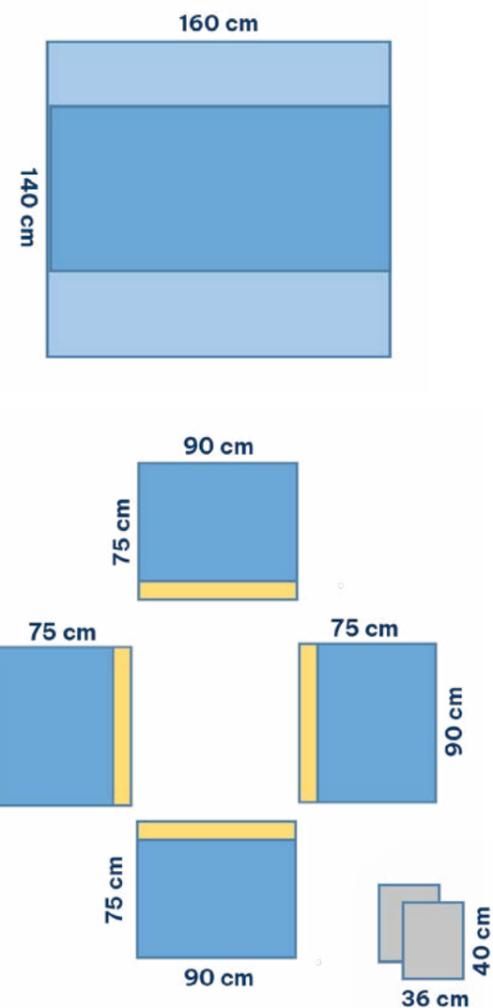


TROUSSE DE CÉSARIENNE

1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm,
- 1 couvre table 120 x 140 cm,
- 1 champ bébé 100 x 100 cm,
- 1 champ de césarienne 270 x 310 cm, renfort absorbant 65 x 50 cm,
fenêtre triangulaire adhésive 27 x 35 cm, passes-tubulures, poche de recueil avec robinet de vidange.

Matière
+ S.M.S : Spunbond / Meltblown / Spunbond

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
164200	Palette de 18 cartons de 10. Étiquette de traçabilité.

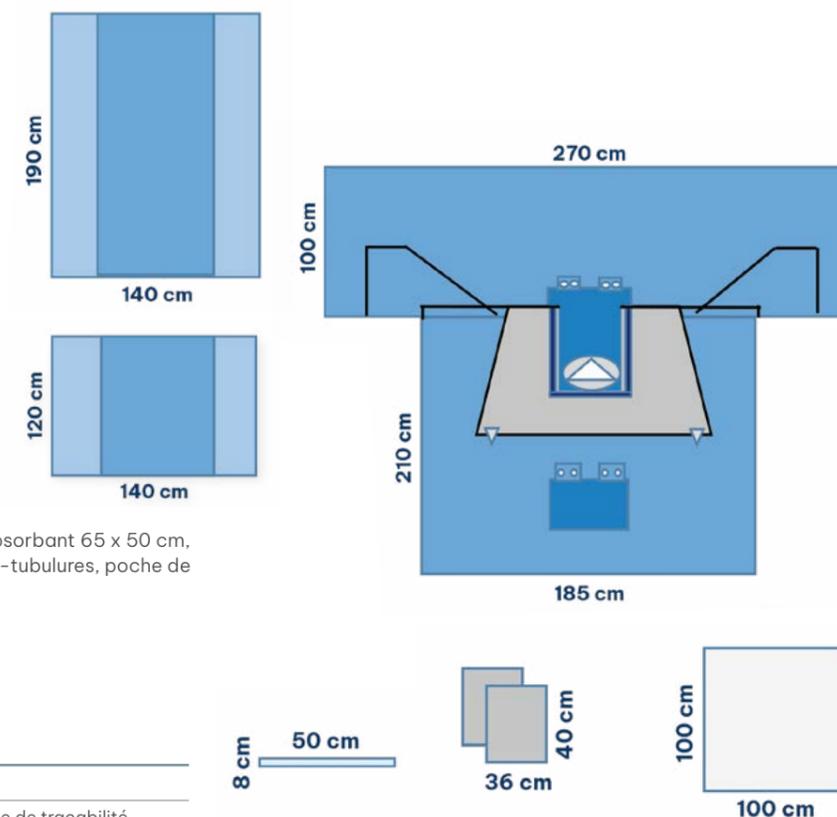


TROUSSE DE CÉSARIENNE

1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm,
- 1 champ Bébé 100 x 100 cm,
- 1 champ de césarienne 270 x 310 cm, renfort absorbant 65 x 50 cm,
fenêtre triangulaire adhésive 27 x 35 cm, passes-tubulures, poche de recueil avec robinet de vidange.

Matière
+ S.M.S : Spunbond / Meltblown / Spunbond

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
164204	Palette de 16 cartons de 10. Étiquette de traçabilité.

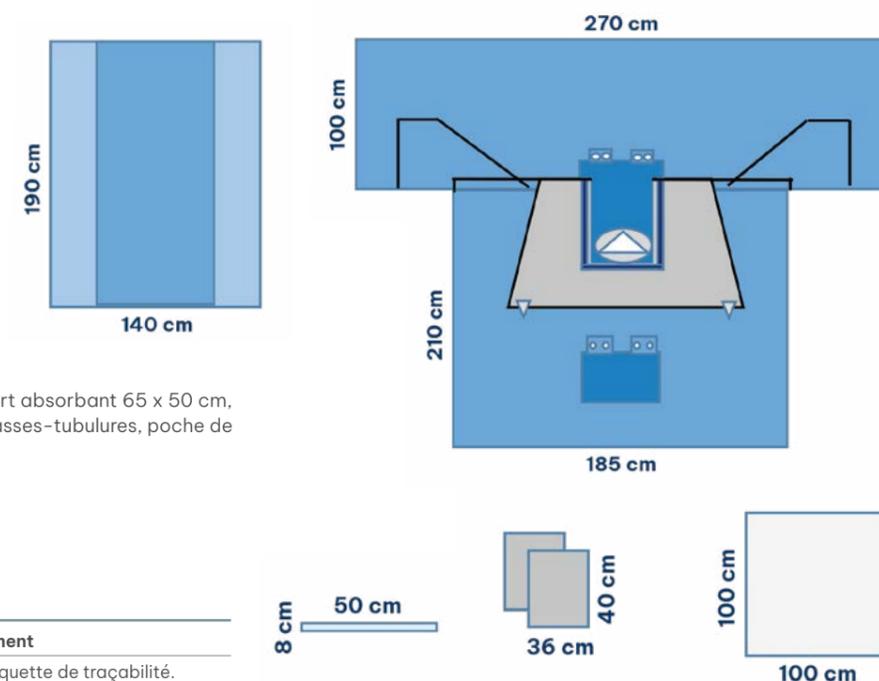

Trousse


TROUSSE ORTHOPÉDIE

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm,
 - 2 bandes adhésives 8 x 50 cm,
 - 1 champ d'approche en biplex 120 x 140 cm,
 - 1 champ en U 150 x 210 adhésifs 20 x 70 cm,
 - 1 champ de Tête 180 x 300 cm, renfort absorbant 40 x 68 cm adhésif sur 100 cm,
 - 1 grand champ en U 250 x 270, renfort absorbant 120 x 68 cm adhésifs 15 x 100 cm,
 - 1 enveloppe bleu SMS 90 x 90 cm pour protéger la trousse.

Matière
S.M.S : Spunbond / Meltblown / Spunbond
Biplex : Polypropylène / polyéthylène

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
164100	Palette de 18 cartons de 6. Étiquette de traçabilité.

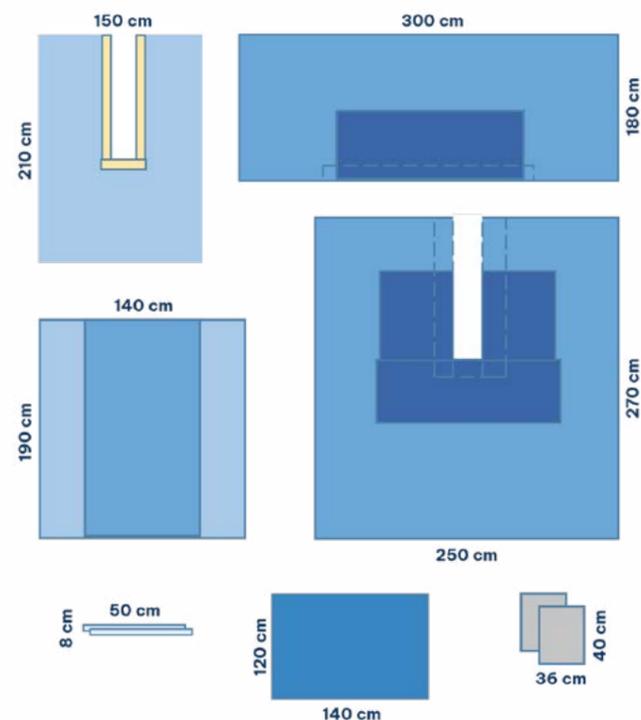


TROUSSE D'ISOLATION VERTICALE

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm,
 - 1 bande adhésive 8 x 50 cm,
 - 1 champ d'isolation 330 x 270 cm, en polyéthylène transparent avec poche de recueil et robinet, champ fenêtré à inciser 25 x 80 cm
 - 2 poches à instruments 25 x 27,5 cm.

Matière
S.M.S : Spunbond / Meltblown / Spunbond
P.E. Polyéthylène

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
164108	Palette de 18 cartons de 13. Étiquette de traçabilité.

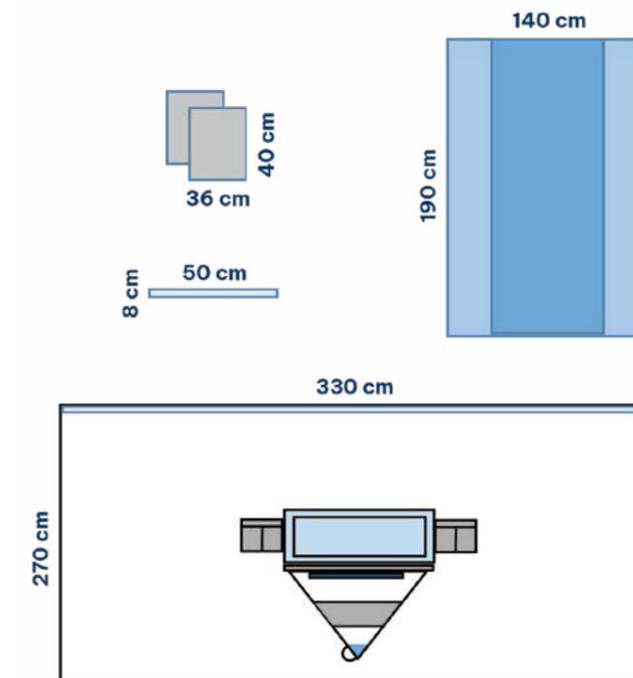


TROUSSE ORTHOPÉDIE

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 1 couvre table plié 140 x 190 cm,
 - 2 essuie-mains 36 x 40 cm,
 - 2 bandes adhésives 8 x 50 cm,
 - 1 champ d'approche en biplex 120 x 140 cm,
 - 1 champ en U 150 x 210 adhésifs 20 x 70 cm,
 - 1 champ de Tête 180 x 300 cm, renfort absorbant 40 x 68 cm, adhésif sur 100 cm,
 - 1 champ en U 270 x 320 cm renfort absorbant 116 x 68 cm adhésif 15 x 100 cm.

Matière
S.M.S : Spunbond / Meltblown / Spunbond
Biplex : Polypropylène / polyéthylène

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
164101	Palette de 18 cartons de 6. Étiquette de traçabilité.

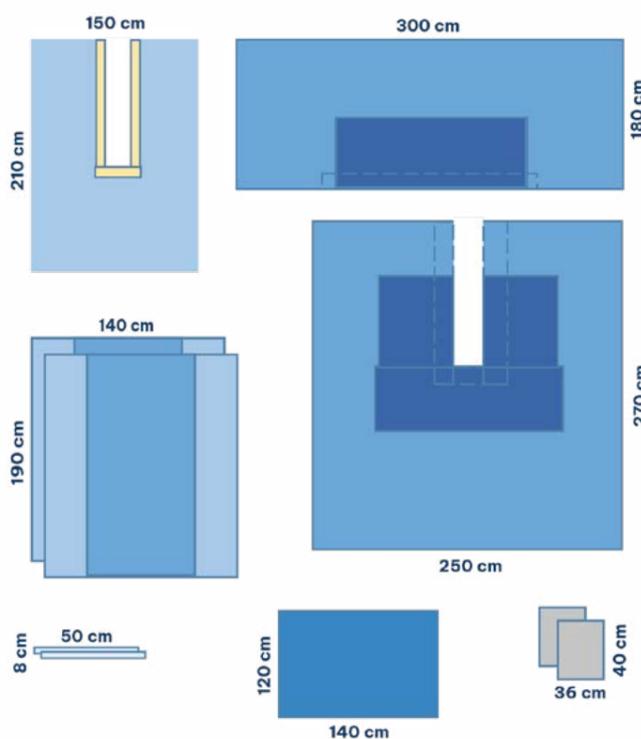


TROUSSE DE HANCHE

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 1 couvre table plié 140 x 190 cm,
 - 2 essuie-mains 36 x 40 cm,
 - 2 bandes adhésives 8 x 50 cm,
 - 1 champ d'approche 120 x 140 cm,
 - 1 champ en U 150 x 210 cm avec adhésifs, dimensions du U 35 x 70 cm,
 - 1 champ de tête 180 x 300 cm renfort absorbant 40 x 68 cm, adhésif sur 100 cm,
 - 1 champ en U 270 x 320 cm, renfort absorbant 116 x 68 cm, adhésif 15 x 100 cm, deux fenêtres élastiques Ø 6 cm avec protection.

Matière
S.M.S : Spunbond / Meltblown / Spunbond
Biplex : Polypropylène / polyéthylène

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
164109	Palette de 9 cartons de 6. Étiquette de traçabilité.

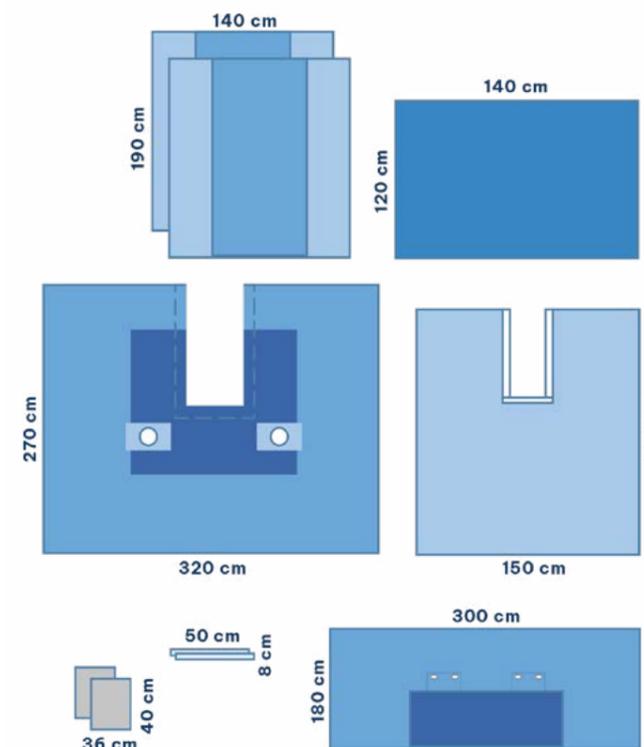

Trousse


TROUSSE EXTRÉMITÉ RENFORCÉE

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 bandes adhésives 8 x 50 cm,
- 1 champ d'approche 120 x 140 cm,
- 1 champ d'extrémité 320 x 240 cm, fenêtre élastique excentrée Ø 6 cm renfort absorbant 70 x 160 cm avec 4 passes tubulaires.

Matière
S.M.S : Spunbond / Meltblown / Spunbond
Biplex : Polypropylène / polyéthylène

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
164102	PaLETTE de 18 cartons de 12 sachets. Étiquette de traçabilité.

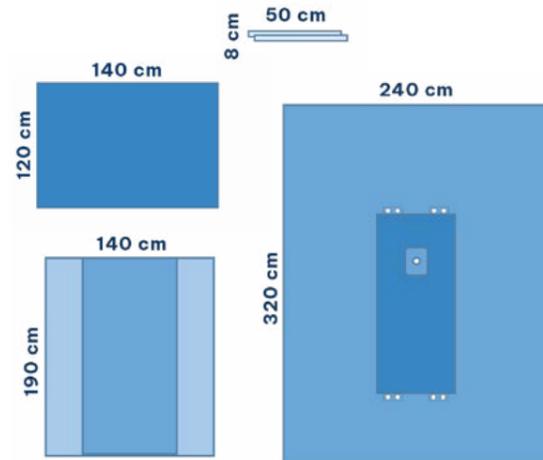


TROUSSE EXTRÉMITÉ

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 1 bande adhésive 8 x 50 cm,
- 1 champ d'extrémité 300 x 240 cm fenêTRe élastique Ø 6 cm.

Matière
S.M.S : Spunbond / Meltblown / Spunbond
Biplex : Polypropylène / polyéthylène

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
164103	PaLETTE de 20 cartons de 12 sachets. Étiquette de traçabilité.

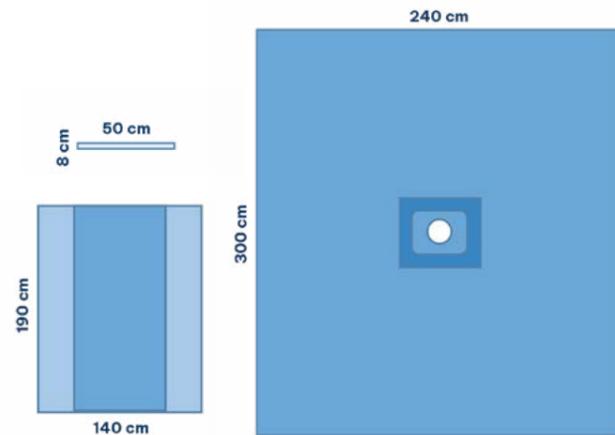


TROUSSE EXTRÉMITÉ

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 1 bande adhésive 8 x 50 cm,
- 1 champ d'approche 120 x 140 cm,
- 1 champ d'extrémité 300 x 240 cm fenêTRe élastique Ø 6 cm.

Matière
S.M.S : Spunbond / Meltblown / Spunbond
Biplex : Polypropylène / polyéthylène

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
164104	PaLETTE de 16 cartons de 12 sachets. Étiquette de traçabilité.

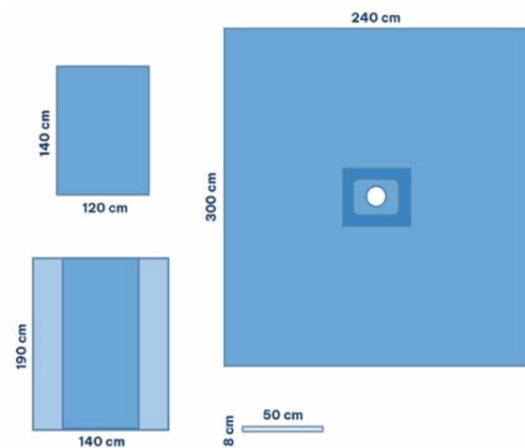


TROUSSE DE MAIN

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 1 bande adhésive 8 x 50 cm,
- 1 champ d'approche 120 x 140 cm,
- 1 champ de mains 360 x 320 cm avec table à bras (160 x 140 cm) et fenêTRe élastique Ø 5 cm renfort absorbant 41 x 85 cm avec 4 passes tubulaires.

Matière
S.M.S : Spunbond / Meltblown / Spunbond
Biplex : Polypropylène / polyéthylène

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
164105	PaLETTE de 15 cartons de 12 sachets. Étiquette de traçabilité.

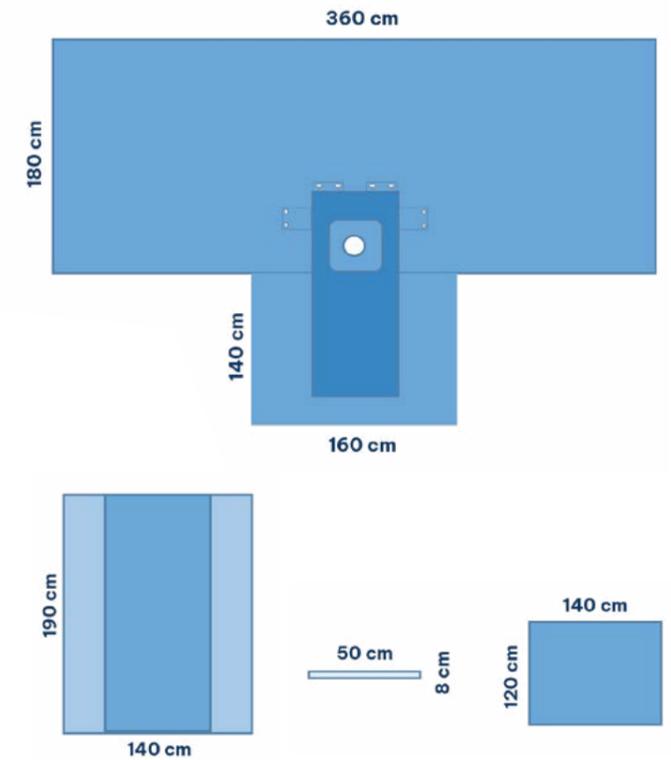


TROUSSE CÉLIOSCOPIE VOIE MIXTE

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm
- 1 champ 255 x 300 cm avec plis d'aisance intégrant :
• FenêTRe abdominale adhésive 34 x 38 cm,
• FenêTRe périnéale adhésive 11 x 14 cm,
• 2 poches à instruments 37,5 x 61 cm,
• 4 velcros adhésifs repositionnables pour fixer les tubulures,
- 1 champ de protection de la trousse 100 x 100 cm

Matière
S.M.S : Spunbond / Meltblown / Spunbond

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
164006	PaLETTE de 9 cartons de 10 sachets. Étiquette de traçabilité.

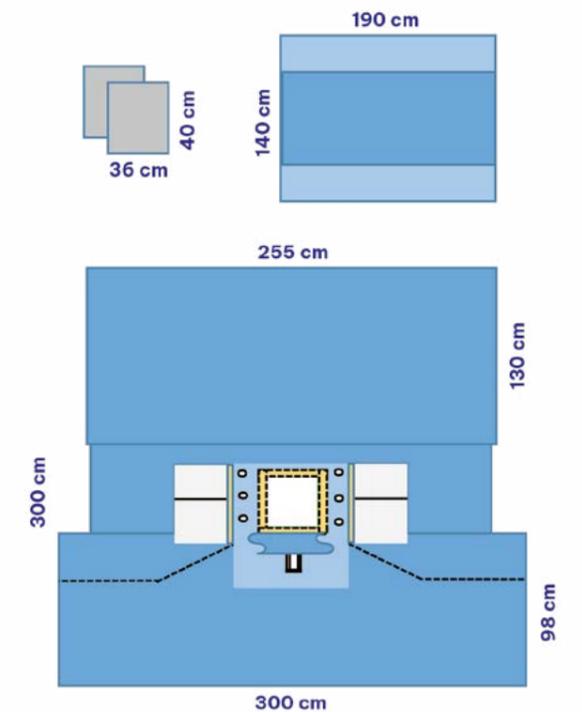

Set



LA GAMME SET DE PRÉPARATION CUTANÉE, CUPULE ET PLATEAU

Offre aux équipes opératoires une réponse sûre, plus rapide, plus écologique et plus économique afin de s'adapter aux recommandations sur l'antisepsie préopératoire de la peau

GARANTIE EUROMEDIS

- Son expertise acquise au long des années
- Une large gamme à votre disposition
- Une réponse adaptée à vos besoins spécifiques

BLISTER

Utilisation des blisters avec cupules thermoformées à la place des plateaux et des cupules :

- Plus écologique en réduisant le volume des déchets
- Plus compact réduisent le volume de stockage
- Plus économique
- Les cupules thermoformées remplacent les cupules individuelles

UNE LARGE GAMME DE BLISTER ADAPTÉE À L'UTILISATION :

BLISTER AVEC COMPARTIMENTS :

- 1 ou 3 compartiments formant «cupules» d'une contenance de 150 ml pour contenir les liquides de lavage, rinçage et antisepsie
- 1 compartiment principal pour disposer les composants du set



275 x 135 x 45 mm

290 x 200 x 45 mm

BLISTER SANS COMPARTIMENT :

- Le blister forme un grand plateau pour disposer les composants du set



275 x 135 x 45 mm

290 x 200 x 45 mm

BADIGEONS MOUSSES :

Utilisation de badigeons mousses en polyuréthane résistants aux solutions alcooliques à la place de la pince porte tampons et tampons

SET DE DÉTERSION/BADIGEON AVEC GANT ET CARRÉ D'ESSUYAGE

Vente au carton.



Composants	Référence			
	174416	174929	174410	174411
Blister 290 x 200 mm		1	1	
Blister 290 x 200 mm avec 4 compartiments				1
Blister 275 x 135 mm	1			
Gant de toilette non tissé		2	2	3
Carré d'essuyage 33 x 33 cm	4	3	2	3
Cupule 120ml	3			
Cupule 150ml		2	3	
Cupule thermoformée 150 ml				3
Etiquette de traçabilité	2	2	2	2
Conditionnement	Palette de 24 ctns de 30	Palette de 16 ctns de 40	Palette de 16 ctns de 40	Palette de 16 ctns de 40

SET DE DÉTERSION/BADIGEON AVEC BATONNET MOUSSE ET PINCE PORTE TAMPON

Vente au carton.



Composants	Référence						
	174957	174613	174427	174432	174955	174614-1	173093-1
Blister 290 x 200 mm avec 4 compartiments	1	1	1	1	1	1	1
Pince porte tampon 24 cm						1	1
Bâtonnet mousse 15 cm	1	2	2	2			
Bâtonnet mousse 23 cm					1		
Tampon NT Ø5 cm						5	3
Gant de toilette NT	4	2	2	3	3	3	2
Carré d'essuyage 33 x 33 cm		2	4	3	3	3	1
Cupule thermoformée 150 ml	3	3	3	3	3	3	3
Etiquette de traçabilité	2	2	2	2	2	2	2
Conditionnement	Pal. de 14 cartons de 40	Pal. de 30 cartons de 20	Pal. de 8 cartons de 50	Pal. de 8 cartons de 50	Pal. de 16 cartons de 40	Pal. de 16 cartons de 40	Pal. de 12 cartons de 40

SET DE DÉTERSION/BADIGEON AVEC COMPRESSES

Vente au carton.



Composants	Référence			
	174612	174956	174439	174435
Blister 290 x 200 mm avec 4 compartiments	1	1	1	1
Gant de toilette non tissé		6	3	2
Compresse en non-tissé 10 x 10 cm	20	20	20	15
Cupule thermoformée 150 ml	3	3	3	3
Carré d'essuyage 33 x 33 cm			3	3
Etiquette de traçabilité	2	2	2	2
Conditionnement	Pal. de 16 cartons de 40	Pal. de 12 cartons de 40	Pal. de 8 cartons de 40	Pal. de 16 cartons de 40

Set

ij LE SOUS CONDITIONNEMENT EN SACHET :

- Facilite la distribution des sets de la zone de stockage au bloc opératoire
- Contribue à la suppression des cartons au bloc opératoire

SET DE BADIGEON EN SIMPLE EMBALLAGE

Vente au carton.

Composants	Référence			
	173081	174606	174602	174603
Blister 195 x 155 mm avec 4 alvéoles				1
Blister 290 x 200 mm		1		
Blister 275 x 135 mm	1		1	
Pince kocher				1
Bâtonnet mousse 15 cm	2			
Bâtonnet mousse 23 cm		2		
Pince porte-tampon 24 cm			1	
Tampon NT Ø5 cm - taille pêche			5	6
Cupule 120 ml	2			
Cupule 150 ml		2	1	
Etiquette de traçabilité	2	2	2	2
Conditionnement	Pal. de 20 ctns de 40	Pal. de 16 ctns de 40	Pal. de 12 ctns de 50	Pal. de 30 ctns de 50



SET DE BADIGEON EN DOUBLE EMBALLAGE

Double emballage : Blister rigide dans sachet ou sachet dans sachet.

Vente au carton.

Composants	Référence			
	174610	174959	174690	174429
Sachet pelable	1	1	1	1
Blister 275 x 135 mm	1		1	1
Blister 275 x 135 mm avec 2 compartiments		1		
Pince porte tampon 23 cm	1	1	1	2
Tampon NT Ø5 cm - taille pêche	5	5	6	6
Cupule 150 ml	1		1	1
Cupule thermoformée 200 ml		1		
Etiquette de traçabilité	2	2	2	2
Conditionnement	Palette de 16 ctns de 30	Palette de 16 ctns de 30	Palette de 16 ctns de 30	Palette de 24 ctns de 30



PLATEAU

Vente au carton.

Composants	Référence			
	174631	174632	174633	174634
Sachet souple	1	1	1	
Plateau 245 x 135 x 50 mm	1			
Plateau 265 x 165 x 45 mm		1		
Plateau 300 x 200 x 50 mm			1	
Plateau 325 x 265 x 50 mm				1
Etiquette de traçabilité	2	2	2	2
Conditionnement	Palette de 6 ctns de 50	Palette de 12 ctns de 40	Palette de 12 ctns de 20	Palette de 6 ctns de 20

ij BÂTONNET MOUSSE EN BLISTER AVEC CUPULE THERMOFORMÉE
Mousse en polyuréthane très absorbante et adaptée aux solutions à base d'alcool. En double emballage pour prise en main par l'équipe stérile.

INSTRUMENT SATELLITE EN DOUBLE EMBALLAGE

- 2 sachets pelables
- 1 bâtonnet mousse
- 2 étiquettes de traçabilité

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
174696	Bâtonnet mousse 15 cm	Palette de 20 cartons de 200
174697	Bâtonnet mousse 23 cm	Palette de 12 cartons de 200

ij La grande dimension du bâtonnet 23 cm augmente la distance entre le soignant et le patient. La surface plus importante de la mousse du bâtonnet 23 cm assure l'antiseptie d'une zone plus étendue.



BÂTONNET MOUSSE 15 CM SIMPLE EMBALLAGE

- Sachet pelable
- Bâtonnet mousse 15 cm
- 2 étiquettes de traçabilité

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
173097	Palette de 32 cartons de 200.



BÂTONNET MOUSSE 15 CM DOUBLE EMBALLAGE

- Sachet pelable
- Blister 195 x 100 mm
- Cupule thermoformée 120 ml
- Bâtonnet mousse 15 cm
- 2 étiquettes de traçabilité

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
174601	Palette de 30 cartons de 50.



BÂTONNET MOUSSE 23 CM DOUBLE EMBALLAGE

- Sachet pelable
- Blister 275 x 135 mm
- Cupule thermoformée 150 ml
- Bâtonnet mousse 23 cm
- 2 étiquettes de traçabilité

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
174609	Palette de 16 cartons de 45.



CUPULE STÉRILE

En polypropylène transparent. Elles sont graduées afin de connaître le volume contenu. Deux étiquettes de traçabilité repositionnables sont disponibles sur l'emballage.

- Simple emballage

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
174615	60 ml - 60 mm	Palette de 35 cartons de 100.
174616	90 ml - 75 mm	Palette de 35 cartons de 100.
174617	120 ml - 80 mm	Palette de 30 cartons de 100.
174618	150 ml - 90 mm	Palette de 30 cartons de 100.
174619	250 ml - 100 mm	Palette de 9 cartons de 75.
174620	500 ml - 125 mm	Palette de 15 cartons de 50.
174621	1000 ml - 165 mm	Palette de 16 cartons de 30.
174622	2000 ml - 220 mm	Palette de 6 cartons de 30.



- Double emballage

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
174623	60 ml - 60 mm	Palette de 36 cartons de 75.
174624	90 ml - 75 mm	Palette de 36 cartons de 75.
174625	120 ml - 80 mm	Palette de 20 cartons de 75.
174626	150 ml - 90 mm	Palette de 25 cartons de 75.
174627	250 ml - 100 mm	Palette de 15 cartons de 50.
174628	500 ml - 125 mm	Palette de 16 cartons de 40.
174629	1000 ml - 165 mm	Palette de 8 cartons de 30.
174630	2000 ml - 220 mm	Palette de 10 cartons de 25.



Autre gamme

Tous les soins à portée de main

Des
produits
adaptés
à vos besoins
et à la réalité
de votre métier



Gants :
stériles et non stériles



Soins :
instruments, pansements,
sets, bandes, compresses



Abord parentéral :
aiguilles, seringues,
perfuseurs, cathéters



Sonde et drainage :
poches à urine, sondes de
Foley, sondes PVC



Protection :
draps d'examen, blouses, charlottes,
couvres-chaussures, masques



Oxygénothérapie :
lunettes, masques et sondes
à oxygène



Hygiène et incontinence :
slips, pants, couches droites, alèses,
gants de toilettes, lingettes



Diagnostic :
thermomètres, tensiomètres,
oxymètre, spéculums, stéthoscopes



Plastique et cellulose :
haricots, boîtes à dentiers, bracelets
d'identifications, vessies à glaces



Maintien à domicile :
déambulateur, fauteuil de transfert,
canne, sièges de douche, garde-robe

GAMME GANT



Gants d'examen

Doigtier roulé	36
Euronyl®	35
Eurotex®	36
Resiskin®	34
Sensisafe®	35
Sensiskin®	34
Softskin®	35

Gants d'intervention et d'obstétrie

Gant d'intervention latex	38
Gant obstétrique	38

Gant d'examen

RÈGLEMENT (UE) 2016/425 : ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

NF EN ISO 374-1

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - Partie 1 : Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques. Elle spécifie les exigences relatives aux gants de protection servant à protéger l'utilisateur contre les produits chimiques dangereux et définit les termes à utiliser. Conformément à cette norme, les gants sont classés en 3 catégories : Type A, Type B ou Type C, en fonction de leur niveau de performance à la perméation et du nombre de produits chimiques contre lesquels ils peuvent protéger. Le tableau ci-contre reprend le niveau de performance et le nombre de produits chimiques requis pour chaque catégorie. Ces tests sont effectués conformément à la NF EN 16523-1+A1.

Catégorie	Niveau de performance minimum requis	Nombre de produits chimiques minimum sur les 18 recensés
A	2 (transit time ≥ 30 min.)	6
B	2 (transit time ≥ 30 min.)	3
C	1 (transit time ≥ 10 min.)	1

Niveaux de performance à la perméation

Temps de passage mesuré (min)	Niveau de performance à la perméation
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

Liste des produits chimiques d'essai selon la NF EN ISO 374-1

Lettre code	Produit chimique	Numéro Cas	Classe
A	Methanol	67-56-1	Primary alcohol
B	Acetone	67-64-1	Cetone
C	Acetonitrile	75-05-8	Nitrile compound
D	Dichloromethane	75-09-2	Chlorinated
E	Carbon disulphide	75-15-0	Organic compound containing sulphur
F	Toluene	108-88-3	Aromatic hydrocarbon
G	Diethylamine	109-89-7	Amine
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterocyclic ether compound
I	Ethyl acetate	141-78-6	Ester
J	n-Heptane	141-82-5	Saturated hydrocarbon
K	Sodium hydroxyde 40%	1310-73-2	Inorganic base
L	Sulphuric acid 96 %	7664-93-9	Inorganic oxidant mineral acid
M	Nitric acid 65 %	7697-37-2	Inorganic oxidant mineral acid
N	Acetic acide 99%	64-19-7	Organic acid
O	Ammonia 25%	1336-21-6	Organic base
P	Hydrogen peroxide 30%	7722-84-1	Peroxide
S	Hydrogen fluorure 40%	7664-39-3	Inorganic mineral acid
T	Formaldéhyde 37%	50-00-0	Aldéhyde

NF EN ISO 374-2

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - Partie 2 : Détermination de la résistance à la pénétration. Elle une méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la pénétration des gants de protection contre les produits chimiques et/ou micro-organismes dangereux.

NF EN ISO 374-4

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - Partie 4 : Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques. Elle spécifie la méthode d'essai pour la détermination de la résistance des matériaux des gants de protection à la dégradation par contact continu avec des produits chimiques dangereux.

NF EN ISO 374-5

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - Partie 5 : Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes. Elle spécifie une méthode d'essai permettant de déterminer la résistance à la pénétration des gants qui protègent contre les micro-organismes.

NF EN ISO 21420

Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai. Elle définit les exigences générales et les procédures d'essai concernant l'ergonomie et la construction du gant, la résistance des matériaux constitutifs à la pénétration de l'eau, l'innocuité, le confort et l'efficacité, le marquage et l'information fournie par le fabricant applicable à tous les gants de protection.

NF EN 16523-1+A1

Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques - Partie 1 : Perméation par des produits chimiques liquides potentiellement dangereux dans des conditions de contact continu. Elle spécifie une méthode d'essai pour la détermination de la résistance des matériaux utilisés dans la confection de vêtements de protection, gants et chaussures à la perméation par des produits chimiques liquides potentiellement dangereux, dans des conditions de contact continu.

Légendes de pictogrammes

Pictogrammes	ISO 374-1/Type A	ISO 374-1/Type B	ISO 374-1/Type C	ISO 374-5:2016	ISO 374-5:2016	RHT	Adapté au contact alimentaire
Marquages	Gant de type A	Gant de type B	Gant de type C	Gants protégeant contre les virus, les bactéries et les moisissures	Gants protégeant contre les virus, les bactéries et les moisissures	Absence de phtalate CMR (réglementation REACH)	Adapté au contact alimentaire selon règlements (UE) n°10/2011 et 1935/2004

Indice de perméation des gants Euromedis

Lettre code	Produit chimique	VINYLE		LATEX		NITRILE				Polyuréthane SOFTSKIN
		EURONYL	SENSISAFE 240 mm	EUROTEX POUFRE	EUROTEX SANS POUFRE	SENSISKIN	RESISKIN 240 mm	RESISKIN 300 mm	RESISKIN 400 mm	
J	N HEPTANE									
K	HYDROXYDE DE NA 40%	6	6	2		6	6	6	6	6
L	AC SULFURIQUE 96%									
M	ACIDE NITRIQUE 65 %				2					
N	AC ACETIQUE 99%									
O	AMMONIAQUE 25%									
P	PEROXYDE D'HYDROGENE 40%	6	6			2	2	3	3	
S	FLURORURE D'HYDROGENE 40%			2	2					
T	FORMALDÉHYDE 37%	6	6	2	2	4	4	6	6	
		Type B	Type B	Type B	Type B	Type B	Type B	Type B	Type B	Type C

RÈGLEMENT (UE) 2017/745 – DISPOSITIFS MÉDICAUX

NORME NF EN 455-1+A1

Gants médicaux non réutilisables - Partie 1 : Exigences et essais pour la détection de l'absence de trous. Elle spécifie des exigences et indique la méthode d'essai permettant de déterminer l'absence de trous dans les médicaux non réutilisables.

NORME NF EN 455-2

Gants médicaux non réutilisables - Partie 2 : Exigences et essais pour propriétés physiques. Elle spécifie les exigences et méthodes d'essai relatives aux propriétés physiques des gants médicaux non réutilisables (c'est-à-dire des gants de chirurgie et des gants d'examen et de soins), afin de garantir qu'ils assurent et conservent pendant toute la durée de leur utilisation un niveau de protection suffisant contre toute contamination croisée, à la fois pour le patient et pour l'utilisateur

NORME NF EN 455-3

Gants médicaux non réutilisables - Partie 3 : Exigences et essais pour évaluation biologique. Elle spécifie les exigences permettant d'évaluer la sécurité biologique des gants médicaux à usage unique. Elle mentionne aussi les exigences d'étiquetage des gants et de diffusion des informations concernant les méthodes d'essai utilisées.

NORME NF EN 455-4

Gants médicaux non réutilisables - Partie 4 : Exigences et essais relatifs à la détermination de la durée de conservation. Elle les exigences et les méthodes d'essai permettant de déterminer la durée de conservation des gants médicaux non réutilisables ainsi que les exigences relatives à l'étiquetage et à la diffusion des informations concernant les méthodes d'essai utilisées.

Tous les gants d'examen non stériles ont un AQL de 1,5.

Légendes de pictogrammes

Pictogrammes							
Marquages	Dispositif médical	Usage unique	Ne pas utiliser si emballage endommagé	CE	Notice d'utilisation	Absence de phtalate CMR (réglementation REACH)	Adapté au contact alimentaire selon règlements (UE) n°10/2011 et 1935/2004

	VINYLE	LATEX	NITRILE
	Polychlorure de vinyle, PVC	Latex de caoutchouc naturel, NRL	Caoutchouc nitrile butadiène, NBR
Élastomère	Plastique avec plastifiant	Élastomère naturel	Élastomère synthétique
Base chimique	Polymère thermoplastique à base de chlorure de polyvinyle	Polymère naturel à base de cis-1,4-polyisoprène	Copolymère à base d'acrylonitrile butadiène
Barrière de protection	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●
Robustesse	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●
Elasticité	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●
Résistance à la perforation	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●
Résistance aux produits chimiques	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●
Ajustement et confort	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●
Risques utilisateurs	Faibles car aucune protéine de latex mais présence d'ingrédients chimiques. Idéal pour les personnes sensibles aux allergies.	Liés à la présence de latex, il peut y avoir des réactions immédiates, problèmes respiratoires, démangeaisons, urticaires... Risque d'allergie type I et IV.	Faibles car aucune protéine de latex mais présence d'ingrédients chimiques. Risque d'allergie type IV.
Utilisation	Actes de courtes durées ne comportant ni sang, ni liquides corporels.	Utilisation pour des gestes précis nécessitant de la sensibilité et de la dextérité	Utilisation pour des gestes précis nécessitant de la sensibilité et de la dextérité avec l'avantage d'être moins allergisant et plus résistant aux produits chimiques.

Gant d'examen

GANTS
NITRILES

SENSISKIN - SANS POUVRE

Gant nitrile souple permettant un toucher de grande sensibilité. Utilisation pour les décontaminations, le nettoyage et la manipulation d'agents cytostatiques. Ils offrent une bonne résistance aux produits chimiques. Ils disposent d'une surface lisse sur la paume et d'une surface rugueuse sur le bout des doigts.



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
127550	Extra small (5/6)	Palette de 66 crts de 10 btes de 100.
127551	Small (6/7)	Palette de 66 crts de 10 btes de 100.
127552	Medium (7/8)	Palette de 66 crts de 10 btes de 100.
127553	Large (8/9)	Palette de 66 crts de 10 btes de 100.
127554	Extra large (9/10)	Palette de 66 crts de 10 btes de 100.



RESISKIN - SANS POUVRE

Gants en nitrile sans poudre offrant une bonne résistance aux produits chimiques. Recommandés pour les personnes ne pouvant utiliser de gants en latex. Leur flexibilité permet un toucher de grande sensibilité. Ils disposent d'une surface rugueuse.

• Manchette longue - 300 mm

Résistance à de nombreux produits chimiques.



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
127575	Small (6/7)	Palette de 45 cartons de 10 boîtes de 100.
127576	Medium (7/8)	Palette de 45 cartons de 10 boîtes de 100.
127577	Large (8/9)	Palette de 45 cartons de 10 boîtes de 100.
127578	Extra large (9/10)	Palette de 45 cartons de 10 boîtes de 100.

• Manchette extra longue - 400 mm

Idéal pour le nettoyage des endoscopes et manipulation des agents cytostatiques.



Vente au carton.


Référence	Description	Conditionnement
127544	Extra Small (5/6)	Palette de 36 cartons de 10 boîtes de 50.
127545	Small (6/7)	Palette de 36 cartons de 10 boîtes de 50.
127546	Medium (7/8)	Palette de 36 cartons de 10 boîtes de 50.
127547	Large (8/9)	Palette de 36 cartons de 10 boîtes de 50.
127548	Extra large (9/10)	Palette de 36 cartons de 10 boîtes de 50.



GANT FIN & TRÈS RÉSISTANT

SOFTSKIN® - SANS POUVRE

Gant en pluréthane sans poudre. Alternative innovante aux gants en latex, nitrile ou vinyle. Ils offrent une bonne sensibilité tactile, sont très souples et ont une barrière efficace.

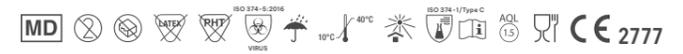

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
107720	Small (6/7)	Palette de 54 cartons de 10 boîtes de 100.
107721	Medium (7/8)	Palette de 54 cartons de 10 boîtes de 100.
107722	Large (8/9)	Palette de 54 cartons de 10 boîtes de 100.
107723	Extra Large (9/10)	Palette de 54 cartons de 10 boîtes de 100.



EURONYL® SANS POUVRE

Gant ambidextre en vinyle sans poudre, non stérile. Il dispose d'une surface lisse et d'un bord roulé pour faciliter l'enfilage.

Précautions d'emploi : Il n'est pas recommandé de mettre les gants vinyles sans poudre en contact avec les produits alimentaires contenant des huiles et/ou des graisses.



Vente au carton.


Référence	Description	Conditionnement
107119PM	Extra small (5/6)	Palette de 72 cartons de 10 boîtes de 100.
107115PM	Small (6/7)	Palette de 72 cartons de 10 boîtes de 100.
107116PM	Medium (7/8)	Palette de 72 cartons de 10 boîtes de 100.
107117PM	Large (8/9)	Palette de 72 cartons de 10 boîtes de 100.
107118PM	Extra large (9/10)	Palette de 72 cartons de 10 boîtes de 100.



SENSISAFE® - SANS POUVRE

Gant ambidextre en vinyle stretch sans poudre, non stérile. Il dispose d'une surface lisse et d'un bord roulé pour faciliter l'enfilage. Véritable seconde peau alliant souplesse et élasticité permettant une parfaite adaptation aux mains.

Précautions d'emploi : Il n'est pas recommandé de mettre les gants vinyles sans poudre en contact avec les produits alimentaires contenant des huiles et/ou des graisses.

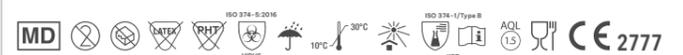

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
107610A	Extra small (5/6)	Palette de 72 cartons de 10 boîtes de 100.
107611A	Small (6/7)	Palette de 72 cartons de 10 boîtes de 100.
107612A	Medium (7/8)	Palette de 72 cartons de 10 boîtes de 100.
107613A	Large (8/9)	Palette de 72 cartons de 10 boîtes de 100.
107614A	Extra large (9/10)	Palette de 72 cartons de 10 boîtes de 100.

Gant d'examen



EUROTEX® - SANS POUVRE

Gants en latex sans poudre idéaux pour les utilisateurs ayant besoin de sensibilité, confort et dextérité. Leur surface rugueuse et antidérapante permet une préhension précise des instruments.

Précautions d'emploi : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel pouvant provoquer des réactions allergiques voire même des chocs anaphylactiques



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
127510NF	Extra small (5/6)	Palette de 54 cartons de 10 boîtes de 100.
127511NF	Small (6/7)	Palette de 54 cartons de 10 boîtes de 100.
127512NF	Medium (7/8)	Palette de 54 cartons de 10 boîtes de 100.
127513NF	Large (8/9)	Palette de 54 cartons de 10 boîtes de 100.
127514NF	Extra large (9/10)	Palette de 54 cartons de 10 boîtes de 100.



DOIGTIER ROULÉ - SANS POUVRE

Doigtier roulé sans poudre en latex. Apprécié en milieu industriel, il présente une bonne sensibilité tactile. Longueur : 70 mm

Vente au sachet.

Référence	Description	Conditionnement
108100A	Medium N°3	Palette de 30 cartons de 150 sachets de 100.
108102A	Large N°4	Palette de 36 cartons de 150 sachets de 100.
108103	Extra large N°5	Palette de 32 cartons de 150 sachets de 100.

Gant d'intervention et obstétriques

Les gants d'intervention sont indiqués pour les utilisations suivantes :

- Réservé aux actes chirurgicaux de courte durée < 30 min
- Utilisation hors blocs opératoires
- Pose de cathéters centraux, sutures, soins de brûlures, biopsie, pose de drain thoracique, ponction hépatique

Ils sont donc une excellente solution pour les services soins hors blocs et permettent d'éviter une surconsommation de gants chirurgicaux. Leur fabrication et leurs contrôles sont identiques à ceux des gants de chirurgie car ils relèvent des mêmes normes internationales

RÈGLEMENTATION : DIRECTIVE 93/42/CEE - RÈGLEMENT (UE) 2017/745 POUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX

- Elle définit ce qu'est un dispositif médical, sa classe, les exigences essentielles pour sa fabrication, les mentions obligatoires de son étiquetage, les conditions pour sa mise sur le marché, les contrôles effectués par les autorités sanitaires.
- Les gants d'intervention stériles sont des dispositifs de classe IIA car ils peuvent être en contact avec des parties internes du corps.

NORME NF EN 455-1+A1

Gants médicaux non réutilisables - Partie 1 : Exigences et essais pour la détection de l'absence de trous. Elle spécifie des exigences et indique la méthode d'essai permettant de déterminer l'absence de trous dans les médicaux non réutilisables.

NORME NF EN 455-2

Gants médicaux non réutilisables - Partie 2 : Exigences et essais pour propriétés physiques. Elle spécifie les exigences et méthodes d'essai relatives aux propriétés physiques des gants médicaux non réutilisables (c'est-à-dire des gants de chirurgie et des gants d'examen et de soins), afin de garantir qu'ils assurent et conservent pendant toute la durée de leur utilisation un niveau de protection suffisant contre toute contamination croisée, à la fois pour le patient et pour l'utilisateur

NORME NF EN 455-3

Gants médicaux non réutilisables - Partie 3 : Exigences et essais pour évaluation biologique. Elle spécifie les exigences permettant d'évaluer la sécurité biologique des gants médicaux à usage unique. Elle mentionne aussi les exigences d'étiquetage des gants et de diffusion des informations concernant les méthodes d'essai utilisées.

NORME NF EN 455-4

Gants médicaux non réutilisables - Partie 4 : Exigences et essais relatifs à la détermination de la durée de conservation. Elle les exigences et les méthodes d'essai permettant de déterminer la durée de conservation des gants médicaux non réutilisables ainsi que les exigences relatives à l'étiquetage et à la diffusion des informations concernant les méthodes d'essai utilisées.

NORME NF EN ISO 11137-1

Stérilisation des produits de santé - Irradiation - Partie 1 : exigences relatives à la mise au point, à la validation et au contrôle de routine d'un procédé de stérilisation pour les dispositifs médicaux

Spécifie les exigences relatives à la mise au point, à la validation et au contrôle de routine d'un procédé de stérilisation par irradiation pour les dispositifs médicaux. Bien que le domaine d'application de la présente partie de l'ISO 11137 se limite aux dispositifs médicaux, elle spécifie les exigences et fournit des directives qui peuvent être applicables à d'autres produits et équipements

RÈGLEMENT (UE) 2016/425 : ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Se référer à la page 32

Gant d'intervention et obstétriques



GANT D'INTERVENTION LATEX BORD ROULÉ - SANS POUDRE

Conception anatomique. Surface rugueuse. Traitement polymer coated pour améliorer l'enfilage. Recommandé pour les interventions chirurgicales hors bloc.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
114200P	Taille 6	Palette de 42 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114201P	Taille 6 ½	Palette de 42 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114202P	Taille 7	Palette de 42 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114203P	Taille 7 ½	Palette de 42 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114204P	Taille 8	Palette de 42 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114205P	Taille 8 ½	Palette de 42 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
114206P	Taille 9	Palette de 42 cartons de 4 boîtes de 50 paires.



GANT D'INTERVENTION LATEX BORD DROIT - SANS POUDRE

Gant anatomique stérile. Traitement « Polymer Coated » pour améliorer la glisse et l'enfilage du gant non poudré. Surface rugueuse.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
127270P	Taille 6	Palette de 24 cartons de 6 boîtes de 50 paires.
127271P	Taille 6 ½	Palette de 24 cartons de 6 boîtes de 50 paires.
127272P	Taille 7	Palette de 24 cartons de 6 boîtes de 50 paires.
127273P	Taille 7 ½	Palette de 24 cartons de 6 boîtes de 50 paires.
127274P	Taille 8	Palette de 24 cartons de 6 boîtes de 50 paires.
127275P	Taille 8 ½	Palette de 24 cartons de 6 boîtes de 50 paires.
127276P	Taille 9	Palette de 24 cartons de 6 boîtes de 50 paires.



GAMME SOIN



GANT OBSTÉTRIQUE SANS POUDRE

Spécifiquement recommandé aux gestes d'obstétrie et doté d'une manchette extra longue, ce gant offre un important pouvoir de protection. Anatomique. Surface rugueuse.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
216122	Taille 6 ½	Palette de 18 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
216124	Taille 7 ½	Palette de 18 cartons de 4 boîtes de 50 paires.
216126	Taille 8 ½	Palette de 18 cartons de 4 boîtes de 50 paires.



Set et instrument

Bistouri	45
Champs de soin Eurodrape®	42
Coupe-fils	45
Curette dermatologique stérile	44
Instrument satellite stérile	45
Lame de bistouri	45
Punch à biopsie stérile	44
Set d'ablation de fils	43
Set d'anesthésie	43
Set de pansement	41, 44
Set de suture	43

Pansement

Anapore®	49
Eurofix®	49
Europlaie®	47
Eurovit®	48
Méditulle®	47
Pansement	47

Bandes et filets

Bandage tubulaire	51
Bande de crêpe	50
Bande de gaze extensible	50
Filet tubulaire	51

Compresse et coton

Boule de gaze ou non-tissé non stérile	56
Boule de gaze ou non-tissé stérile	56
Compresse de gaze ou non-tissé non stérile	55
Compresse de gaze stérile	53
Compresse en non-tissé stérile	54
Compresse oculaire stérile	55
Compresse ORX pour laparotomie	55
Coton	56

Set et instrument

GARANTIE EUROMEDIS

- Son expertise acquise au long des années
- Une large gamme à votre disposition
- Une réponse adaptée à vos besoins spécifiques



AVANTAGE DES SETS

Découvrez nos sets
Pansement, suture, perfusion, pharmacie, cupule


- Rapidité de mise en œuvre
- Respect des règles d'asepsie
- Stérilité garantie
- Utilisation des emballages comme soutien au geste médical
- Économique (quantité et type de composants étudiés), pas de gaspillage
- Gain de temps, prêt à l'emploi, usage unique



Instrumentation



Set pharmacie

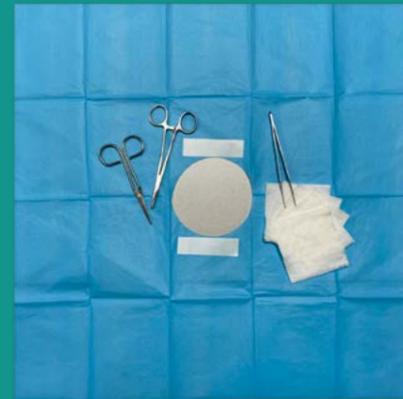

Set de suture/ablation




Set de pansement pour pose de perfusion



Cupule



Set de pansement

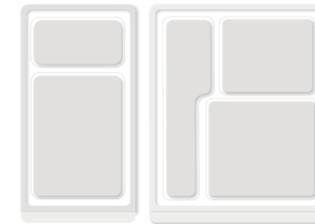

SET DE PANSEMENT

Présentés en blister rigide 2, 3, 4 alvéoles ou en sachet pelable.

Avec ou sans étiquettes de traçabilité. Différents composants :

- Champ de soin absorbant imperméable
- Pince anatomique en plastique à bouts mousses ou fins (bleue, verte ou rouge).
- Pince Kocher en plastique
- Tampons de gaze ou en non-tissé - Ø 3 cm
- Compresses en non-tissé ou de gaze

SET DE PANSEMENT SANS CHAMP

* Composant arrivant en 1^{er} à l'ouverture du blister.



Vente au carton. Carton de 50.

Composants	Référence				
	174966	174965	C10102K	D1552K	D1500K
Blister rigide 2 alvéoles	1				
Blister rigide 3 alvéoles		1	1		
Blister rigide 4 alvéoles				1	1
Pince anatomique bleue mousse	1*				
Pince anatomique verte mousse	1	1	1		1
Pince anatomique verte fine				1	
Pince kocher bleue 14 cm		1*	1*	1*	1*
Comresse non-tissé 7,5 x 7,5 cm		5	10	5	
Tampon gaze Ø3 cm (prune)	3				
Tampon non tissé Ø3 cm (prune)				5	5
Étiquette de traçabilité			2		
Carton par palette	35	35	25	35	40

SET DE PANSEMENT AVEC CHAMP

* Composant arrivant en 1^{er} à l'ouverture du blister

Vente au carton. Carton de 50.

Composants	Référence									
	CD1552K	CD1552K-1	CD1552K-4	174942	CD1552K-3	174944	174937	CC1052K-1	CD11000K	
Blister rigide 4 alvéoles	1	1	1	1	1	1	1		1	
Blister rigide 3 alvéoles								1		
Champ imperméable 38 x 45 cm	1	1*	1	1*	1	1*	1	1*	1*	
Pince anatomique verte mousse		1	1		1			1	1	
Pince anatomique verte fine	1			1		1	1			
Pince kocher bleue 14 cm	1*	1	1*	1	1*		1*	1	1	
Comresse non-tissé 7,5 x 7,5 cm	5	5	5	5	5	5		5		
Comresse gaze 7,5 x 7,5 cm							5			
Tampon non tissé Ø 3 cm (prune)	5	5	5							10
Tampon gaze Ø 3 cm (prune)				5	5	5	6			
Carton par palette	35	25	25	30	25	35	35	32		25

Vente au carton. Carton de 50.

Composants	Référence									
	CC2052K	CD2652K	CD2552K	174940	174943	CD2600-1	CB2800	CD2522	CB2555-1	
Blister rigide 3 alvéoles	1		1	1						
Blister rigide 4 alvéoles					1	1	1	1	1	
Champ imperméable 38 x 45 cm	1*	1	1*	1*	1*	1	1	1	1	
Pince anatomique bleue mousse	1	1*	1			1*				1*
Pince anatomique verte mousse	1	1	1							
Pince anatomique bleue fine				1	1		1*	1*		
Pince anatomique verte fine				1	1	1	1	1	1	
Pince kocher bleue 14 cm	1	1	1							
Comresse non-tissé 7,5 x 7,5 cm	5	5	5					2	5	
Tampon non tissé Ø 3cm (prune)		6	5			6	8	5	5	
Tampon gaze Ø 3 cm (prune)				5	6					
Carton par palette	24	25	24	35	35	40	35	35	24	

Sets et instruments



CHAMP DE SOINS SIMPLE STÉRILE

Champ de soins à usage unique pour la petite chirurgie et les soins particuliers. Composé d'une feuille opaque de polyéthylène doublée d'une feuille absorbante de cellulose.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
161600	40 x 45 cm	Palette de 50 cartons de 4 boîtes de 50
161601	45 x 75 cm	Palette de 20 cartons de 4 boîtes de 50
161602	75 x 90 cm	Palette de 15 cartons de 4 boîtes de 50



CHAMP DE SOINS STÉRILE ADHÉSIF

Composé d'une bande adhésive sur la longueur permettant de rattacher le champ à un autre champ, ou à assurer une protection supplémentaire lors de l'intervention. Autre avantage : le champ ne risque pas de glisser durant l'intervention.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
161620	50 x 50 cm - 5 x 50 cm	Palette de 25 cartons de 4 boîtes de 50
161621	50 x 70 cm - 5 x 70 cm	Palette de 20 cartons de 4 boîtes de 50
161622	75 x 75 cm - 5 x 75 cm	Palette de 20 cartons de 4 boîtes de 50
161623	75 x 90 cm - 5 x 90 cm	Palette de 20 cartons de 4 boîtes de 50



CHAMP DE SOINS STÉRILE FENÊTRÉ

Présente un orifice central de différente taille selon le champ. Indiqué pour les opérations spécifiques nécessitant une intervention locale avec risque de forte exsudation.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
161630	50 x 60 cm - Ø 6 cm	Pal. de 56 ctns de 4 btes de 25
161632	70 x 90 cm - Orifice 7 x 12 cm	Pal. de 25 ctns de 4 btes de 25



CHAMP DE SOINS STÉRILE FENÊTRÉ ADHÉSIF

Allie les caractéristiques du champ fenêtré en garantissant la fixité de celui-ci durant l'intervention. Diamètre 6 cm + adhésif 12 x 12 cm autour du trou.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
161640	50 x 50 cm	Palette de 40 cartons de 4 boîtes de 50.
161641	50 x 70 cm	Palette de 30 cartons de 4 boîtes de 50.
161642	70 x 90 cm	Palette de 18 cartons de 4 boîtes de 50.



SET DE SUTURE

Présentation en blister rigide 4 alvéoles, 1 alvéole dédiée aux compresses et 2 étiquettes de traçabilité repositionnables.

* Composant arrivant en 1er à l'ouverture du blister.

Vente au carton de 50.

Composants	Référence							
	174647	174648	173930	174668	174671	174667	174953	174400 (suture fine)
Blister rigide 4 alvéoles	1	1	1	1	1	1	1	1
Champ de table 38 x 45 cm				1*	1*	1*	1*	1*
Champ fenêtré adhésif 50 x 50 cm	1*	1*	1*	1	1	1	1	1
Porte aiguille 12 cm métal	1	1	1	1	1	1	1	
Porte aiguille fin (Derf) 12 cm métal								1
Pince à disséquer sans griffes 12,5 cm métal	1							
Pince à disséquer à griffes 12,5 cm métal				1				
Pince Adson à griffes 12,5 cm métal		1	1		1		1	
Pince Adson sans griffes 12,5 cm métal						1	1	
Pince anatomique verte bouts fins			1					
Pince micro Adson sans griffes 12,5 cm métal								1
Ciseaux bouts pointus 11,5 cm métal	1	1	1	1	1	1	1	1
Compresses non-tissé 7,5 x 7,5 cm	5	5	5	5	5	5	5	5
Étiquette de traçabilité	2	2	2	2	2	2	2	2
Carton par palette	35	35	20	35	35	35	30	24

SET D'ANESTHÉSIE

Vente au carton.


Composants	Référence
Blister rigide 280 x 160 mm	E00102
Compresses en non tissé - 7,5 x 7,5 cm	10
Conditionnement	Palette de 20 cartons de 50



SET D'ABLATION DE FILS

Vente au carton de 50.

Composants	Référence		
	174672	174670	174948
Blister rigide 3 alvéoles	1		
Blister rigide 4 alvéoles		1	1
Champ imperméable 38 x 45 cm			1*
Pince anatomique bouts pointus 12,5 cm	1	1	1
Lame coupe fils long	1	1	1
Tampon non tissé Ø3 cm (prune)	3	6	
Tampon gaze Ø3 cm (prune)			6
Carton par palette	35	35	30

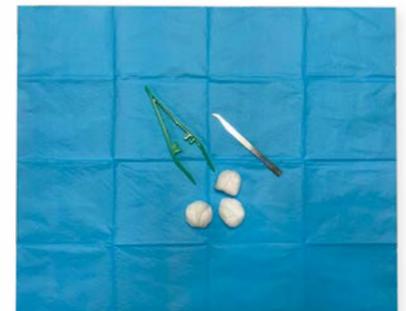

Sets et instruments



SET DE PANSEMENT POUR PERFUSION À DOMICILE

Sets d'hospitalisation à domicile conçus pour assurer les actes de perfusion, par voie centrale ou périphérique, ainsi que pour la réalisation ou la réfection des pansements. Complètes, ces sets répondent aux besoins des infirmières.

Vente au carton.

Composants	Référence			
	174478	174420	CS0052GN	CD1552KNGW
Sachet pelable	1	1	1	
Blisters rigides				1
Champ enveloppant 45 x 75 cm	1			
Champ imperméable 38 x 45 cm			1	1
Champ imperméable 38 x 45 cm fenêtré et pré-fendu	1			
Bandelette adhésive double	2			
Charlotte à clip - élastique	1			
Masque HF	2			
Gant nitrile - T7/8	2		2	2
Essuie-mains 30 x 40 cm	1			
Compresse non-tissé 7,5 x 7,5 cm	10	5	5	5
Tampon non tissé Ø 3 cm				5
Seringue 10 ml LL		1		
Seringue 20 ml LL	1			
Aiguille 18 G x 1 1/2	1	1		
Pince kocher plastique bleue				1
Pince anatomique verte				1
Sac à déchet DASRI	1			1
Conditionnement	PaLETTE de 24 crts de 50	PaLETTE de 96 crts de 30	PaLETTE de 90 crts de 50	PaLETTE de 24 crts de 50.



CURETTE DERMATOLOGIQUE STÉRILE

- Bordure tranchante en acier inoxydable sans soudure
 - Manche à prise en main dynamique et aisée.
 - Usage unique
 - Stérile et prêt à l'emploi
 - Large gamme de tailles
- Domaines d'application : Dermatologie, Oncologie.

Vente à la boîte. Palette de 200 cartons de 5 boîtes de 10.

Composants	Référence										
	1 mm	1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
Curette			174445		174446		174447	174448		174449	
Punch	174455	174456	174457	174458	174459	174464	174465	174466	174467	174468	174469



PUNCH À BIOPSIE STÉRILE

- Bordure tranchante en acier inoxydable sans soudure
 - Manche strié pour assurer un geste précis et sûr
 - Taille gravée sur chaque punch pour une identification aisée
 - Stérile et prêt à l'emploi
 - Usage unique
 - Large gamme de tailles
- Domaines d'application : Dermatologie, Gynécologie, Podologie.

Vente à la boîte. Palette de 200 cartons de 10 boîtes de 10.

INSTRUMENT SATELLITE STÉRILE PLASTIQUE

Bleu. Emballage unitaire. Sachet pelable.



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
135908	Pince kocher 14 cm	PaLETTE de 80 cartons de 100
135907	Pince anatomique bouts mousses 12,5 cm	PaLETTE de 80 cartons de 100
SP-PDFB	Pince anatomique bouts fins 12,5 cm	PaLETTE de 72 cartons de 100

INSTRUMENT SATELLITE STÉRILE MÉTAL



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement	Référence	Description	Conditionnement
1 174663	Stylet olivaire double 14 cm	PaLETTE de 300 ctns de 100	7 174678	Ciseaux métal 11,5 cm, bouts pointus. Sachet pelable.	PaLETTE de 84 ctns de 100
2 174684	Sonde cannelée 14 cm	PaLETTE de 300 ctns de 100	7 174654	Ciseaux métal 11,5 cm, bouts pointus/ mousse. Sachet pelable.	PaLETTE de 84 ctns de 100
3 174656	Pince à disséquer à griffes 12,5 cm	PaLETTE de 60 ctns de 100	7 174655	Ciseaux métal 11,5 cm, coupe-fils. Sachet pelable.	PaLETTE de 84 ctns de 100
3 174657	Pince à disséquer sans griffes 12,5 cm	PaLETTE de 60 ctns de 100	7 174651	Ciseaux métal 11,5 cm, bouts pointus. Blisters rigides.	PaLETTE de 48 ctns de 50
4 174658	Pince Adson à griffes 12,5 cm	PaLETTE de 60 ctns de 100	8 174652	Ciseaux anneaux plastique 11,5 cm. Bouts pointus.	PaLETTE de 77 ctns de 100
4 174659	Pince Adson sans griffes 12,5 cm	PaLETTE de 60 ctns de 100	9 174653	Ciseaux anneaux plastique 11,5 cm. Bouts ronds.	PaLETTE de 77 ctns de 100
4 174441	Pince micro Adson à griffes métal 12,5 cm	PaLETTE de 60 ctns de 100	10 174687	Ôte agrafe 10 cm. Sachet pelable.	PaLETTE de 30 ctns de 120
4 174440	Pince micro Adson sans griffes métal 12,5 cm	PaLETTE de 60 ctns de 100	10 174662	Ôte agrafe 10 cm. Blisters rigides.	PaLETTE de 45 ctns de 50
5 174683	Pince Kocher à griffes 14 cm	PaLETTE de 132 ctns de 50			
5 174401	Pince Kocher sans griffes 14 cm	PaLETTE de 120 ctns de 50			
6 174660	Porte aiguille à mors striés 12 cm	PaLETTE de 60 ctns de 50			

LAME, BISTOURI ET COUPE FILS

Lame en carbone stérile s'adaptant sur les manches de bistouri.



• **Lame coupe-fils** Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
119250	PaLETTE de 20 cartons de 10 boîtes de 100.

• **Lame de bistouri** Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement	Référence	Description	Conditionnement
118200P	N° 10	PaLETTE de 250 cartons de 10 boîtes de 100.	119200P	N° 10	PaLETTE de 160 cartons de 10 boîtes de 10.
118201P	N° 11	PaLETTE de 320 cartons de 10 boîtes de 100.	119201P	N° 11	PaLETTE de 160 cartons de 10 boîtes de 10.
118202P	N° 12	PaLETTE de 250 cartons de 10 boîtes de 100.	119202P	N° 12	PaLETTE de 160 cartons de 10 boîtes de 10.
118203P	N° 15	PaLETTE de 320 cartons de 10 boîtes de 100.	119203P	N° 15	PaLETTE de 160 cartons de 10 boîtes de 10.
118204P	N° 20	PaLETTE de 250 cartons de 10 boîtes de 100.	119204P	N° 20	PaLETTE de 160 cartons de 10 boîtes de 10.
118205P	N° 21	PaLETTE de 250 cartons de 10 boîtes de 100.	119205P	N° 21	PaLETTE de 160 cartons de 10 boîtes de 10.
118206P	N° 22	PaLETTE de 250 cartons de 10 boîtes de 100.	119206P	N° 23	PaLETTE de 160 cartons de 10 boîtes de 10.
118207P	N° 23	PaLETTE de 300 cartons de 10 boîtes de 100.	119207P	N° 24	PaLETTE de 160 cartons de 10 boîtes de 10.
118208P	N° 24	PaLETTE de 250 cartons de 10 boîtes de 100.	119209P	N° 22	PaLETTE de 160 cartons de 10 boîtes de 10.

Pansement

BANDE : LES SYSTÈMES DE MAINTIEN

Bandes adhésives

	EUROFIX	SPARADRAP ANAPORE	
Caractéristiques	Se retire sans léser la peau	Anapore Microporeux	Anapore Micro
		Support en non-tissé blanc	Support micro-perforé en polyéthylène
Indications	Maintien des pansements réalisation des «strappings»	Peaux sensibles	Pansement ayant besoin d'être aéré

Bandes non-adhésives

	BANDES DE GAZE EXTENSIBLE	BANDES DE CRÊPE	FILET TUBULAIRE	BANDE COHÉSIVE
Caractéristiques	Sans latex, extensible à 100% stérile ou non stérile	100 % coton ou 97% coton et 3 % Spandex® 75 g/m2 ou 100 g/m2	Trame en maille large sans latex	Fibres en Spandex, Non-adhérente à la peau
Indications	Maintien de pansements immobilisation	Utilisé en milieu médical, immobilisation, compression	Maintien de pansement	Traumatologie, Phlébologie, Maintien de Pansement

La réalisation des pansements va dépendre de plusieurs facteurs :

- 1 La forte émission d'exsudat ou non
- 2 La taille de la plaie
- 3 Le maintien du pansement

Notre gamme répond à tous ces facteurs. Elle est adaptée à tous types de plaies et brûlures et répond aux normes NF EN 13726. Ces normes détaillent les méthodes d'essai pour les pansements en contact avec la plaie :

- Perméabilité à la vapeur d'eau
- Absorption
- Conformabilité
- Propriétés de barrière antimicrobienne
- Contrôle de l'odeur

GAMME

EUROPLAIE®

Pansement adhésif : Adapté aux plaies légères ou post opératoires sans grande émission d'exsudats. En non-tissé. Fortement adhésif (colle acrylique) sur les 4 côtés (conformabilité importante), avec compresse absorbante recouverte d'un voile en polyéthylène pour éviter l'adhérence à la plaie.

GAMME

EUROVIT+®

Pansement non adhésif : Adapté aux plaies importantes ou post opératoires avec grande émission d'exsudats. En fonction de la nature des plaies, il est nécessaire d'avoir une étanchéité parfaite à l'air (Eurovit® Bleu) ou de laisser passer l'air afin d'accélérer la cicatrisation (Eurovit®+).

GAMME

MÉDITulle®

Pansement adapté aux brûlures et escarres. Pansement stérile imprégné de paraffine.

Indications :

- Brûlures
- Lacérations, abrasions, autres plaies avec perte de substance cutanée dues aux brûlures



EUROPLAIE®

Pansement chirurgical stérile. Support en non tissé, adhésif avec compresse centrale absorbante et non adhérente à la plaie.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
135285Z	5 x 7 cm	Palette de 144 cartons de 40 boîtes de 5
135286Z	10 x 8 cm	Palette de 120 cartons de 40 boîtes de 5
135287Z	10 x 15 cm	Palette de 84 cartons de 20 boîtes de 5
135288Z	10 x 20 cm	Palette de 90 cartons de 20 boîtes de 5



RECOMMANDATION

Remplacez la compresse ou le pansement au moins une fois par jour.



MÉDITULLE®

Compresses grasses stériles. Larges mailles de coton imprégnées de paraffine (vaseline). Protectrice et non adhérente à la plaie.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
135290	10 x 10 cm	Palette de 360 cartons de 6 boîtes de 10
135292	10 x 40 cm	Palette de 120 cartons de 6 boîtes de 10
135291	5 x 5 cm	Palette de 840 cartons de 6 boîtes de 10

PANSEMENT

Pansement composé d'un support adhésif couleur chair en PVC micro perforé et d'une compresse absorbante non adhérente à la plaie en non tissé. Idéal en premier soin pour une blessure superficielle ou pour une application après une prise de sang. Dimension : 7 x 2 cm.



Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
135102	Boîte de 100. Carton de 100. Palette de 30 cartons.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
135261Z	5 x 7 cm	Palette de 54 cartons de 10 boîtes de 100.
135262Z	10 x 8 cm	Palette de 54 cartons de 10 boîtes de 50.
135263Z	10 x 10 cm	Palette de 40 cartons de 10 boîtes de 50.
135264Z	10 x 15 cm	Palette de 35 cartons de 10 boîtes de 50.
135265Z	10 x 20 cm	Palette de 20 cartons de 10 boîtes de 50.
135266Z	10 x 30 cm	Palette de 20 cartons de 10 boîtes de 50.
135267Z	10 x 25 cm	Palette de 20 cartons de 10 boîtes de 50.
135269Z	10 x 35 cm	Palette de 12 cartons de 10 boîtes de 50.

Pansement

GAMME EUROVIT®

Pansement absorbant stérile ou non stérile, non adhérent à la plaie "type pansement américain". Fermé sur les quatre côtés, muni sur la face externe d'un filet bleu pour une mise en place correcte. Constitué d'un coussin doux et absorbant, recouvert :

- face interne, d'un voile de cellulose qui permet la diffusion des exsudats.
- face externe :
 - EUROVIT BLEU® : d'un film en polyéthylène totalement imperméable et intraversable
 - EUROVIT +® : d'un voile de cellulose hydrophobe, perméable à l'air.

ij PANSEMENT ABSORBANT Stérile et non stérile

• Eurovit® Bleu Non stérile *Vente au carton.*

Référence	Description	Conditionnement
135580Z	10 x 10 cm	Sachet de 50. Carton de 10. Palette de 30 cartons.
135581	10 x 15 cm	Sachet de 50. Carton de 10. Palette de 28 cartons.
135582Z	10 x 20 cm	Sachet de 50. Carton de 10. Palette de 24 cartons.
135583	10 x 30 cm	Sachet de 50. Carton de 10. Palette de 16 cartons.
135584Z	15 x 20 cm	Sachet de 50. Carton de 10. Palette de 20 cartons.
135585	15 x 25 cm	Sachet de 50. Carton de 10. Palette de 16 cartons.
135587Z	20 x 25 cm	Sachet de 50. Carton de 10. Palette de 12 cartons.

• Eurovit® + Non stérile *Vente au carton.*

Référence	Description	Conditionnement
135570Z	10 x 10 cm	Sachet de 50. Carton de 10. Palette de 28 cartons.
135572Z	10 x 20 cm	Sachet de 50. Carton de 10. Palette de 18 cartons.
135573	10 x 30 cm	Sachet de 50. Carton de 10. Palette de 20 cartons.
135574Z	15 x 20 cm	Sachet de 50. Carton de 10. Palette de 16 cartons.
135576Z	20 x 20 cm	Sachet de 50. Carton de 10. Palette de 12 cartons.
135577Z	20 x 25 cm	Sachet de 50. Carton de 10. Palette de 12 cartons.
135578	20 x 30 cm	Sachet de 50. Carton de 10. Palette de 8 cartons.
135579Z	20 x 40 cm	Sachet de 50. Carton de 10. Palette de 6 cartons.

• Eurovit® Bleu Stérile *Vente au carton.*

Référence	Description	Conditionnement
135540Z	10 x 10 cm	Boite de 10. Carton de 10. Palette de 85 cartons.
135542Z	10 x 20 cm	Boite de 10. Carton de 10. Palette de 45 cartons.
135543	10 x 30 cm	Boite de 10. Carton de 10. Palette de 60 cartons.
135544Z	15 x 20 cm	Boite de 10. Carton de 10. Palette de 25 cartons.
135546Z	20 x 20 cm	Boite de 10. Carton de 10. Palette de 25 cartons.
135547Z	20 x 25 cm	Boite de 10. Carton de 10. Palette de 20 cartons.
135548	20 x 30 cm	Boite de 10. Carton de 10. Palette de 30 cartons.
135549Z	20 x 40 cm	Boite de 10. Carton de 10. Palette de 15 cartons.

• Eurovit® + Stérile *Vente au carton.*

Référence	Description	Conditionnement
135530Z	10 x 10 cm	Boite de 10. Carton de 10. Palette de 80 cartons.
135531	10 x 15 cm	Boite de 10. Carton de 10. Palette de 96 cartons.
135532Z	10 x 20 cm	Boite de 10. Carton de 10. Palette de 48 cartons.
135534Z	15 x 20 cm	Boite de 10. Carton de 10. Palette de 25 cartons.
135535Z	15 x 25 cm	Boite de 10. Carton de 10. Palette de 20 cartons.
135536Z	20 x 20 cm	Boite de 10. Carton de 10. Palette de 25 cartons.
135537Z	20 x 25 cm	Boite de 10. Carton de 10. Palette de 20 cartons.
135538	20 x 30 cm	Boite de 10. Carton de 10. Palette de 30 cartons.
135539Z	20 x 40 cm	Boite de 10. Carton de 10. Palette de 15 cartons.



EUROFIX®

Bande en non-tissé adhésive multi-extensible. À couper avec des ciseaux. La gamme Eurofix® est disponible en quatre largeurs et peut être référencée comme pansement de rétention. Sa bande perméable à la vapeur d'eau est peu susceptible de causer la macération des tissus et ne gêne pas la transpiration.

Vente à la boîte. Boîte de 1.

Référence	Description	Conditionnement
135315	10 m x 5 cm	Palette de 96 cartons de 24 boîtes.
135316	10 m x 10 cm	Palette de 48 cartons de 24 boîtes.
135317	10 m x 15 cm	Palette de 25 cartons de 24 boîtes.
135318	10 m x 20 cm	Palette de 30 cartons de 24 boîtes.



GAMME ANAPORE®

• Anapore®

Le sparadrap Anapore est conçu avec un support en non-tissé blanc. Il se retire sans douleur et est indiqué pour maintenir les pansements sur les peaux sensibles.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
135320	9,14 m x 1,25 cm	Sans dévidoir. Palette de 72 cartons de 10 boîtes de 24 rouleaux.
135321	9,14 m x 2,5 cm	Sans dévidoir. Palette de 144 cartons de 10 boîtes de 12 rouleaux.
135323	5 m x 1,25 cm	Sans dévidoir. Palette de 180 cartons de 10 boîtes de 24 rouleaux.
135324	5 m x 2,5 cm	Sans dévidoir. Palette de 108 cartons de 10 boîtes de 12 rouleaux.
135325	5 m x 5 cm	Sans dévidoir. Palette de 180 cartons de 10 boîtes de 6 rouleaux.
135329	5 m x 1,25 cm	Avec dévidoir. Palette de 48 cartons de 10 boîtes de 24 rouleaux.
135326	5 m x 2,5 cm	Avec dévidoir. Palette de 80 cartons de 10 boîtes de 12 rouleaux.
135327	9,14 m x 2,5 cm	Avec dévidoir. Palette de 40 cartons de 10 boîtes de 12 rouleaux.
135335	9,14 m x 7,5 cm	Avec dévidoir. Palette de 36 cartons de 10 boîtes de 4 rouleaux.

• Anapore Micro®

Le sparadrap Anapore transparent, sans dévidoir, est fabriqué avec un support en polyéthylène. Il se découpe facilement et résiste à l'eau, assurant ainsi une bonne tenue des pansements et des bandages.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
135390	9,14 m x 1,25 cm	Palette de 72 cartons de 10 boîtes de 24 rouleaux.
135391	9,14 m x 2,5 cm	Palette de 96 cartons de 10 boîtes de 12 rouleaux.
135395	5 m x 1,25 cm	Palette de 72 cartons de 10 boîtes de 24 rouleaux.
135396	5 m x 2,5 cm	Palette de 144 cartons de 10 boîtes de 12 rouleaux.
135397	5 m x 5 cm	Palette de 72 cartons de 10 boîtes de 6 rouleaux.



Bande et filet



BANDE DE GAZE EXTENSIBLE

Bande de gaze non stérile à usage unique. En 100% polyester. Cette bande est étirable jusqu'à 3 mètres ou 4 mètres selon la référence. Idéal pour la fixation et la protection de pansements.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
135181	3 m x 5 cm	Palette de 200 cartons de 60
135182	3 m x 7 cm	Palette de 240 cartons de 48.
135183	3 m x 10 cm	Palette de 280 cartons de 36.
135185A	3 m x 15 cm	Palette de 120 cartons de 50.
135186	3 m x 20 cm	Palette de 120 cartons de 50.
135164	4 m x 5 cm	Palette de 200 cartons de 50.
135165	4 m x 7 cm	Palette de 60 cartons de 40.
135166	4 m x 10 cm	Palette de 280 cartons de 30.
135168	4 m x 15 cm	Palette de 250 cartons de 20.
135169	4 m x 20 cm	Palette de 250 cartons de 20.



BANDE DE CRÊPE

Bande de crêpe non stérile à usage unique. En coton. Cette bande est étirable jusqu'à 4 mètres. Son grammage est de 75 g/m². Idéal pour la fixation et la protection de pansements. Conditionnée sous emballage individuel.

• 75 g/m², non stérile, 100 % coton

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
135175A	4 m x 5 cm	Palette de 120 cartons de 50.
135176A	4 m x 7 cm	Palette de 80 cartons de 50.
135177A	4 m x 10 cm	Palette de 60 cartons de 50.
135178A	4 m x 15 cm	Palette de 60 cartons de 50.
135179A	4 m x 20 cm	Palette de 30 cartons de 50.
135180A	4 m x 30 cm	Palette de 24 cartons de 50.

• 75 g/m², non stérile, 97% coton 3% Spandex

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
135175H	4 m x 5 cm	Palette de 120 cartons de 50.
135176H	4 m x 7 cm	Palette de 90 cartons de 50.
135177H	4 m x 10 cm	Palette de 90 cartons de 50.
135178H	4 m x 15 cm	Palette de 60 cartons de 50.
135179H	4 m x 20 cm	Palette de 30 cartons de 50.

• 100 g/m², non stérile, sous cellophane, 100 % coton

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
135155	4 m x 5 cm	Palette de 120 cartons de 50.
135156	4 m x 7 cm	Palette de 120 cartons de 40.
135157	4 m x 10 cm	Palette de 120 cartons de 30.
135158	4 m x 15 cm	Palette de 120 cartons de 20.

FILET TUBULAIRE ÉLASTIQUE TUBIFIX

Filet tubulaire à mailles élastiques confortables, sans latex. Léger et aéré, ce dispositif est particulièrement adapté aux articulations pour le maintien de pansements. Sa structure permet une extensibilité et un maintien sans compression excessive.

Vente à la boîte - Boîte de 25 m étirés.

Référence	Description	Conditionnement
106000019-10	N° 0 Doigt enfant	Palette de 140 cartons de 10 boîtes de 1.
106000020-10	N° 0,5 Doigt adulte	Palette de 140 cartons de 10 boîtes de 1.
106000021-10	N° 1 2 doigts, pouce	Palette de 140 cartons de 10 boîtes de 1.
106000022-10	N° 2 Poignet, cheville, pied	Palette de 140 cartons de 10 boîtes de 1.
106000023-10	N° 3 Coude	Palette de 140 cartons de 10 boîtes de 1.
106000024-10	N° 4 Main, bras	Palette de 140 cartons de 10 boîtes de 1.
106000025-10	N° 5 Jambe	Palette de 80 cartons de 10 boîtes de 1.
1060000255-10	N° 5,5 Cordon ombilical, cuisse	Palette de 80 cartons de 10 boîtes de 1.
106000026-10	N° 6 Tête, thorax	Palette de 60 cartons de 10 boîtes de 1.
106000027-10	N° 7 Thorax, abdomen	Palette de 60 cartons de 10 boîtes de 1.
106000028-10	N° 8 Thorax, bassin, épaule	Palette de 48 cartons de 10 boîtes de 1.
106000029-10	N° 9 Thorax très fort	Palette de 48 cartons de 10 boîtes de 1.
106000050-10	N° 10 Thorax extra fort	Palette de 24 cartons de 10 boîtes de 1.



BANDAGE TUBULAIRE COMPRESSIF REDIGRIP®

Bandage tubulaire élastique. Application facile et uniforme. Soutien constant. Spécialement étudié afin d'exercer la pression adéquate tout en assurant un soutien idéal de la partie du corps concernée. Il est indiqué pour les entorses et les foulures, le contrôle de l'enflure, les varices, ainsi que tout endroit nécessitant un soutien radial général. L'utilisation préventive durant et après les interventions chirurgicales réduit le risque de thromboses post-opératoires.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
135450	A 4,5 cm	Palette de 6 cartons de 50 boîtes de 10 mètres.
135451	B 6,25 cm	Palette de 6 cartons de 78 boîtes de 10 mètres.
135452	C 6,75 cm	Palette de 6 cartons de 70 boîtes de 10 mètres.
135453	D 7,5 cm	Palette de 6 cartons de 60 boîtes de 10 mètres.
135454	E 8,75 cm	Palette de 6 cartons de 54 boîtes de 10 mètres.
135455	F 10 cm	Palette de 5 cartons de 47 boîtes de 10 mètres.
135456	G 12 cm	Palette de 4 cartons de 24 boîtes de 10 mètres.
135457	H 15 cm	Palette de 6 cartons de 24 boîtes de 10 mètres.
135458	J 17,5 cm	Palette de 6 cartons de 24 boîtes de 10 mètres.
135459	K 21,5 cm	Palette de 6 cartons de 24 boîtes de 10 mètres.
135460	KL 26 cm	Palette de 6 cartons de 12 boîtes de 10 mètres.
135461	L 32,5 cm	Palette de 6 cartons de 12 boîtes de 10 mètres.
135462	M 36 cm	Palette de 4 cartons de 12 boîtes de 10 mètres.

FILET TUBULAIRE POLYAMIDE TUBIFIX SANS LATEX

A mailles élastiques confortable. Léger et aéré. Parfaitement adapté aux articulations.



Vente à la boîte - Boîte de 25 m étirés.

Référence	Description	Conditionnement
106000022-10LF	B Poignet, cheville - pied	Pal. de 140 crts de 10 btes
106000023-10LF	C Coude	Pal. de 140 crts de 10 btes
106000025-10LF	D Main, bras /jambe	Pal. de 80 crts de 10 btes
1060000255-10LF	E Jambe/cordon ombilical, cuisse	Pal. de 80 crts de 10 btes
106000026-10LF	F Tête thorax	Pal. de 60 crts de 10 btes
106000027-10LF	G Thorax abdomen	Pal. de 60 crts de 10 btes
106000028-10LF	H Thorax, bassin, épaule	Pal. de 48 crts de 10 btes
106000029-10LF	I Thorax très fort et extra fort	Pal. de 48 crts de 10 btes

Compresse et coton

La qualité de nos produits réside dans leur capacité d'absorption, le confort et la douceur lors de leur utilisation. Il est recommandé de changer la compresse au moins une fois par jour.

Compresse de gaze

- Issue du coton filé et tissé


• Critères de choix :

- Nombre de fils au cm² tissé verticalement et horizontalement (13 fils ou 17 fils)
- Nombre de plis (8,12,16 plis). Compresse pliée « à bords rentrés »
- Dimensions finales de la compresse Euromédis (5 x 5 cm, 7,5 x 7,5 cm...)
- Nos compresses sont stérilisées par OE (oxyde d'éthylène)

- La compresse tissée est surtout indiquée pour nettoyer ou protéger des plaies avec ou sans exsudats.

• Intervention :

- Opération de nettoyage et de désinfection de la plaie
- Assèchement d'une lésion grâce à la forte hydrophilie
- Élément constitutif du pansement

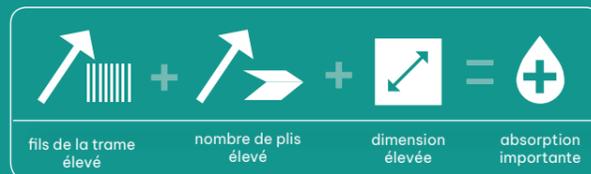

NORME / NF EN 14079

Elle décrit les essais applicables à la gaze de coton absorbante ainsi qu'à la gaze de coton et viscosse absorbante, par exemple au temps de coulage ou à la capacité d'absorption en volume et dans le minimum de temps.

Compresse en non-tissé

- Issue des fibres naturelles et/ou synthétiques liées (viscosse et polyester), moins hydrophile que le modèle tissé, mais plus souple et résistante

• Critères de choix :

- Poids de la matière (30g/m² ou 40g/m²)
- Dimensions de la compresse
- Pliage 4 plis systématique

• Intervention :

- Maintien du pansement
- Office de bandage

NORME / NF EN 1644-1

Méthodes d'essai pour compresses en non-tissé à usage médical pour la fabrication des compresses :

- Détermination du temps d'absorption d'un liquide
- Détermination de la capacité d'absorption d'un liquide
- Détermination des substances hydrosolubles
- Détermination de la fluorescence
- Détermination de l'acidité et de l'alcalinité des extraits aqueux

NORME / NF EN 1644-2

Méthodes d'essai pour compresses en non-tissé à usage médical pour les compresses finies :

- Détermination de la capacité d'absorption d'un liquide
- Détermination des substances hydrosolubles
- Détermination de la fluorescence
- Détermination de l'acidité et de l'alcalinité des extraits aqueux
- Détermination de la résistance à l'éclatement
- Détermination de relargage particulière d'une compresse mouillée et sèche

Compresse Xray

Les compresses utilisées au bloc opératoire doivent être radio-déTECTABLES. Dans leur trame est tissé un fil de sulfate de baryum multi-filament opaque aux rayons X. Sous double emballage et dotées d'étiquettes de traçabilité, la récupération de toutes les compresses utilisées lors de l'opération est garantie.

Compresse pour laparotomie

Elles sont adaptées aux opérations de laparotomie, qui impliquent l'absorption de grandes quantités d'exsudats. Ces compresses sont préalablement lavées et comportent un lacet qui permet de les récupérer facilement. Leur taille est importante.

LES COMPRESSES EN NON-TISSÉ ET DE GAZE PEUVENT ÊTRE :

- Stériles ou non
- En simple ou double emballage
- En sachet unitaire, par 2, 3, 5, 10
- Pour la pharmacie, conformes à la LPP

COMPRESSE DE GAZE STÉRILE

Compresse de gaze stérile 13 ou 17 fils. 100 % coton. Le grammage est de 17 g/m² ou 23 g/m². Conditionné sous simple ou double emballage. Ne peluche pas grâce à un pliage chirurgical à bords rentrés. Grande capacité d'absorption. Tissage en fil de coton hydrophile.

• Tissage 17 fils. Simple emballage.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175200	5 x 5 cm. 8 plis	Pal. de 84 crts de 12 btes de 50 sachets de 2
175235	7,5 x 7,5 cm. 8 plis	Pal. de 60 crts de 10 btes de 40 sachets de 2
175201	10 x 10 cm. 8 plis	Pal. de 40 crts de 8 btes de 50 sachets de 2
175236	7,5 x 7,5 cm. 12 plis	Pal. de 54 crts de 10 btes de 40 sachets de 2
175244	10 x 10 cm. 12 plis	Pal. de 12 crts de 6 btes de 150 sachets de 2
175221	5 x 5 cm. 8 plis	Pal. de 64 crts de 10 btes de 40 sachets de 3
175222	7,5 x 7,5 cm. 8 plis	Pal. de 42 crts de 10 btes de 40 sachets de 3
175223	10 x 10 cm. 8 plis	Pal. de 25 crts de 10 btes de 40 sachets de 3
175241	5 x 5 cm. 8 plis	Pal. de 40 crts de 5 btes de 100 sachets de 5
175237	7,5 x 7,5 cm. 8 plis	Pal. de 42 crts de 10 btes de 25 sachets de 5
175250	10 x 10 cm. 8 plis	Pal. de 42 crts de 10 btes de 20 sachets de 5
175238	7,5 x 7,5 cm. 12 plis	Pal. de 42 crts de 10 btes de 20 sachets de 5
175239	10 x 10 cm. 12 plis	Pal. de 25 crts de 10 btes de 20 sachets de 5
175246	10 x 10 cm. 16 plis	Pal. de 15 crts de 5 btes de 30 sachets de 10

• Tissage 17 fils. Double emballage.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175263	10 x 10 cm. 12 Plis	Pal. de 66 crts de 4 btes de 10 sachets de 10
175288	10 x 10 cm. 16 Plis	Pal. de 24 crts de 6 btes de 10 sachets de 10



COMPRESSE OCULAIRE STÉRILE

Compresse de gaze. Non adhésive. Forme ovale. 6 x 8 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
175611K	Carton de 72 boîtes de 10.
175612K	Carton de 18 boîtes de 50.



• Tissage 13 fils. Simple emballage.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175230	7,5 x 7,5 cm. 8 plis	Pal. de 60 crts de 10 btes de 40 sachets de 2
175231	7,5 x 7,5 cm. 12 plis	Pal. de 54 crts de 10 btes de 40 sachets de 2
175232	7,5 x 7,5 cm. 8 plis	Pal. de 54 crts de 10 btes de 25 sachets de 5
175233	7,5 x 7,5 cm. 12 plis	Pal. de 54 crts de 10 btes de 20 sachets de 5
175234	10 x 10 cm. 12 plis	Pal. de 35 crts de 10 btes de 20 sachets de 5
175249	7,5 x 7,5 cm. 12 plis	Pal. de 30 crts de 10 btes de 20 sachets de 10

• Version ORX : fil radiodéTECTABLE en sulfate de baryum multifilament. Double emballage - Étiquette traçabilité - 17 fils

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175270K	10 x 10 cm. 16 plis	Carton de 4 btes de 12 sachets de 10
175275K	10 x 10 cm. 12 plis	Carton de 8 btes de 12 sachets de 10
175272K	10 x 20 cm. 12 plis	Carton de 4 btes de 12 sachets de 10
175280K	15 x 15 cm. 16 plis	Carton de 8 btes de 5 sachets de 10
175277K	10 x 10 cm. 16 plis	Carton de 6 btes de 6 sachets de 10
175278K	10 x 10 cm. 12 plis	Carton de 4 btes de 20 sachets de 20
175281K	7,5 x 7,5 cm. 12 plis	Carton de 4 btes de 40 sachets de 10
175282K	7,5 x 7,5 cm. 12 plis	Carton de 6 btes de 30 sachets de 5
175283K	17 x 17 cm. 12 plis	Carton de 8 btes de 5 sachets de 10
175273K	10 x 20 cm. 16 plis	Carton de 4 btes de 15 sachets de 10
175284K	10 x 20 cm. 24 plis	Carton de 4 btes de 15 sachets de 10



COMPRESSE DE GAZE ORX STÉRILE POUR LAPAROTOMIE

Compresse de gaze laparotomie ORX 17 fils stérile emballée par 5 unités double emballage. Compresse prélavée avec lacet. Pliage : chirurgical à bords rentrés et cousus. Surpiquée en son milieu perpendiculairement aux 4 bords. Barette radio opaque. Boucle de préhension.

Vente au carton. Carton de 4 boîtes de 10 sachets de 5.

Référence	Description	Conditionnement
175340K	36 x 36 cm	Palette de 20 cartons.
175341K	43 x 66 cm	Palette de 16 cartons.
175342K	45 x 45 cm	

Compresse et coton

COMPRESSE EN NON-TISSÉ STÉRILE

Compresse en non-tissé 4 plis. Grammage de 30 ou 40 g/m². Composé de 50 % viscose et 50 % polyester. Douceur et confort. Bon pouvoir d'absorption et de restitution. Non-tissé de bonne qualité qui ne peluche pas. Elle offre une bonne résistance à l'étirement. Sachet de 2, 5 ou 10 compresses. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

• 30 g/m²

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175570K	7,5 x 7,5 cm	Sachet de 2. Boite de 100. Carton de 8. Palette de 30 cartons.
175587	10 x 10 cm	Sachet de 2. Boite de 100. Carton de 8. Palette de 30 cartons.
175589K	5 x 5 cm	Sachet de 5. Boite de 50. Carton de 8. Palette de 55 cartons.
175571K	7,5 x 7,5 cm	Sachet de 5. Boite de 50. Carton de 12. Palette de 25 cartons.
175572K	10 x 10 cm	Sachet de 5. Boite de 50. Carton de 12. Palette de 24 cartons.
175584	7,5 x 10 cm	Sachet de 5. Boite de 20. Carton de 40. Palette de 12 cartons.

• 40 g/m²

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175576K	5 x 5 cm	Sachet de 2. Boite de 100. Carton de 8. Palette de 44 cartons.
175573K	7,5 x 7,5 cm	Sachet de 2. Boite de 100. Carton de 8. Palette de 30 cartons.
175577K	10 x 10 cm	Sachet de 2. Boite de 100. Carton de 8. Palette de 30 cartons.
175578K	5 x 5 cm	Sachet de 5. Boite de 50. Carton de 12. Palette de 40 cartons.
175574K	7,5 x 7,5 cm	Sachet de 5. Boite de 50. Carton de 12. Palette de 25 cartons.
175575K	10 x 10 cm	Sachet de 5. Boite de 50. Carton de 12. Palette de 16 cartons.
175597	10 x 20 cm	Sachet de 5. Boite de 25. Carton de 8. Palette de 30 cartons.
175583K	7,5 x 7,5 cm	Sachet de 10. Boite de 25. Carton de 12. Palette de 25 cartons.
175580K	10 x 10 cm	Sachet de 10. Boite de 50. Carton de 4. Palette de 30 cartons.



EMBALLAGE COLLECTIVITÉS

COMPRESSE STÉRILE EMBALLAGE UNITAIRE

Spécifiquement adaptées aux professionnels de la santé, les compresses sont conditionnées en sachet de 1 unité. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

• Compresse en non-tissé : 40 g/m², 4 plis, sachet de 1

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175535A	5 x 5 cm	Palette de 50 cartons de 10 boîtes de 100.
175540A	7,5 x 7,5 cm	Palette de 54 cartons de 10 boîtes de 100.
175550A	10 x 10 cm	Palette de 30 cartons de 10 boîtes de 100.

• Compresse de gaze : 23 g/m², sachet de 1

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175218	5 x 5 cm. 8 plis	Carton de 10. boîtes de 100.
175219	7,5 x 7,5 cm. 8 plis	Palette de 48 cartons de 10 boîtes de 100.
175220	10 x 10 cm. 8 plis	Palette de 30 cartons de 10 boîtes de 100.
175653	5 x 5 cm. 12 plis	Palette de 84 cartons de 8 boîtes de 100.
175654	7,5 x 7,5 cm. 12 plis	Palette de 66 cartons de 8 boîtes de 100.
175655	10 x 10 cm. 12 plis	Palette de 35 cartons de 8 boîtes de 100.
175656	5 x 5 cm. 16 plis	Palette de 48 cartons de 10 boîtes de 100.
175657	7,5 x 7,5 cm. 16 plis	Palette de 36 cartons de 10 boîtes de 100.
175658	10 x 10 cm. 16 plis	Palette de 25 cartons de 10 boîtes de 100.



COMPRESSE EN NON-TISSÉ NON STÉRILE

Pouvoir d'absorption et de restitution. Non-tissé de bonne qualité qui ne peluche pas. Bonne résistance à l'étirement.

• 30 g/m², 4 plis

Vente au carton. Carton de 50 sachets de 100.

Référence	Description	Conditionnement
175500	5 x 5 cm	Palette de 60 cartons.
175501	7,5 x 7,5 cm	Palette de 42 cartons.
175503	7,5 x 10 cm	Palette de 24 cartons.
175502	10 x 10 cm	Palette de 21 cartons.

• 40 g/m², 4 plis

Vente au carton. Carton de 50 sachets de 100.

Référence	Description	Conditionnement
175505	5 x 5 cm	Palette de 60 cartons.
175506	7,5 x 7,5 cm	Palette de 36 cartons.
175508	10 x 10 cm	Palette de 18 cartons.



COMPRESSE DE GAZE NON STÉRILE

Ne s'effiloche pas grâce à un pliage chirurgical à bords rentrés. Bonne capacité d'absorption. Tissage en fil de coton hydrophile. Blanchie et purifiée, sans pour autant altérer leurs qualités.

• 13 fils, 17 g/m²

Vente au carton. Carton de 50 sachets de 100.

Référence	Description	Conditionnement
175300	5 x 5 cm - 8 plis	Palette de 75 cartons.
175301	5 x 7,5 cm - 8 plis	Palette de 45 cartons.
175302	7,5 x 7,5 cm - 8 plis	Palette de 36 cartons.
175303	7,5 x 7,5 cm - 12 plis	Palette de 30 cartons.
175304	8 x 10 cm - 8 plis	Palette de 24 cartons.
175305	10 x 10 cm - 12 plis	Palette de 18 cartons.

• 17 fils, 23 g/m²

Vente au carton. Carton de 50 sachets de 100.

Référence	Description	Conditionnement
175306	5 x 5 cm - 8 plis	Palette de 72 cartons.
175307	5 x 7,5 cm - 8 plis	Palette de 42 cartons.
175308	7,5 x 7,5 cm - 8 plis	Palette de 36 cartons.
175309	7,5 x 7,5 cm - 12 plis	Palette de 24 cartons.
175313	10 x 10 cm - 8 plis	Palette de 18 cartons.
175314	10 x 10 cm - 12 plis	Palette de 12 cartons.
175315	10 x 10 cm - 16 plis	Palette de 8 cartons.



Compresse et coton



BOULE EN NON-TISSÉ STÉRILE

Boule en non tissé. Composé de 57-60 % de viscose et de 40 à 43 % de polyester. Taille prune T20.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
175386K	Palette de 42 cartons de 8 boîtes de 30 sachets de 2.
175385K	Palette de 42 cartons de 8 boîtes de 20 sachets de 4.



BOULE DE GAZE STÉRILE

Boule de gaze stérile 20 fils. 100 % coton. Blanchis. Taille prune T20. 1 à 1,2 g. 100% coton. Prune T20.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
175372K	Palette de 42 cartons de 8 boîtes de 40 sachets de 2.
175373K	Palette de 42 cartons de 8 boîtes de 25 sachets de 4.
175374K	Palette de 30 cartons de 8 boîtes de 25 sachets de 10.
175375K	Palette de 48 cartons de 8 boîtes de 25 sachets de 5.

1 BOULE DE GAZE OU NON TISSÉ NON STÉRILE DE 1 À 1,2G PRUNE

Vente au sachet.

Référence	Description	Conditionnement
175379K	Gaze	Palette de 28 cartons de 10 sachets de 500.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175387	En non-tissé	Palette de 12 cartons de 10 sachets de 500.



2 BOULE DE COTON

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
128203A	0,5 - 0,6 g	Palette de 16 cartons de 16 sachets de 700.



COTON HYDROPHILE

100 % hydrophile fabriqué à 50 % par peignage et à 50 % par débouillage. Blanc. Plié en accordéon. Conditionné dans un sachet transparent avec cordon.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
128300B	100 g	Palette de 36 cartons de 30 sachets.
128301B	250 g	Palette de 30 cartons de 24 sachets.
128302B	500 g	Palette de 16 cartons de 20 sachets.



CARRÉ & RECTANGLE DE COTON

Carrés et rectangles de coton de 180 g, faciles à prendre en main, se séparent bien et ne s'effiloquent pas. Doux, absorbants et très résistants.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
128200	5 x 5 cm	Palette de 36 crts de 12 sachets de 500
128201	8 x 10 cm (180 g/m ²)	Palette de 36 crts de 10 sachets de 200
128204	8 x 10 cm (160 g/m ²)	Palette de 27 crts de 10 sachets de 200



GAMME ABORD PARENTÉRAL



Aiguille Eurofine®	59	Microperfuseur sécurisé	61
Aiguille pour stylo à insuline Eurofen®	59	Obtuteur	62
Aiguille spéciale de phlébologie Eurofine®	60	Perfuseur Europerf® S	61
Cathéter Delta Selsafe®	63	Seringues	60
Cathéter Delta Ven®	62	Transfuseur Eurotrans®	61
Microperfuseur épicroânien Eurofly®	61	Unité de prélèvement sécurisée	61

Abord parentéral

VOIES PERMETTANT D'APPORTER DES SUBSTANCES À L'INTÉRIEUR DU CORPS ET/OU D'EXTRAIRE DES FLUIDES.

Les aiguilles sont utilisées pour l'apport de substances et s'adaptent aux seringues, stylos, micro-perfuseurs et perfuseurs. Les unités de prélèvement sont utilisées pour la ponction des fluides.

Choisir une Seringue

NF EN ISO 7886 -1/-2

- Seringue 2 pièces : piston + corps




- Seringue 3 pièces : piston + élastomère + corps
L'embout peut être centré, excentré, luer slip, luer lock ou cathéter.




La graduation peut être en ml (hypodermiques, tuberculiques) ou en unités (insuline). Adaptées aux pousse-seringues électriques pour des débits très précis.

Choisir une aiguille

- la gauge (Ø interne de l'aiguille code couleur associé)
 - la longueur de la canule
 - le biseau de l'aiguille (atraumatique)
- NF en ISO 7864**

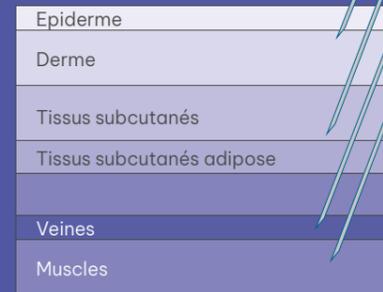

COMPOSANTS

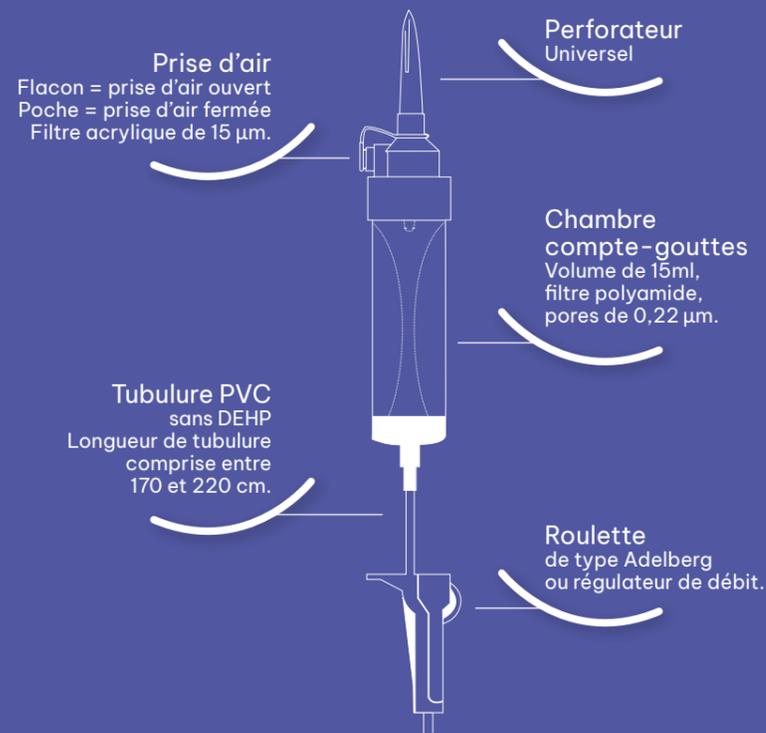

Les perfuseurs répondent aux exigences des essais physiques, chimiques et biologiques de la **NORME NF EN ISO 8536-4**



Version avec régulateur à barillet

Site d'injection en poly-isoprène sans émission de particules.



Connexion terminale Raccord conique mâle luer, verrouillable lock et mobile doté d'un filtre de purge.



Robinet 3 voies Raccord avec tous types de connecteur Luer. Lipido résistant. Makrolon®



AIGUILLE EUROFINE®

Aiguille en acier inoxydable stérile. Embase en polypropylène translucide aux couleurs standards. Diamètre extérieur de 0,45 à 1,2 mm. Longueurs disponibles : 12, 16, 25, 30, 40 et 50 mm. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. BC : Biseau court / BN : Biseau normal.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
101300	26 G 12 x 0.45 mm Biseau normal	Boîte de 100. Carton de 2000. Palette de 45 cartons.
101301	25 G 16 x 0.5 mm Biseau normal	Boîte de 100. Carton de 2000. Palette de 45 cartons.
101302	23 G 25 x 0.6 mm Biseau normal	Boîte de 100. Carton de 2000. Palette de 45 cartons.
101326	23 G 30 x 0.6 mm Biseau normal	Boîte de 100. Carton de 2000. Palette de 80 cartons.
101303	22 G 30 x 0.7 mm Biseau normal	Boîte de 100. Carton de 2000. Palette de 45 cartons.
101304	22 G 40 x 0.7 mm Biseau normal	Boîte de 100. Carton de 2000. Palette de 45 cartons.
101305	21 G 25 x 0.8 mm Biseau normal	Boîte de 100. Carton de 2000. Palette de 45 cartons.
101306	21 G 40 x 0.8 mm Biseau normal	Boîte de 100. Carton de 2000. Palette de 45 cartons.
101314	21 G 50 x 0.8 mm Biseau normal	Boîte de 100. Carton de 2000. Palette de 45 cartons.
101307	20 G 25 x 0.9 mm Biseau normal	Boîte de 100. Carton de 2000. Palette de 45 cartons.
101308	20 G 40 x 0.9 mm Biseau normal	Boîte de 100. Carton de 2000. Palette de 45 cartons.
101309	19 G 30 x 1.0 mm Biseau normal	Boîte de 100. Carton de 2000. Palette de 45 cartons.
101310	19 G 25 x 1.1 mm Biseau normal	Boîte de 100. Carton de 2000. Palette de 45 cartons.
101311	19 G 40 x 1.1 mm Biseau normal	Boîte de 100. Carton de 2000. Palette de 45 cartons.
101312	18 G 40 x 1.2 mm Biseau normal	Boîte de 100. Carton de 2000. Palette de 45 cartons.
101313	18 G 40 x 1.2 mm Biseau court	Boîte de 100. Carton de 2000. Palette de 45 cartons.

AIGUILLE POUR STYLO À INSULINE EUROPEN®

Biseautage triple pour une pénétration rapide et aisée. Compatibles avec tous les stylos pré remplis ou non, présents sur le marché (Eli Lilly, Sanofi, Novopen, Ypsomed, etc.) Aiguille ultrafine et à triple biseau court pour des injections sans douleur. Simplicité d'utilisation par le « CLIQUER /VISSER » et sécurisée pour le patient et le personnel soignant.



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
101400	31G 6 x 0,25 mm	Palette de 300 cartons de 6 boîtes de 100.
101401	31G 8 x 0,25 mm	Palette de 300 cartons de 6 boîtes de 100.
101403	31G 4 x 0,25 mm	Palette de 300 cartons de 6 boîtes de 100.
101404	31G 5 x 0,25 mm	Palette de 300 cartons de 6 boîtes de 100.
101405	30G 8 x 0,30 mm	Palette de 300 cartons de 6 boîtes de 100.
101406	30G 10 x 0,30 mm	Palette de 300 cartons de 6 boîtes de 100.
101402	29G 12 x 0,33 mm	Palette de 300 cartons de 6 boîtes de 100.

Abord parentéral



AIGUILLE SPÉCIALE DE PHLÉBOLOGIE EUROFINE®

Aiguille en acier inoxydable stérile. Embase en polypropylène jaune. Biseau normal. 12 x 0,3.

Vente à la boîte. Palette de 80 cartons de 20 boîtes de 100.

Référence
101315



SERINGUE 2 PIÈCES

Seringue 2 pièces stérile à usage unique. Simple, précise et facile d'emploi, cette seringue est adaptée à toute d'injection. Corps en polypropylène et piston en polyéthylène bleu.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
103710.	2 ml	Palette de 20 cartons de 28 boîtes de 100.
103711.	5 ml	Palette de 20 cartons de 19 boîtes de 100.
103712.	10 ml	Palette de 20 cartons de 12 boîtes de 100.
103713A.	20 ml	Palette de 20 cartons de 12 boîtes de 80.

SERINGUE 3 PIÈCES

Seringue en polypropylène inerte. Point d'étanchéité à double contact, sans latex. Graduations nettes. Seringue à insuline, tuberculine, 3 pièces. Embout de type Luer, Luer lock ou cathéter. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Vente à la boîte - sauf 103337C et 103338C au carton.

Référence	Description	Conditionnement
103322	Insuline Nue 1CC	Palette de 42 cartons de 10 boîtes de 100.
103350	Insuline - LDS 0,3 ml - 29 G	Palette de 6 cartons de 36 boîtes de 100.
103336	Insuline - LDS 0,5 ml - 29 G	Palette de 6 cartons de 36 boîtes de 100.
103335	Insuline - LDS 1 ml - 29 G	Palette de 6 cartons de 36 boîtes de 100.
103326	Insuline AA 25 G x 16 mm	Palette de 28 cartons de 10 boîtes de 100.
103323	Tuberculine Nue 1CC	Palette de 30 cartons de 10 boîtes de 100.
103324	Tuberculine AA 26 G x 13 mm	Palette de 28 cartons de 10 boîtes de 100.
103325	Tuberculine AA 25 G x 16 mm	Palette de 28 cartons de 10 boîtes de 100.
103327C	Luer centré 3 ml	Palette de 12 cartons de 30 boîtes de 100.
103328C	Luer Lock centré 3 ml	Palette de 12 cartons de 30 boîtes de 100.
103329C	Luer centré 5 ml	Palette de 12 cartons de 24 boîtes de 100.
103330C	Luer Lock centré 5 ml	Palette de 12 cartons de 24 boîtes de 100.
103331C	Luer excentré 10 ml	Palette de 12 cartons de 16 boîtes de 100.
103332C	Luer Lock centré 10 ml	Palette de 12 cartons de 16 boîtes de 100.
103333C	Luer excentré 20 ml	Palette de 16 cartons de 16 boîtes de 50.
103334C	Luer Lock centré 20 ml	Palette de 12 cartons de 16 boîtes de 50.
103640C/	Luer excentré 30 ml	Palette de 16 cartons de 8 boîtes de 50.
103641C	Luer Lock centré 30 ml	Palette de 12 cartons de 8 boîtes de 50.
103337C	Luer 50/60 ml	Palette de 70 cartons de 100.
103338C	Catheter 50/60 ml	Palette de 40 cartons de 100.



MICROPERFUSEUR ÉPICRÂNIEN EUROFLY®

Stérile, à usage unique, adaptable sur perfuseur ou sur tout dispositif pourvu d'un connecteur compatible Luer. Le dispositif est équipé de deux ailettes avec code couleur, d'une tubulure PVC de 30cm ainsi que d'une embase avec obturateur.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
105105	20 G - 20 x 0.9 mm	Carton de 20 boîtes de 100.
105104	21 G - 20 x 0.8 mm	Carton de 20 boîtes de 100.
105103	22 G - 20 x 0.7 mm	Carton de 20 boîtes de 100.
105102	23 G - 20 x 0.6 mm	Carton de 20 boîtes de 100.
105101	25 G - 20 x 0.5 mm	Carton de 20 boîtes de 100.

MICROPERFUSEUR SÉCURISÉ

Muni d'une aiguille siliconée triple biseau avec une tubulure de prélèvement de 30 cm. Activation simple et uni-manuelle du système de sécurité avec un clic audible.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
105410	21 G	Carton de 8 boîtes de 100
105411	23 G	Carton de 8 boîtes de 100
105412	25 G	Carton de 8 boîtes de 100

UNITÉ DE PRÉLÈVEMENT SÉCURISÉE

Munie d'une aiguille siliconée avec triple biseau. Adaptateur prémonté adaptable sur tout type de corps de prélèvement (Holder). Activation simple et unimanuelle du système de sécurité avec un clic audible. Tubulure 19 cm.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
105420	21 G	Carton de 8 boîtes de 100
105421	23 G	Carton de 8 boîtes de 100



PERFUSEUR EUROPERF® S

Perfuseur à usage unique permettant le passage de produits solutés avec un perforateur à prise d'air incorporé obturable. Il s'utilise sur des poches ou des flacons.

Le perfuseur est composé :

- D'un perforateur universel permettant de transpercer les septums des poches, les bouchons ou flacons
- D'une prise d'air
- D'une tubulure souple et transparente permettant une bonne visualisation du liquide et de l'absence de bulles d'air
- D'une chambre compte-gouttes amorçant la perfusion et contrôlant le débit
- D'une roulette de type Adelberg et régulateur de débit pour des dosages plus précis
- D'une connexion terminale de type raccord conique mâle luer lock et mobile

Vente au carton. Carton de 100.

Référence	Description
104101S	Avec site en Y
104106S	Sans site latex. Filtre 25 microns 1 voie
104107S	Avec robinet 3 voies + raccord Y
104108S	Avec robinet 3 voies

TRANSFUSEUR EUROTRANS®

Le transfuseur est composé de :

- Un perforateur homoplastique monocanal (polyacétal).
 - Une chambre goutte à goutte, solidaire du perforateur.
 - Un filtre à mailles facilitant le passage des éléments figurés du sang en évitant toute hémolyse.
 - Un régulateur de débit par rampe avec molette orange de type Adelberg.
 - Un embout terminal : luer lock mobile et protecteur de stérilité à membrane.
- La tubulure possède une longueur d'environ 1650 mm avec un diamètre interne de 2,9 mm.



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
159102S	Carton de 100.

Abord parentéral



CATHÉTER DELTA VEN®

Avantages du cathéter en polyuréthane (PUR) :

Grande compatibilité avec les médicaments, biocompatibilité pour un long maintien en veine. Flexibilité pour une adaptation aisée du cathéter à la veine. Élasticité pour un retour rapide du cathéter à sa forme d'origine avec rétablissement consécutif du flux normal de perfusion en cas de mouvements involontaires du patient qui provoquent une pliure du cathéter. Surface lisse et souple pour diminuer les risques de thromboses et de phlébites. Insertion aisée. Résistant aux plicatures. Devient encore plus souple avec la chaleur du corps humain.

Caractéristiques générales du cathéter intraveineux :

Affûtage de l'aiguille de type «Back-Cut». Effilage du cathéter atraumatique. Distance optimale entre la canule et la pointe de l'aiguille. Cathéter à paroi fine avec 3 bandes radio-opaques. Chambre de visualisation transparente pour le contrôle immédiat du retour sanguin. Filtre microporeux amovible permettant une fermeture fiable, ce qui élimine les risques de contamination. Disponibilité du bouchon Luer Lock pour la fermeture de la partie proximale du cathéter après le retrait de l'aiguille. Obturateurs à une voie disponibles pour toutes les mesures (sauf 26G).

CATHÉTER DROIT POLYURÉTHANE DELTA VEN® T PUR

Composé d'une aiguille canule à une voie, sans ailettes et sans port d'injection.

Vente à la boîte. Carton de 10 boîtes de 50.

Référence	Description	Référence	Description
3178522	● 14G - 45 mm	3138522	● 20G - 32 mm
3168522	● 16G - 45 mm	3128522	● 22G - 25 mm
3158522	○ 17G - 45 mm	3118522	● 24G - 19 mm
3148522	● 18G - 45 mm	3108522	● 26G - 19 mm Néonatal
3188522	● 18G - 32 mm		



CATHÉTER DROIT AVEC AILETTE POLYURÉTHANE DELTA VEN® 1 PUR

Composé d'une aiguille canule à une voie avec ailettes et sans port d'injection.

Vente à la boîte. Carton de 10 boîtes de 50.

Référence	Description	Référence	Description
3178122	● 14G - 45 mm	3138122	● 20G - 32 mm
3168122	● 16G - 45 mm	3128122	● 22G - 25 mm
3158122	○ 17G - 45 mm	3118122	● 24G - 19 mm
3148122	● 18G - 45 mm	3108122	● 26G - 19 mm Néonatal
3188122	● 18G - 32 mm		



CATHÉTER DROIT AVEC AILETTE ET SITE POLYURÉTHANE DELTA VEN® 2 PUR

Composé d'une aiguille canule à deux voies avec ailettes et port d'injection.

Vente à la boîte. Carton de 10 boîtes de 50.

Référence	Description	Référence	Description
3173122	● 14G - 45 mm	3133122	● 20G - 32 mm
3163122	● 16G - 45 mm	3123122	● 22G - 25 mm
3153122	○ 17G - 45 mm	3113122	● 24G - 19 mm
3143122	● 18G - 45 mm	3104022	● 26G - 19 mm Néonatal
3183122	● 18G - 32 mm		



OBTURATEUR SIMPLE POUR CATHÉTER DROIT AVEC OU SANS AILETTES

Vente à la boîte. Carton de 10 boîtes de 50.

Référence	Description	Référence	Description
3075512	● 14G - 45 mm	3035512	● 20G - 32 mm
3065512	● 16G - 45 mm	3025512	● 22G - 25 mm
3045512	● 18G - 45 mm	3015512	● 24G - 19 mm
3085512	● 18G - 32 mm		



OBTURATEUR DOUBLE POUR CATHÉTER AVEC SITE D'INJECTION

Vente à la boîte. Carton de 10 boîtes de 50.

Référence	Description	Référence	Description
3060512	● 16G - 45 mm	3030512	● 20G - 32 mm
3050512	○ 17G - 45 mm	3020512	● 22G - 25 mm
3040512	● 18G - 45 mm	3010512	● 24G - 19 mm
3080512	● 18G - 32 mm		



CATHÉTER DELTA SELFSAFE®

Cathéter sécurisé avec activation passive du dispositif de protection, disponible dans les mesures de 14G à 24G. Le cathéter intraveineux sécurisé réduit drastiquement les risques de piqûres accidentelles et ne nécessite aucun changement dans les gestes par rapport aux modèles conventionnels. Le dispositif de protection renferme la pointe de l'aiguille, ce qui rend la manipulation plus hygiénique. Il est totalement exempt de parties métalliques pour une protection totale de l'opérateur. Préserve du risque de piqûres accidentelles même pendant la phase d'élimination du cathéter intraveineux. Cathéter en polyuréthane (PUR) voir caractéristiques page précédente.

CATHÉTER DROIT SÉCURISÉ POLYURÉTHANE DELTA SELFSAFE® T PUR

Avec activation passive du dispositif de protection, composé d'une aiguille canule à une voie, sans ailettes et sans port d'injection.



Vente à la boîte. Carton de 4 boîtes de 50.

Référence	Description
3778522	● 14G - 45 mm
3768522	● 16G - 45 mm
3758522	○ 17G - 45 mm
3748522	● 18G - 45 mm
3788522	● 18G - 32 mm
3738522	● 20G - 32 mm
3728522	● 22G - 25 mm
3718522	● 24G - 19 mm

CATHÉTER DROIT SÉCURISÉ AVEC AILETTE POLYURÉTHANE DELTA SELFSAFE® 1 PUR

Avec activation passive du dispositif de protection, composé d'une aiguille canule à une voie avec ailettes et sans port d'injection.



Vente à la boîte. Carton de 4 boîtes de 50.

Référence	Description
3778122	● 14G - 45 mm
3768122	● 16G - 45 mm
3758122	○ 17G - 45 mm
3748122	● 18G - 45 mm
3788122	● 18G - 32 mm
3738122	● 20G - 32 mm
3728122	● 22G - 25 mm
3718122	● 24G - 19 mm

CATHÉTER DROIT SÉCURISÉ AVEC AILETTE ET SITE D'INJECTION EN POLYURÉTHANE DELTA SELFSAFE® 2 PUR

Avec activation passive du dispositif de protection, composé d'une aiguille canule à deux voies avec ailettes et port d'injection.



Vente à la boîte. Carton de 4 boîtes de 50.

Référence	Description
3773122	● 14G - 45 mm
3763122	● 16G - 45 mm
3753122	○ 17G - 45 mm
3743122	● 18G - 45 mm
3783122	● 18G - 32 mm
3733122	● 20G - 32 mm
3723122	● 22G - 25 mm
3713122	● 24G - 19 mm

CATHÉTER SÉCURISÉ IV À SYSTÈME CLOS AVEC AILETTES

Cathéter pour la perfusion intraveineuse et sous-cutanée. Protection renforcée pour un retrait sûr et facile empêchant l'activation anticipée du cathéter.



Vente à la boîte. Carton de 4 boîtes de 25.

Référence	Description
3931522	En Y 20G - 25 x 1 mm
3920522	En Y 22G - 19 x 0,90 mm
3911022	En Y 24G - 19 x 0,74 mm
3935722	Droit 20G - 25 x 1 mm
3924722	Droit 22G - 19 x 0,90 mm
3914722	Droit 24G - 19 x 0,74 mm
3931622	En Y avec valve 20G - 25 x 1 mm
3920622	En Y avec valve 22G - 19 x 0,90 mm
3910622	En Y avec valve 24G - 19x 0,74 mm



GAMME UROLOGIE GYNÉCOLOGIE

Poche à urine	66	Sonde PVC	67
Sonde de Foley 100% silicone	66	Spéculum gynécologique Cusco	66
Sonde de Foley latex siliconé	66	Support de poche à urine plastique	66

VOIE URINAIRE | VOIE RECTALE VOIE RESPIRATOIRE

Le but du sondage est de lever un obstacle empêchant la respiration, l'évacuation d'urine ou de matières fécales.

Sondage urinaire :
Norme NF EN ISO 20696


- Ponctuel (1 à 3 h) réalisé avec une sonde simple
- Intermittent (<24 h)
 - en cas de drainage urinaire, le godet est adapté à la connexion avec les poches à urine
 - connexion luer lock en cas d'utilisation pour la réalisation d'un bilan urodynamique
- À demeure (>24 h à 30 jours) : sonde de Foley en latex ou silicone. Justifié lors de traumatismes graves

Principaux critères de choix pour les sondes de Foley :

- Volume du ballonnet : 5 à 15 ml pour les hommes, 3 à 5 ml pour les enfants
- Le matériau :
 - < 3 semaines latex enduit, si délai > silicone
- 2 voies vidange de la vessie

Choix d'une sonde :

- Longueur (40 cm homme, 20 cm femme)
- Diamètre extérieur = charrière (1ch = 0.33 mm)
- Matériaux :
 - pour sondage ponctuel : PVC
 - pour sondage à demeure : latex ou silicone

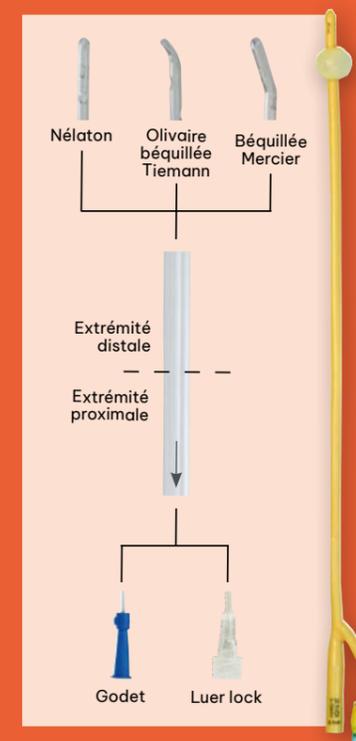

Les poches de recueil à urine doivent être conformes à la Norme NF ISO 8669-1.

SONDAGE & SYSTÈME


Le système clos ou système fermé correspond à l'assemblage de plusieurs éléments qu'il ne faut jamais désunir.

Choix des poches :

- Dans le cas d'une incontinence chronique, les poches de 2L seront utilisées en « poche de nuit » pour le recueil de l'urine. Ces poches sont non stériles, vidangeables et dotées d'une valve anti-reflux.
- Dans le cas de personnes alitées suite à une intervention chirurgicale et pour tous les patients sondés, les poches à urines seront stériles, d'un volume de 2 L ou 4 L avec valves anti-reflux, système d'accrochage au lit et au drap, système de prélèvement sans aiguille et filtre à bactéries.
- Pour les sondages de longue durée, il faut définir un rythme de changement suivant le protocole du service, par exemple : tous les mois pour les sondes en silicone. La poursuite du sondage est à redéfinir quotidiennement selon l'état du malade, entre le médecin et l'infirmière.

Principaux critères de choix :

- Stérile ou non
- 2 L ou 4 L
- Avec ou sans valve anti-retour
- Crochet ou pas
- Robinet à clapet ou en croix

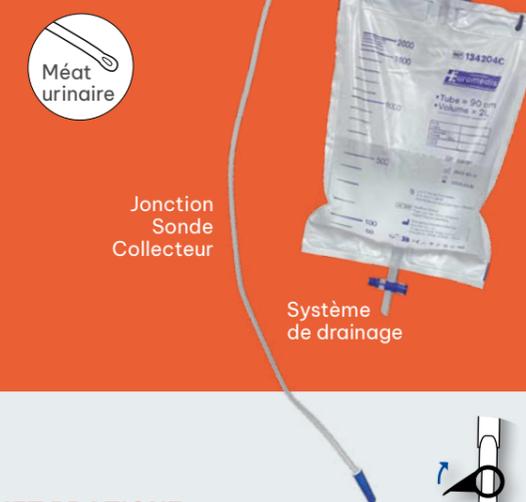

ROBINET PRATIQUE ET EFFICACE

- Simple dans sa conception, il permet de sécuriser l'ouverture et la fermeture du robinet.
- Efficace car une seule main suffit à le fermer ou l'ouvrir
- Sûr, car il permet de diminuer les risques d'une erreur de vidange non souhaitée

Sonde et drainage



POCHE À URINE STÉRILE EUROBAG®

Poche à urine. Avec site de prélèvement sans aiguille, clamp et robinet à clapet utilisable avec une seule main. Site de prélèvement 2 litres. Support de poche à urine non fourni pour la référence 134221R.

Vente au carton. Carton de 50.

Référence	Description	Conditionnement
1 134221R	Eurobag 8 + robinet à clapet	Palette de 32 cartons.
2 134222R	Eurobag 8H + robinet à clapet excentré + crochet	Palette de 24 cartons.
3 134223R	Eurobag 8HF + robinet à clapet rabattable + crochet + piège à bactérie	Palette de 24 cartons.
4 134224R	Eurobag 9HF 4L + robinet à clapet rabattable + crochet + piège à bactérie	Palette de 24 cartons.

POCHE À URINE NON STÉRILE

Poche à urine de 2 litres en PVC. Se présente sous 3 formes :
 - Standard
 - Standard avec valve
 - Standard avec valve et robinet
 Support de poche à urine non fourni.



Vente au carton. Palette de 28 cartons de 250 poches.

Référence	Description
134202	Standard
134203	Valve
134204C	Valve + Robinet en croix

SUPPORT DE POCHE À URINE

Plastique bleu.
 Vente au carton.



Référence	Conditionnement
199207	Palette de 16 cartons de 500.



SONDE DE FOLEY 100% SILICONE

Pour un sondage longue durée. Sonde d'une longueur de 40 cm. Ballonnet 5 à 15 ml. CH 12 à 22.

Vente à la boîte. Palette de 35 cartons de 10 boîtes de 10.

Référence	Description
174830	CH 12
174831	CH 14
174832	CH 16
174833	CH 18
174834	CH 20
174835	CH 22



SONDE DE FOLEY LATEX SILICONÉ

Sondage de courte et moyenne durée. Enduction silicone.

Vente à la boîte. Palette de 35 cartons de 10 boîtes de 10.

	Pédiatrique Ballonnet 3 - 5 ml	Standard Ballonnet 5 - 15 ml	Béquillé. 40 cm Ballonnet 5 - 15 ml
CH 08	174850		
CH 10	174851		
CH 12		174800	174880
CH 14		174801	174881
CH 16		174802	174882
CH 18		174803	174883
CH 20		174804	174884
CH 22		174805	174885
CH 24		174806	

SONDE PVC

Large gamme de sondes adaptées à la plupart des pathologies nécessitant un écoulement contrôlé, en particulier dans les spécialités d'urologie. Le matériau employé est le PVC. Ce matériau a été contrôlé sur le plan de son innocuité et de sa non-toxicité. Les sondes sont vendues stériles non lubrifiées.



1 Sonde vésicale femme droite 18 cm oeil latéral. Urologie.

Vente au sachet. Palette de 36 cartons de 10 sachets de 100.

Référence	Description
174100	CH 06

Vente à la boîte. Palette de 24 cartons de 8 boîtes de 100.

Référence	Description
174102B	CH 08
174103B	CH 10
174104B	CH 12
174105B	CH 14
174106B	CH 16
174107B	CH 18



2 Sonde vésicale femme bequillée. Urologie.

Vente au sachet. Palette de 36 cartons de 10 sachets de 100.

Référence	Description
174109	CH 10
174129	CH 12
174132	CH 14
174130	CH 16

3 Sonde de Tieman 40 cm - 2 oeil latéraux. Urologie.

Vente à la boîte ou au sachet. Palette de 24 cartons.

Référence	Description	Conditionnement
174122B	CH 12	Crt de 6 sachets de 100
174123	CH 14	Crt de 6 boîtes de 100
174124	CH 16	Crt de 6 boîtes de 100
174125	CH 18	Crt de 6 boîtes de 100

4 Sonde rectale 40 cm - 2 oeil latéraux. Gastro-entérologie.

Vente à la boîte. Palette de 24 cartons de 6 boîtes de 50.

Référence	Description
174140B	CH 18
174141B	CH 20
174142B	CH 22
174143B	CH 25
174144B	CH 28
174145B	CH 30
174146	CH 32

5 Sonde de Nelaton 40 cm - 2 oeil latéraux. Urologie.

Vente à la boîte ou au sachet. Palette de 24 cartons.

Référence	Description	Conditionnement
174111	CH 08	Crt de 8 sachets de 100
174112B	CH 10	Crt de 8 boîtes de 100
174113B	CH 12	Crt de 6 boîtes de 100
174114B	CH 14	Crt de 6 boîtes de 100
174115B	CH 16	Crt de 8 boîtes de 100
174116B	CH 18	Crt de 6 boîtes de 100
174117B	CH 20	Crt de 6 boîtes de 50
174118	CH 22	Crt de 6 boîtes de 50

6 Sonde d'aspiration 50 cm - 1 oeil. Anesthésie.

Vente à la boîte. Palette de 16 cartons de 6 boîtes de 100.

Référence	Description
174251	CH 06
174259B	CH 08
174266B	CH 10
174267B	CH 12
174268B	CH 14
174269B	CH 16
174270	CH 18



SPÉCULUM GYNÉCOLOGIQUE CUSCO

Spéculum type CUSCO non traumatisant à bord arrondis permettant une mise en place aisée. Ouverture et fermeture facile. Stérile. Proposé en 4 tailles. Transparence parfaite. Vis de sécurité avec blocage rapide. Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Vente au carton. Palette de 24 cartons de 100.

Référence	Description	Conditionnement
139250	Vierge Ø 20 mm	Blanc
139251	Petit Ø 24 mm	Bleu
139252	Moyen Ø 26 mm	Rouge
139253	Large Ø 30 mm	Vert



GAMME PROTECTION



Bavoir	73	Drap d'examen	70
Blouse	71	E-roll	70
Bonnet universel	73	Kit de protection visiteur	71
Calot plat en papier	73	Lunette de protection	72
Casquette à visière	72	Manchette de protection	73
Charlotte clip	72	Masque 3 plis - Type IIR	72
Charlotte ronde en non-tissé	73	Masque FFP2 type bec de canard	72
Couvre-chaussure	71	Tablier	71
Drap de transfert	73		

SE PROTÉGER, PROTÉGER LES PATIENTS EST NOTRE PRIORITÉ. EUROMEDIS A DÉVELOPPÉ UNE GAMME COMPLÈTE D'ÉLÉMENTS DE PROTECTION DESTINÉE À CHAQUE PERSONNE ET À CHAQUE SITUATION.



Protection



Formats 300
Rouleaux 6
Dimensions 50 x 35 cm
g/m² 2 x 18

1 E-ROLL COMPACT 35

Deux fois plus long qu'un rouleau de draps traditionnel. Il permet des économies directes d'emballage (plastique, carton et mandrin) et facilite le stockage. En utilisant le Compact Roll vous participez directement au développement durable. Largeur 50 cm. Prédécoupé tous les 35 cm.

FOCUS SUR

LE DRAP D'EXAMEN PLASTIFIÉ IMPERMÉABLE



Super absorbant. 28 g + 14 g, face polyéthylène. Rouleau de 50 ou 75 cm de large. Prédécoupé tous les : 38 cm (180 formats), 114 cm (60 formats) et 192 cm (40 formats).

Référence	Description	Conditionnement
2 121300	Bleu 180 formats 50 x 38 cm.	
2 121301	Bleu 60 formats 50 x 114 cm.	
2 121321	Blanc 40 formats 75 x 192 cm.	



Formats 300
Rouleaux 6
Dimensions 50 x 30 cm
g/m² 2 x 18

3 E-ROLL COMPACT 30

Deux fois plus long qu'un rouleau traditionnel. Il permet des économies directes d'emballage (plastique, carton et mandrin) et facilite le stockage. Largeur 50 cm. Prédécoupé tous les 30 cm. 100% ouate de cellulose.



Formats 150
Rouleaux 12
Dimensions 50 x 38 cm
g/m² 2 x 18

4 E-ROLL PREMIUM

100% ouate de cellulose. Blanc. Résistant et absorbant. Largeur 50 cm. Prédécoupé tous les 38 cm.



Formats 150
Rouleaux 9
Dimensions 50 x 35 cm
g/m² 2 x 18

5 E-ROLL GAUFRE

2 plis micro-gaufré collé. Très résistant. Pure cellulose douce. Largeur 50 cm. Prédécoupé tous les 35 cm.
121252 : 135 formats / 121252G : 121 formats



Formats 150
Rouleaux 12
Dimensions 50 x 30 cm
g/m² 2 x 18

6 E-ROLL CLASSIC 150

Résistant et absorbant. 100% ouate de cellulose. 2 plis. Largeur 50 cm. Prédécoupé tous les 30 cm.



Formats 135
Rouleaux 9
Dimensions 50 x 35 cm
g/m² 2 x 18

7 E-ROLL CLASSIC 135

Confort et résistance. 100% ouate de cellulose. 2 plis. Largeur 50 cm. Prédécoupé tous les 35 cm.



Formats 150
Rouleaux 12
Dimensions 50 x 38 cm
g/m² 2 x 18

8 E-ROLL ECO

Ouate de cellulose mixte. Blanc (2 x 18 g), résistant et bonne absorption. Prédécoupé tous les 38 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
1 221253	PaLETTE de 24 cartons de 6 rouleaux.
2 121300	PaLETTE de 36 cartons de 6 rouleaux.
2 121301	PaLETTE de 36 cartons de 6 rouleaux.
2 121321	PaLETTE de 25 cartons de 6 rouleaux.
3 221254	PaLETTE de 24 cartons de 6 rouleaux.
4 221250B	PaLETTE de 18 cartons de 12 rouleaux.

Référence	Conditionnement
5 121252	PaLETTE de 18 cartons de 9 rouleaux.
5 121252G	PaLETTE de 18 cartons de 9 rouleaux.
6 121256	PaLETTE de 24 cartons de 12 rouleaux.
7 121254	PaLETTE de 24 cartons de 9 rouleaux.
8 121250B	PaLETTE de 18 cartons de 12 rouleaux.

BLOUSE

Blouse visiteur en non-tissé de polypropylène de 25 g/m². Elle se noue à l'encolure et à la taille grâce à deux lacets. Les poignets sont équipés d'élastiques pour assurer un bon maintien. Idéale pour la protection des visiteurs hospitaliers. Dimensions : 110 x 130 cm.



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
161265/100	Blanche	PaLETTE de 30 cartons de 100
161266/100	Bleu	PaLETTE de 30 cartons de 100
161267/100	Vert	PaLETTE de 30 cartons de 100

TABLIER

Tablier en polyéthylène destiné à une bonne protection du tronc et des jambes, tant dans le domaine médical qu'industriel. L'épaisseur est de 15 µm.



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
161103A	Blanc opaque 125 cm	PaLETTE de 54 crts de 10 sachets de 100.
161105	Blanc opaque 140 cm	PaLETTE de 36 crts de 10 sachets de 100.
161106	Bleu opaque 125 cm	PaLETTE de 54 crts de 10 sachets de 100.

KIT DE PROTECTION VISITEUR

Il comprend :
- 1 blouse visiteur
- 1 charlotte clip
- 1 masque en papier
- 2 couvre-chaussures



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
161201X	PaLETTE de 18 cartons de 100

COUVRE-CHAUSSURE

Couvre-chaussure, de taille unique, en polyéthylène ou non-tissé avec ou sans antidérapant. Répond aux besoins des utilisateurs en milieu industriel, en salle blanche ou en milieu hospitalier.

• Non-tissé blanc 40 g/m²



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
161540X	PaLETTE de 20 crts de 10 sachets de 100

• Polyéthylène bleu



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
161104X	PaLETTE de 12 sachets de 100

• Antidérapant blanc et bleu



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
161548X	Carton de 400.

Protection



MASQUE DE PROTECTION

Nos masques offrent une protection et répondent aux exigences de la norme NF EN 14683*

Ils sont adaptés aux blocs opératoires et à une longue utilisation en salles propres. Ils s'adaptent au visage pour prévenir toute fuite. Respirabilité et douceur.

Filtration \geq 98%.

* NF EN 14683 : La norme classe les masques en 4 catégories dont le Type II qui offre une filtration avec un seuil $>$ 98 %.

FOCUS SUR

LES MASQUES 3 PLIS TYPE IIR



Masque facial médical bleu foncé, jetable avec barre nasale. Non stérile. Taille adulte. Efficacité de la filtration bactérienne : \geq 98%. Résistant aux projections de liquides.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
161321	Palette de 20 cartons de 40 boîtes de 50 masques.

FOCUS SUR

LE DRAP DE TRANSFERT



En non-tissé polypropylène. Dimensions : 150 x 217 cm. Grammage : 70 g/m².

- Résistance au feu : Classe I
- Résistance à la charge : 150kg

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
154120	Palette de 20 cartons de 50

CALOT PLAT EN PAPIER

Calot en papier avec liseré bleu adapté aux utilisateurs en milieu industriel ou hospitalier. Son grammage est de 80 g/m². Il est réglable et dispose d'un fond perforé.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
161154X	Palette de 36 cartons de 10 boîtes de 100.



FABRIQUÉ EN FRANCE

MASQUE FFP2 TYPE BEC DE CANARD

Demi-masque, à usage unique, non stérile. Respiration optimale, adaptabilité à la morphologie du visage.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
01010183	Palette de 20 cartons de 37 boîtes de 40 masques.



LUNETTE DE PROTECTION

Lunettes de protection réutilisables en polycarbonate transparent. Elles offrent un large champ de vision et sont compatibles avec des lunettes de vue.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
208007	L'unité.



BONNET UNIVERSEL

A usage unique en non-tissé en viscose. Perméable à l'air. Son grammage est de 45 g/m². Il répond aux besoins d'hygiène hospitalière en milieu chirurgical. La circonférence à la base non étirée est de 56,5 cm.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
161151	Bleu	Palette de 35 cartons de 5 boîtes de 100.
161152	Vert	Palette de 35 cartons de 5 boîtes de 100.



CHARLOTTE RONDE EN NON-TISSÉ

Charlotte ronde en non-tissé à usage unique avec élastique souple non traumatisant pour un maintien efficace sur la tête. Idéale pour envelopper complètement les cheveux. Grammage : 14 g/m².

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
161125X	Blanche	Palette de 54 cartons de 10 sachets de 100.
161126X	Bleue	Palette de 54 cartons de 10 sachets de 100.



CASQUETTE À VISIÈRE

Casquette résille blanche à visière, idéale pour la protection des cheveux en industrie alimentaire. La visière de protection est de 80 g/m² et la résille de 10 g/m². Disponible avec ou sans cache-cou.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
161131X	Sans cache-cou	Palette de 28 cartons de 10 sachets de 100.
161132X	Cache-cou	Palette de 28 cartons de 10 sachets de 100.



CHARLOTTE CLIP

Charlotte clip en non-tissé en polypropylène à usage unique avec élastique en spandex souple et non traumatisant. Grammage : 14 g/m².

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
161130X	Palette de 36 cartons de 4 boîtes de 250.
161139	Palette de 24 cartons de 10 sachets de 100.

BAVOIR

- Deux types de bavoirs :
- 199221 : Le bavoir avec poche de recueil en polyéthylène de couleur blanche, gaufré, 40 x 60 cm.
 - 199222A : Le bavoir de protection 70 cm, avec poche de recueil (11 cm) en ouate de cellulose imperméable. 3 plis. (18 + 14 + 18 cm)

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
1 199221	Palette de 66 cartons de 10 sachets de 100.
2 199222A	Palette de 36 cartons de 6 sachets de 100.



MANCHETTE DE PROTECTION

Assure la protection des avant-bras en milieu industriel agro-alimentaire. Épaisseur de 20 μ m. Manchette en PE, blanche opaque. Parfaitement étanche grâce aux élastiques aux deux extrémités. Dimensions : 220 x 440 mm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
161119	Palette de 36 cartons de 20 sachets de 100.



GAMME OXYGÉNOTHÉRAPIE



Lunettes à oxygène	75
Masque à oxygène	75
Sonde à oxygène	75

L'OXYGÉNOTHÉRAPIE EST UNE MÉTHODE VISANT À APPORTER ARTIFICIELLEMENT DE L'OXYGÈNE À UN MALADE DE FAÇON À RÉTABLIR OU À MAINTENIR UN TAUX NORMAL D'OXYGÈNE DANS LE SANG. CET APPORT SE FAIT GRÂCE AUX :

- Lunettes à oxygène
- Sonde nasale à oxygène
- Masque à oxygène

Lunettes à oxygène

Elles sont adaptées pour fournir un faible débit : 0,5 à 3 L/min. Composition PVC avec ou sans dehp, « sans odeur », fournies avec embout droit ou courbe, avec ou sans tubulure de raccordement de 2 m.

Masque simple à oxygène

- Le masque simple est muni d'ouvertures latérales sans valve souple. Ils sont adaptés pour un débit moyen : 4 à 8 L/min
- Changer le masque quotidiennement
- Pour adulte ou enfant, avec pince-nez et élastique de sécurité. Principalement composé de PVC « sans odeur »

Sonde nasale à oxygène

Elles sont utilisées pour l'alimentation du patient en déficience respiratoire. Fourni avec ou sans tampon mobile.

LUNETTES À OXYGÈNE

Pour adulte et enfant. Reliées à un tube de 2 m permettant le raccordement à tous les types de supports de bouteilles ou extracteurs d'oxygène et sont munies de différents types d'embout nasal.



Vente au carton. Carton de 50.

Référence	Description	Conditionnement
156100	Adulte embout droit	Palette de 88 cartons.
156112	Adulte embout courbe	Palette de 42 cartons.
156101SD	Pédiatrique embout droit	Palette de 40 cartons.

MASQUE À OXYGÈNE

Pour adulte et enfant. Anatomiquement bien dessiné, avec pince-nez et élastique de sécurité. Avec ou sans tubulure, il reste en position. Le matériau principal est le PVC.



Vente au carton. Carton de 50.

Référence	Description	Conditionnement
156102	Tubulure 2,00 m Adulte (mentonnier)	Palette de 32 cartons.
156121SD	Sans tubulure Pédiatrique sans DEHP	Palette de 40 cartons.



Vente au sachet.

Palette de 35 cartons de 5 boîtes de 100.

Référence	Description
174300	Ouverture distale multiperforée CH 08

SONDE À OXYGÈNE

Alimentation en oxygène du patient déficient respiratoire, ce dispositif peut être fourni avec ou sans tampon mobile. 40 cm.

Vente à la boîte. Palette de 24 cartons de 6 boîtes de 100.

Référence	Description	Référence	Description
174303B	Ouverture distale multiperforée CH 10	174308	Tampon mousse mobile CH 14
174304B	Ouverture distale multiperforée CH 12	174301F	Tampon mousse fixe CH 08
174305B	Ouverture distale multiperforée CH 14	174306F	Tampon mousse fixe CH 10
174306B	Tampon mousse mobile CH 10	174307F	Tampon mousse fixe CH 12
174307	Tampon mousse mobile CH 12	174308F	Tampon mousse fixe CH 14



GAMME HYGIÈNE ET INCONTINENCE



Hygiène		Incontinence	
Carré de soin	77	Alèse Finéa®	81
Distributeur de savon	78	Couche droite Finéa®	81
Gant de toilette	77	Incontinence Finéa®	80
Lingettes	77, 78	Protection féminine Finéa®	80
Mouchoirs	78	Protection masculine Finéa®	80
Savon crème moussante	78	Slip Finéa®	81
Tampons alcool	77	Slip de maintien	82

Hygiène



CARRÉ DE SOIN

Carré de soin multi-usages adapté pour la toilette des patients ou l'essuyage domestique. Ultra-absorbant, très résistant à l'état humide comme à l'état sec. Ne peluche pas, ne se désagrège pas au contact de l'eau.

Vente au carton. Palette de 18 cartons de 40 sachets de 50.

Référence	Description
124500B	28 x 30 cm



FOCUS SUR

LES GANTS DE TOILETTE

En non-tissé (15 x 23 cm).

- 199305 - Standard bleu : Gant absorbant, résistant et doux à l'état humide (45 g/m²). 100% viscosse.
- 199311 - Molletonné blanc : Très absorbant et doux, très résistant. Utilisation longue durée 75 g/m². Gant soudé. 20 % viscosse et 80 % polyester.
- 199306 - Imperméable en non tissé avec couche de polyéthylène (58 g/m²). Gant absorbant, résistant et doux à l'état humide

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
199305	Standard bleu	Palette de 56 crts de 10 sachets de 100
199306	Imperméable en non tissé	Palette de 42 crts de 10 sachets de 100
199311	Molletonné blanc	Palette de 36 crts de 15 sachets de 50



TAMPON ALCOOL 70°

Prêt à l'emploi pour toute désinfection de la peau. Papier crêpe imprégné d'alcool à 70° pour désinfection cutanée locale. Dimension : 60 x 30 mm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
148102	Palette de 84 cartons de 40 boîtes de 100.



LINGETTES ALOÉ VERA

Lingettes humides à usage unique conçues pour prendre soin des peaux délicates des utilisateurs de produit d'incontinence. Dimension : 22 x 20 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
28400400	Palette de 54 cartons de 16 sachets de 54.

Hygiène



MOUCHOIRS
Mouchoirs doux en boîte distributrice. Pure ouate de cellulose. 14,5 g/m².

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
199220	Palette de 48 cartons de 20 boîtes de 100.



LINGETTES EURO-NETTE®
Lingettes nettoyantes et désinfectantes, imprégnées d'une solution bactéricide, levuricide et virucide. Elles sont destinées aux surfaces dures non-poreuses. Dimensions : 130 x 200 mm

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
152400	Palette de 90 cartons de 12 boîtes.



LINGETTES ASEPTONET
Préconisées pour le nettoyage et la désinfection du petit matériel médical, des dispositifs médicaux non-invasifs et des surfaces exposées aux souillures. Elles sont imprégnées d'une lotion bactéricide, virucide et fongicide. Dimensions : 180 x 200 mm.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
252107	Palette de 20 cartons de 12 sachets de 100 lingettes.



DISTRIBUTEUR DE SAVON
Distributeur mural de savon à bouton poussoir. Matière plastique (ABS). Capacité 1 litre.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
297175	Palette de 20 cartons de 10.



SAVON CRÈME MOUSSANTE
Crème lavante pour les mains. Parfum amande douce. Conditionné en bidon de 5 litres.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
297155	Palette de 84 cartons de 2.

Incontinence

LE TÉMOIN DE SATURATION

Ligne d'impression grise

Témoin imprimé s'efface après miction

Elle ne doit pas gâcher le quotidien de vos clients. Conseils pour choisir le produit le mieux adapté en cas de fuites légères jusqu'à l'incontinence.

LES DIFFÉRENTS TYPES D'INCONTINENCE	EXPLICATIONS
Urinaire d'effort	<ul style="list-style-type: none"> • Environ 50 % des cas • Rire, tousser, éternuer, un effort physique peuvent entraîner une perte d'urine (quelques gouttes) à cause de l'augmentation de la pression abdominale
Par instabilité vésicale	<ul style="list-style-type: none"> • Environ 30 % des cas • La vessie se contracte de façon involontaire et est hyperactive • Cela entraîne des envies d'uriner fréquentes, pressantes • Le volume est assez important
Mixte	<ul style="list-style-type: none"> • Environ 20 % des cas • C'est l'association chez la même personne d'une incontinence urinaire d'effort et d'une instabilité vésicale
Par regorgement	<ul style="list-style-type: none"> • Forme la plus fréquente chez l'homme • Cela engendre un trop-plein de la vessie et des fuites par gouttes.

Les indispensables

Une protection urinaire doit être adaptée aux besoins de la personne incontinente.

- Le bon choix de taille S M L XL
- La bonne absorption
- La technique de pose



1 LE BON CHOIX DU PRODUIT ET SA SATISFACTION PASSENT PAR LE BON CHOIX DE LA TAILLE

Guide des tailles

Bien mesurer le tour de hanches et non le tour de taille.

Tailles	Tour de hanche	Taille de vêtement
1 - S	60 > 80 cm	> 36 / 38
2 - M	70 > 110 cm	> 42 / 44
3 - L	110 > 160 cm	42 > 54 / 58
4 - XL	140 > 175 cm	< 58

2 UTILISER LA PROTECTION QUI SERA LA PLUS ADAPTÉE AUX BESOINS DE VOTRE PATIENT

Niveau d'absorption

Fuites urinaires légères	MEN	LADY	Fuites urinaires modérées et incontinence	PANT	FORM	SLIP
EXTRA	50 ml	50 ml	EXTRA	200 ml	500 ml	600 ml
SUPER	//	75 ml	OPTIMUM	400 ml	900 ml	900 ml
MAXI	//	100 ml	OPTIMUM+	//	//	1500 ml

Incontinence



FINÉA® LADY

Protection anatomique et ergonomique adaptée pour les fuites urinaires légères, limitées à quelques gouttes survenant généralement à l'effort, provoquées par la toux, le lever, le rire ou encore à la suite d'un accouchement.

Vente au carton. Sachet de 28.

Référence	Description	Conditionnement
120534B	Extra	Palette de 42 cartons de 12 sachets.
120535B	Super	Palette de 30 cartons de 10 sachets.
120536B	Maxi	Palette de 36 cartons de 7 sachets.



FINÉA® MEN

Protection anatomique spécifiquement adaptée à l'anatomie masculine. Conseillée pour les fuites urinaires légères, elle offre confort, discrétion et bon maintien.

Vente au carton. Sachet de 20.

Référence	Description	Conditionnement
120537A	Super	Palette de 63 cartons de 6 sachets.



FINÉA® PANT

Sous-vêtement absorbant pour fuites urinaires. Il est adapté aux femmes comme aux hommes. Confortable et sécurisant, il permet d'effectuer sans gêne tous les mouvements du quotidien. Grâce à son élasticité, il s'adapte parfaitement à la silhouette de l'utilisateur. Son absorption est rapide et offre un système de garde au sec.

Vente au carton. Carton de 6 sachets de 14.

Référence	Description	Conditionnement
22014100	Small Flufsan	Palette de 30 cartons.
120542	Medium Extra	Palette de 24 cartons.
120543	Large Extra	Palette de 30 cartons.
120548	Medium Optimum	Palette de 27 cartons.
120549	Large Optimum	Palette de 24 cartons.
120550	Extra Large Flufsan	Palette de 24 cartons.



FINÉA® FORM

Protection anatomique mixte pour incontinence modérée à forte. Sa forme est pensée pour épouser au mieux l'anatomie de la personne, assurant un confort maximal. Dotée d'un Voile externe « sensation textile », doux et silencieux.

Vente au carton. Carton de 4 sachets de 20.

Référence	Description	Conditionnement
120750	Extra	Palette de 28 cartons.
120751	Optimum	Palette de 28 cartons.
15006100	Max+	Palette de 24 cartons.



FINÉA® SLIP

Change complet pour incontinence modérée à forte. Une meilleure identification produit avec un système de gouttes pour l'absorption et un témoin de saturation lisible ainsi que des absorptions renforcées.

Vente au carton. Sachet de 20.

Référence	Description	Conditionnement
120660	Small Optimum	Palette de 30 cartons de 4 sachets.
120661	Medium Extra	Palette de 36 cartons de 4 sachets.
120662	Medium Optimum	Palette de 28 cartons de 4 sachets.
120663	Medium Optimum+	Palette de 28 cartons de 4 sachets.
120664	Large Extra	Palette de 28 cartons de 4 sachets.
120665	Large Optimum	Palette de 24 cartons de 4 sachets.
120666	Large Optimum+	Palette de 24 cartons de 4 sachets.
120667	XL Optimum	Palette de 28 cartons de 3 sachets.
120668	XL Optimum+	Palette de 28 cartons de 3 sachets.



FINÉA® COUCHE DROITE

Protection rectangulaire traversable destinée à renforcer l'absorption de slips absorbants ou changes complets. Dimensions : 20 x 60 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
137110	Palette de 54 crts de 4 sachets de 20



ALÈSE LITRERIE ET FAUTEUIL FINÉA® BED

Alèse à usage unique bleue. Composée d'un voile interne doux et hypoallergénique en non-tissé hydrophile, d'un tampon et d'un voile externe intraversable en non-tissé. Cette alèse est douce, confortable et absorbante. Elle est idéale pour protéger les lits et les fauteuils.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
124134	60 x 40 cm super - 42 g	Palette de 28 cartons de 9 sachets de 30.
124135	60 x 60 cm super - 60 g	Palette de 48 cartons de 4 sachets de 30.
124136	60 x 90 cm super - 100 g	Palette de 28 cartons de 4 sachets de 30.
124140B	Bordable 90 x 180 cm - 100 g	Palette de 32 cartons de 4 sachets de 25.

Incontinence



ACCESSOIRES
POUR UN BON MAINTIEN
DES PROTECTIONS
ANATOMIQUES

SLIP DE MAINTIEN COTTON FIX

Slip de maintien doux, léger et agréable à porter. Composé de 96 % polyester et 4 % élastane, sans latex. Lavable jusqu'à 40 fois à 60°.

Vente au carton. Palette de 64 cartons de 4 sachets de 25.

Référence	Description
154310	Small
154311	Medium
154312	Large
154313	X. Large
154314	XX. Large



SLIP DE MAINTIEN STANDARD

Dispositif de fixation. Il assure un maintien efficace des protections grâce à son filet externe et résistant. Composé de 87 % de polyester et de 13 % d'élasthanne. Réutilisable et lavable à 60°C.



Vente au carton. Palette de 20 cartons de 6 boîtes de 50.

Référence	Description
154303	Taille 1 Small - Jaune
154300	Taille 2 Medium - Bleu
154301	Taille 3 Large - Marron
154302	Taille XL Extra Large - Vert

SLIP SOFT PANT À USAGE UNIQUE

Slip à grande élasticité, résistant et très léger. Indiqué pour le maintien de pansements, de couches moyennes et grandes incontinences. Idéal pour patients alités. À usage unique. Taille unique. Polyester : 96 %. Élastomère : 3 %. Polyamide : 1 %.



Vente à la boîte. Palette de 8 cartons de 10 boîtes de 100.

Référence	Description
154360	Medium
154361	Large
154362	X. Large
154363	XX. Large



GAMME DIAGNOSTIC

Abaisse-langue bois	85	Stéthoscope	85
Étui thermomètre	85	Tensiomètre	84
Oxymètre	84	Thermomètre	84, 85
Spéculum auriculaire	85		

Diagnostic



Univers **E-VITAL**



OXYMÈTRE DE POULS

Mesure de la saturation en oxygène et de la fréquence cardiaque. 20 heures d'autonomie. Écran couleur. Dimensions L.60 x l.32,5 x H.30,5 mm.



GARANTIE 2 ANS

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
133280	Bleu	L'unité.
133281	Orange	L'unité.



GARANTIE 5 ANS

TENSIOMÈTRE E-TENS POIGNET VOCAL

Doté d'une commande vocale. Compact. Grand écran LCD, 60 mémoires. 2 utilisateurs. Détection des arythmies. Moyenne des 3 dernières mesures. Livré avec étui et piles.

Vente à l'unité

Référence	Conditionnement
DBP-2170	Carton de 8.



GARANTIE 5 ANS

TENSIOMÈTRE E-TENS POIGNET AVEC PRÉSENTOIR

Élégant et très compact. Grand écran LCD, 60 mémoires. 2 utilisateurs. Détection des arythmies. Moyenne des 3 dernières mesures. Livré avec étui et piles. Dimensions du bracelet : 13,5 - 21 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
133260	Carton de 6.



GARANTIE 5 ANS

TENSIOMÈTRE E-TENS BRAS

Élégant et très compact. Grand écran LCD, 60 mémoires. 2 utilisateurs. Détection des arythmies. Moyenne des 3 dernières mesures. Livré avec étui et piles. Dimensions du bracelet : 22 - 36 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
133261	Carton de 4.



GARANTIE 2 ANS

THERMOMÈTRE E-TEMP FLASH

Frontal infrarouge sans contact. Rapide et facile à utiliser. Mesure la température corporelle et ambiante. Affichage par code couleur en fonction du degré de fièvre. Écran rétro-éclairé pour la lecture de nuit. Alarme sonore en cas de dépassement de la température. Arrêt automatique. Fourni avec pile.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
166103	Présentoirs de 6.



Achat malin

GARANTIE 2 ANS

THERMOMÈTRE E-TEMP FLEX EMBOUT SOUPLE

Électronique à embout souple. Précis et simple d'utilisation. Résistant à l'eau. Alarme sonore, arrêt automatique et mémoire de la dernière mesure. Alarme fièvre. Fourni avec pile et étui de rangement. Présentoir de 12 (6 bleus et 6 mauves).

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
166100	Présentoirs de 12.



THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

Affichage digital. Totalement étanche. Mesure de température entre 32 °C et 43 °C. Peut être désinfecté par immersion. En étui rigide transparent. Sonore, à mémoire, contrôlé et certifié conforme. Avec piles.

Vente à la boîte. Boîte de 10.

Référence	Conditionnement
166102A	Palette de 80 cartons de 10 boîtes.



THERMOMÈTRE SANS MERCURE

Écologique. Sans mercure en étui rigide. Composé de gallium, d'indium et d'étain. Très précis ($\pm 1/10$ °C).

Vente au présentoir. Présentoir de 20 thermomètres.

Référence	Conditionnement
166110	Palette de 30 crts de 12 présentoirs.



ÉTUI THERMOMÈTRE THERMOSEPT®

Étui jetable de thermomètre électronique.

Vente à la boîte. Palette de 50 cartons de 10 boîtes de 1000.

Référence	Description
166111	Non lubrifié
166112	Lubrifié



ABAISSE-LANGUE BOIS

À usage unique en bois plat et à bouts arrondis.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
109200	Adulte	Palette de 20 cartons de 100 boîtes de 100.
109201	Enfant	Palette de 24 cartons de 40 boîtes de 250.




SPÉCULUM AURICULAIRE

Spéculum auriculaire, à usage unique, en plastique gris. Dispositif à installer sur un otoscope avec fixation à baïonnette

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
2470025AEUR	2,5 mm	Palette de 30 cartons de 60 boîtes de 250.
2470040AEUR	4 mm	Palette de 30 cartons de 60 boîtes de 250.

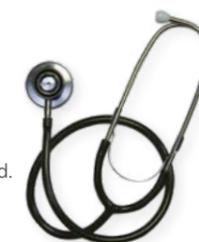

STÉTHOSCOPE

Simple et double pavillon avec bague anti-froid. Lyre incorporée à la tubulure.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
138111	Simple pavillon - Noir	Palette de 30 cartons de 100.
138112	Simple pavillon - Bleu	Palette de 30 cartons de 100.
138101	Double pavillon - Noir	Palette de 16 cartons de 100.
138119	Double pavillon - Bleu	Palette de 24 cartons de 100.

GAMME PLASTIQUE ET CELLULOSE



PRODUITS EN FIBRE MOULÉE (CELLULOSE)

destinés à l'hygiène des patients. Conformes à la norme PAS29. Étanches sur une période de 4 h. Passé ce délai, il est recommandé de vider et/ou détruire le récipient pour éviter tout risque de fuite.



HARICOT À USAGE UNIQUE EN CELLULOSE MOULÉ

Capacité de 750 ml. Dimensions : 253 x 146 x 44 mm. Étanche sur une période de 4 heures maximum.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
125137A	Palette de 20 cartons de 320.



URINAL À USAGE UNIQUE

Dimensions : 256 x 111 x 123 mm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
125139	Palette de 6 cartons de 100.



CRACHOIR AVEC COUVERCLE

Crachoir gradué de 0 à 150 ml couleur blanche, muni d'un couvercle. Dimensions : 6,5 x 6 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
125134	Pal. de 24 crts de 10 sachets de 40.



HARICOT À USAGE UNIQUE POLYPROPYLENE

Dimensions : 24 x 14 x 4 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
125135	Pal. de 16 crts de 9 sachets de 120.



BOÎTE À DENTIER

Emballage de protection pour prothèse dentaire avec un couvercle. Diamètre : 60 mm - Hauteur : 100 mm

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
125145	Pal. de 20 crts de 10 sachets de 50.



LES PRODUITS À USAGE UNIQUE

Principalement en cellulose pour des emplois ponctuels. Pour des emplois répétés il est préférable d'utiliser les produits plastiques car ils peuvent être recyclés et stérilisés à la chaleur.

Nos produits sont particulièrement bien adaptés aux patients alités ou difficilement mobiles.



BRACELET D'IDENTIFICATION

Étanche. Système de fixation pratique, rapide et inviolable. Seule l'utilisation de ciseaux permet la désolidarisation du poignet. Aucun risque de coupure ou d'irritation.

Vente à la boîte.

Palette de 60 cartons de 10 boîtes de 100.

Référence	Description
167110	Adulte Bleu
167112	Enfant Bleu
167113	Enfant Rose



VESSIE À GLACE LATEX NATUREL

Avec bouchon à jupe rabattable.

Vente à l'unité. Boîte de 1.

Référence	Description	Conditionnement
320000236	Ø 20 cm	Pal. de 56 crts de 34 btes
320000237	Ø 25 cm	Pal. de 56 crts de 34 btes
320000238	Ø 28 cm	Pal. de 56 crts de 34 btes
320000239	Ø 30 cm	Pal. de 56 crts de 18 btes
320000347	Ø 35 cm	Pal. de 56 crts de 18 btes



GAMME MAINTIEN À DOMICILE



Transfert et mobilité

Canne et stabilisateur	90-91
Déambulateur/rollator	88-89
Dragonne	91
Fauteuil de Transfert	91

Bain et toilettes

Cadre de toilette	93
Chaise/fauteuil garde-robe	93-94
Planche de bain	92
Siège de bain/douche	93
Tabouret/chaise de douche	92

Transfert et mobilité



EFFICACITÉ

Gamme de produits (indispensables) pour sécuriser le domicile, la salle de bain, les sanitaires, et faciliter la mobilité.

SÉCURITÉ

Etudiés spécialement pour éviter les chutes, équipé de pads anti-dérapants, de freins, de garantie de mise en charge. Des matériaux légers et durables, confortables pour les utilisateurs.



DÉAMBULATEUR PLIANT

Déambulateur pliant en aluminium s'adapte à la taille de l'utilisateur grâce à ses 4 pieds réglables en hauteur en 8 positions.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
216103	Palette de 12 cartons de 4.



DÉAMBULATEUR ARTICULÉ PLIANT

Cadre de marche aluminium pliant articulé réglable en hauteur de 74 à 93 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
211040	Palette de 12 cartons de 4.



Pour découvrir la fiche commerciale du produit



SCANNEZ MOI!



ROLLATOR 4 ROUES

Structure en métal époxy légère et résistante. Hauteur poignées réglables de 78 à 93 cm. Freins ergonomiques. Position « parking ». Panier + tablette amovibles + porte canne. Coloris taupe.



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
216111A	Palette de 10 cartons de 1



FOCUS SUR

LE ROLLATOR 4 ROUES PLIANT

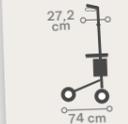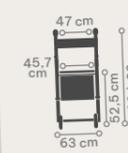

En aluminium et pliant. Ultra léger et compact. Panier intégré. Porte canne de série.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
216113	Palette de 12 cartons de 1



ROLLATOR 2 ROUES

Facilite et sécurise les déplacements. Encombrement minimum pour le rangement et le transport. Hauteur poignée réglable de 69,5 à 93 cm. Pliant à roulettes. Avec siège.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
216112R	Palette de 18 cartons de 1



ROLLATOR 2 ROUES

Déambulateur 2 roues avec siège confortable et appui-dos. Réglable en hauteur de 80 à 89,5 cm. Pliant.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
216102	Palette de 5 cartons de 2.



ROLLATOR 3 ROUES ACIER PLIANT

Particulièrement adapté pour les petits espaces ainsi que les déplacements en intérieur et extérieur. Freins à câble. Poignées anatomiques réglables en hauteur. Facilement pliable avec panier amovible.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
216101A	Palette de 10 cartons de 1.



ROLLATOR 4 ROUES ALUMINIUM

Léger et pratique, il permet de sécuriser les déplacements en intérieur et extérieur. Dôté d'un siège confortable et dossier arrondi. Structure pliable. Blocage des freins. Hauteur du siège : 53,5 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
216104	Palette de 10 cartons de 1.



ROLLATOR 4 ROUES BARIATRIQUE

Structure acier, léger et ultra-résistant. Convient aux personnes en situation de handicap de forte corpulence. Hauteur réglable. Facilement pliable, il permet d'obtenir un encombrement minimum.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
216109	Palette de 8 cartons de 1



Transfert et mobilité



CANNE ALUMINIUM RÉGLABLE
Motif cachemire, poignée courbé marron avec dragonne. Hauteur réglable de 70 à 92,7 cm.

Jusqu'à épuisement des stocks

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
251104	Carton de 20.



CANNE ALUMINIUM RÉGLABLE ET PLIANTE
Motif fleur bleu avec poignée courbé marron.

Jusqu'à épuisement des stocks

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
251108	Carton de 20.



PENSEZ-Y !

STABILISATEUR DE CANNE

Stabilité renforcée grâce à sa large surface au sol de 9 cm. Maintien la canne à la verticale. S'adapte sur des cannes Ø 15 à 16 mm et/ou 18 à 19 mm.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
203022	Carton de 20.

Nos INDISPENSABLES



1 CANNE RÉGLABLE NOIRE

Canne aluminium. Poignée droite noire. Hauteur de 70 à 92,7 cm.



6 7 CANNE PRÉCISA

Canne aluminium. Poignée avec grip antidérapant. Ajustement précis grâce à son bouton pression. Hauteur de 66,5 à 103 cm.



2 3 4 5 CANNE RÉGLABLE

Canne aluminium. Réglable de 76 à 99 cm. S'adapte aux personnes de 1,52 m à 1,95 m. Poignée droite en bois.



8 CANNE ANATOMIQUE

Poignée anatomique pour faciliter la prise en main.



Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
1	251102 Noir	Carton de 20.
2	203011 Beige / rose	Carton de 25.
3	203012 Fantaisie rouge	Carton de 25.
4	203013 Fleurie rose / bleu	Carton de 25.
5	203014 Beige / blanc	Carton de 25.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
6	203023 Rose	Carton de 25.
7	203024 Noir	Carton de 25.
8	251100 Droitier	Carton de 20.
8	251101 Gaucher	Carton de 20.

CANNE RÉGLABLE PLIANTE

Canne aluminium, poignée droite en bois. Pliante de 85 à 95 cm. S'adapte aux personnes de 1,60 m à 1,85 m.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
9	203015 Beige / rose	Carton de 25.
10	203016 Fantaisie rouge	Carton de 25.



Référence	Description	Conditionnement
11	203017 Fleurie rose / bleue	Carton de 25.
12	203018 Beige / blanc	Carton de 25.

Pour découvrir la fiche commerciale du produit



SCANNEZ MOI !



LE FAUTEUIL DE TRANSFERT KLEM

Assise confortable. Pliant, léger et facilement transportable.



Vente au carton.

Référence	Largeur d'assise	Largeur plié	Poids	Palette	Conditionnement
216205	40 cm	22 cm	10,5 kg	Palette de 10 cartons	Carton de 1.
236101	43 cm	25 cm	10,6 kg	Palette de 6 cartons	Carton de 1.
236103	46 cm	34 cm	10,8 kg	Palette de 10 cartons	Carton de 1.



PENSEZ-Y !

DRAGONNE

Fixation par élastique. Longueur totale : 21,5 cm.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
215070	L'unité



CANNE ALU PLIANTE NOIRE

Poignée avec grip rouge et noir. Hauteur de 81,5 à 91,5 cm.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
251107R	Carton de 20.



CANNE PLIANTE ÉCLAIRANTE + ALARME

Réglable en hauteur. Éclairage par LED. Aluminium anodisé. Poignée noire.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
251113	Carton de 32.



CANNE TRIPODE

Canne trois pieds. Réglable. Embouts antidérapants.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
251112	Carton de 10.

Bain et toilettes



Produit 2,9 kg
Max. utilisateur 100 kg



Produit 2,83 kg
Max. utilisateur 100 kg



Produit 3,3 kg
Max. utilisateur 100 kg

CHAISE DE DOUCHE AVEC POIGNÉES
Siège en PVC et structure en aluminium. Elle est dotée d'une découpe à l'avant pour faciliter la toilette intime, ainsi que de poignées latérales pour simplifier le relevage.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
204037	Palette de 6 cartons de 4 boîtes de 1

2 EN 1 CHAISE / TABOURET DE DOUCHE AVEC POIGNÉES
Plastique et aluminium. Dossier amovible pour passer une chaise à un tabouret. Assise réglable en hauteur de 35 à 53 cm. Embouts antidérapants.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
204046	Palette de 6 cartons de 4 boîtes de 1

CHAISE DE DOUCHE
Chaise avec bras amovibles. Plastique et aluminium. Hauteur assise réglable de 42 à 55 cm.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
204036	Palette de 6 cartons de 4 boîtes de 1



Produit 1,2 kg
Max. utilisateur 100 kg



Produit 1,6 kg
Max. utilisateur 130 kg

TABOURET DE DOUCHE ROND
Léger et pratique, ce tabouret est équipé d'embouts souples antidérapants. En plastique et aluminium. Ajustable en hauteur sur 8 positions.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
204039	Palette de 16 cartons de 6 boîtes individuelles.

TABOURET DE DOUCHE D'ANGLE MÉO
Hauteur réglable 43 à 58 cm. Assise triangulaire 36 x 36 cm permettant une optimisation de la place. Embouts antidérapants.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
211046	Palette de 96 cartons de 1.

Pour plus de précision sur les produits



SCANNEZ MOI!




Produit 2,7 kg
Max. utilisateur 100 kg

PLANCHE DE BAIN
Grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation qui s'adaptent sur toutes les baignoires. Confortable, ergonomique, sûre. Poignée porte-savon. Espacements entre les supports réglables (de 31 à 53 cm).

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
204045	Palette de 12 cartons de 5 boîtes individuelles.

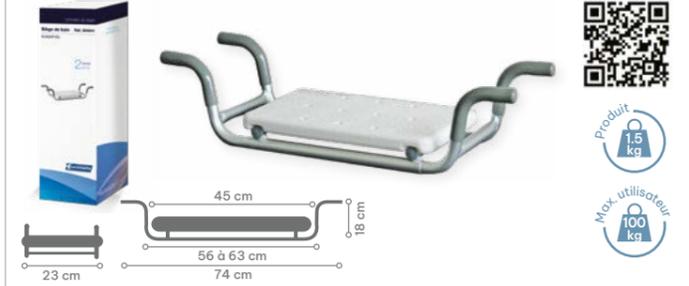

Produit 1,5 kg
Max. utilisateur 100 kg

SIÈGE DE BAIN SUSPENDU
Ultraléger et peu encombrant, il est réglable en largeur de 56 à 63 cm pour s'adapter à différents types de baignoires.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
204041	Palette de 8 cartons de 5 boîtes individuelles.



Produit 4,9 kg
Max. utilisateur 100 kg

SIÈGE DE DOUCHE MURAL
Siège rabattable en PVC et acier inoxydable. Large découpe pour la toilette intime et pieds ajustables. Facile à plier. Assise à 50 cm. Profondeur pliée : 11 cm.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
204040	Palette de 6 cartons de 4 boîtes individuelles.



Produit 5 kg
Max. utilisateur 100 kg

CADRE DE TOILETTE AKO
S'adapte à une large gamme de toilettes grâce à sa hauteur et sa largeur réglable. Les accoudoirs sont rembourrés en mousse pour augmenter le confort utilisateur.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
227115	Palette de 20 cartons de 1.



Produit 6,2 kg
Max. utilisateur 100 kg

CHAISE 2 EN 1
Cadre de toilette, garde robe. Réglable en hauteur, dossier escamotable. Hauteur : 41 à 55 cm. Largeur : 55 cm. Profondeur 48 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
211041	Palette de 24 cartons de 1.



Produit 6,2 kg
Max. utilisateur 100 kg

CHAISE 3 EN 1
Cadre de toilette et garde-robe, hauteur réglable. Accoudoirs escamotables. Hauteur réglable. Poignées mousse. Embouts antidérapants. Structure en acier blanc. Livré avec seau. Hauteur : 37 à 47 cm, largeur 49 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
211043	Palette de 8 cartons de 1.

Bain et toilettes



CHAISE GARDE-ROBE TANA
Chaise tube époxy bleu. Garniture confort bleu.
Hauteur ajustable : 78 à 93 cm. Hauteur du siège : 41 à 56 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
227114	Palette de 9 cartons de 3.



GARDE-ROBE PLIANTE OMEGA
Facile à ranger. Seau anatomique escamotable. Découpe intime. Pliante.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
227118	Palette de 20 cartons de 2



CHAISE DE DOUCHE 3 EN 1 CLARYS
Percée, garde-robe et cadre de toilette. Structure aluminium. Réglable en hauteur. Avec accoudoirs et marche-pieds. 4 roulettes dont 2 à freins. Dossier et repose-pieds démontables. Assise et couvercle en mousse.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
204013	Palette de 9 cartons de 1.



FAUTEUIL GARDE-ROBE À ROULETTES
Équipé d'accoudoirs et de repose-pieds amovibles. Deux roues arrière équipées de frein. Livré avec seau + couvercle. Robuste et compact. Hauteur du siège : 53 cm. Largeur assise : 45 cm. Profondeur : 42 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
227111	Palette de 6 cartons de 1

Index

A	F	
Abaisse-langue bois84	Fauteuil de transfert Klem91	Porte aiguille45
Aiguille Eurofine®59-60	Fauteuil garde-robe94	Protection anatomique80-81
Alèse81	Filet tubulaire51	Punch à biopsie stérile44
Anapore®49	Finéa® Couche droite81	
	Finéa® Form80	R
	Finéa® Lady80	Resiskin34
	Finéa® Men80	Rollator88-89
	Finéa® Pant80	
	Finéa® Slip81	S
B		Savon crème moussante78
Bandage tubulaire compressif Redigrip®51		Sensisafe®35
Bande49-50		Sensiskin34
Bâtonnet mousse27		Seringue60
Bistouri45	G	Set d'ablation de fils43
Blouse71	Gant d'examen latex36	Set d'anesthésie43
Boîte à dentier86	Gant d'examen nitriles34	Set de détersion/badigeon25-26
Bonnet universel73	Gant d'examen vinyles35	Set de pansement41-44
Boule56	Gant de chirurgie latex10	Set de suture43
Bracelet d'identification86	Gant de chirurgie synthétique Finessis®8-9	Siège de bain suspendu93
	Gant de chirurgie synthétique Nuzone®9	Siège de douche mural93
	Gant de chirurgie synthétique polyisoprène8	Slip de maintien82
	Gant de microchirurgie latex Maxitex®10	Softskin35
C	Gant de toilette77	Sonde à oxygène75
Cadre de toilette93	Gant d'intervention latex38	Sonde cannelée45
Calot plat en papier73	Gant obstétrique38	Sonde de Foley66
Canne90-91		Sonde PVC67
Carré de soin77	H	Sparadrapp49
Casaque de soin14	Haricot à usage unique86	Spéculum auriculaire84
Casaque renforcée13, 14	Housse pour amplis de brillance15	Spéculum gynécologique Cusco67
Casaque standard12, 13	Housse pour camera15	Stabilisateur90
Casquette à visière72		Stéthoscope84
Cathéter62-63	I-K	Stylét olivaire45
Chaise92 à 94	Instrument satellite27-45	Support de poche à urine66
Champ de soins42	Kit de protection visiteur71	
Champ de table15		L
Charlotte72-73		Lame45
Ciseaux métal45		Lingettes77-78
Compresse de gaze53-55		Lunette de protection72
Compresse en non-tissé54-55		Lunettes à oxygène75
Compresse grasse47		
Compresse oculaire55	M	
Compresse stérile emballage unitaire54	Manchette de protection73	
Coton56	Masque 3 plis type IIR72	
Coupe fils45	Masque à oxygène75	
Couvre-chaussure71	Masque FFP272	
Crachoir86	Méditulle®47	
Cupule stérile27	Microperfuseur61	
Curette dermatologique stérile44	Mouchoirs78	
		O
		Obturbateur pour cathéter62
		Ôte agrafe45
		Oxymètre de pouls85
D		
Déambulateur88		P
Distributeur de savon78		Pansement47-48
Doigtier roulé36		Perfenseur Europerf® S61
Dragonne91		Pince à disséquer45
Drap d'examen70		Pince Adson45
Drap de transfert73		Pince anatomique45
		Pince Kocher45
		Pince micro Adson45
		Planche de bain93
		Plateau26
		Poche à urine66
E		
E-roll70		
E-sat®84		
E-temp®84		
E-tens®84		
Étui thermomètre Thermosept®85		
Eurofine®59-60		
Eurofix®49		
Eurofly®61		
Euronyl®35		
Europen®59		
Europlai®47		
Eurotex®36		
Eurovit®48		

LABORATOIRES EUROMEDIS
Z.A de la Tuilerie
60290 Neuilly-sous-Clermont
Tél. 03 44 73 83 60

Retrouvez-nous sur
www.laboratoires-euromedis.fr

